

*Beauty®
Biowave*



ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTĽA 5V1 (SK)
ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE 5V1 (CZ)

BeautyBiowave MR810

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

Beauty®
Biowave

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, odporúčame si prečítať návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať, a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

BALENIE OBSAHUJE:

Kozmetický prístroj, indukčnú nabíjaciu základňu, čistiacu handričku.

Bezpečnostné upozornenia

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou a nepoužívajte ho pod vodou.
- Používajte výhradne originálny adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
- Po každom použití odpojte kozmetický prístroj od napájacieho kábla a adaptéra
- Nepoužívajte kozmetický prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo prístroj samotný.
- Nepoužívajte prístroj po páde na zem pokiaľ došlo k jeho poškodeniu.
- Nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ho pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nikdy sa nepokúšajte kozmetický prístroj rozoberať, alebo opravovať.
- Nenabíjajte prístroj v blízkosti vody, umývadla, vane, sprchového kúta, toalety, alebo vo vlhkom prostredí.
- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou alebo vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí. Nenechajte deti hrať sa s prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou, alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby (okrem detí) môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospelé osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurón gélmi, alebo koncentrátmi.
- Ultrazvuk sa nesmie používať na oblasť očí, v bezprostrednej blízkosti očí (oblasť očnej bulvy) a v oblasti štítnej žľazy.
- Používajte prístroj len na zdravej pokožke.
- Prístroj používajte max. 1x denne. Na citlivú pokožku 1 týždenne, prípadne podľa potreby.
- Pokiaľ pociťujete nepohodlie, prestaňte prístroj používať.
- Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.

POZNÁMKA: Prístroj funguje len vtedy, keď sa rukami dotýkate dotykovej plochy a keď je prístroj umiestnený kolmo na pokožku. Iba vtedy prechádza pokožkou mikroprúd.

Kontraindikácie


- Tehotenstvo, kojenie, menštruácia
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
- Horúčka, zápal, akútne infekcie (napr. akné, psoriáza, ružienka)
- Bakteriálna infekcia kože, akútne herpetické a zápalové ochorenia kože
- Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- Oblasť tela so závažnými poruchami krvného obehu
- Ischemická choroba srdca, srdcová arytmia
- Akútne reumatické ochorenia
- Neurologické ochorenia (napr. migrény)
- Užívanie kortizolu alebo liekov zvyšujúcich citlivosť na svetlo
- Auto-imunitné ochorenia
- Poruchy krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia
- Poruchy zrážanlivosti krvi
- Poškodená, alebo spálená pokožka
- Alergie na kovy, na zmeny teploty, na elektromagnetické vlnenie

Oblasť tela, ktoré by ste nemali ošetrovať kozmetickým prístrojom

- Miecha, chrbtica, mozog
- Očné bulvy, očné viečka, pery
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospelých
- Oblasť pohlavných žliaz
- Oblasť štítnej žľazy

POZNÁMKA: Ak máte pochybnosti, či môžete prístroj používať, kontaktujte vášho predajcu, vašu kozmetičku, alebo odborného lekára.

Popis prístroja:

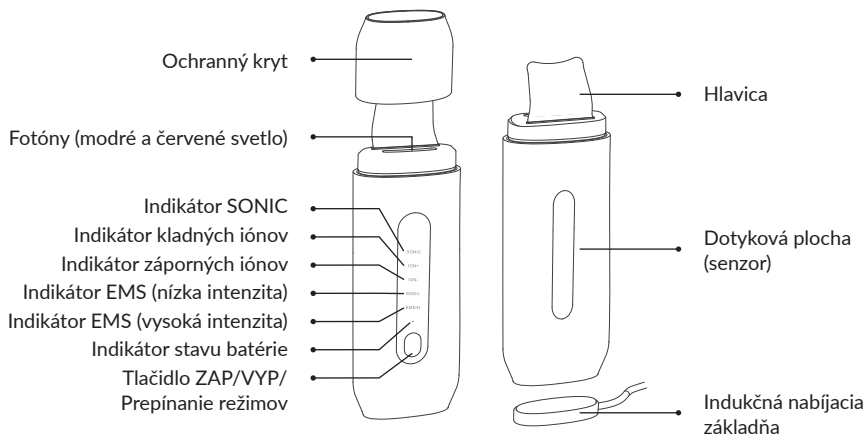

Nabíjanie kozmetického prístroja

- Pred použitím musí byť prístroj úplne nabitý. Štandardné nabíjanie prístroja trvá približne 4 hodiny.
- USB kábel základne pripojte k vhodnému adaptéru, alebo k USB konektoru vášho PC.
- Prístroj umiestnite do nabíjacej základne. Indikátor stavu batérie začne blikať načerveno.
- Keď je batéria prístroja naplno nabitá, indikátor stavu batérie bude svietiť nazeleno.
- Keď je zostávajúca kapacita batérie veľmi nízka, prístroj 3x pípne a indikátor stavu batérie začne blikať načerveno.
- Keď je batéria takmer vybitá, prístroj 2x pípne, indikátor stavu batérie prestane svietiť a prístroj sa následne vypne.

POZNÁMKA: Produkt obsahuje lítiové batérie. Priložený adaptér je určený LEN pre nabíjajúcu základňu. Aby ste predišli riziku poruchy alebo úrazu, nekladajte do nabíjacej základne žiadne kovové predmety.


Funkcie kozmetického prístroja


Tento kozmetický prístroj je určený na zlepšenie kvality vašej pleti. Pomáha eliminovať vrásky, spevňuje pokožku, dokonale vyčistí vašu pokožku až do hĺbky, zlepšuje jej prekrvenie, textúru pokožky, napomáha pri absorpcii aktívnych látok. Už po niekoľkých ošetreniach bude vaša pokožka vyzeráť oveľa jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne definovanými kontúrami.


Používanie kozmetického prístroja


ZAPNUTIE PRÍSTROJA A PREPÍNANIE REŽIMOV:

UPOZORNENIE: Pred použitím odpojte prístroj od nabíjania.

Stlačte tlačidlo  (**ZAP/VYP**) na 2 sekundy pre zapnutie prístroja. Aktivuje sa režim **CLEAN** (čistenie) a rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **ION+**. Po 5 minútach činnosti v režime CLEAN sa prístroj automaticky vypne.

Znova stlačte tlačidlo  (**ZAP/VYP**) a prístroj sa prepne z režimu CLEAN do režimu **MOISTURE** (hydratácia). Rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **ION-**. Po 5 minútach činnosti v režime MOISTURE sa prístroj automaticky vypne.


Znova stlačte tlačidlo  (**ZAP/VYP**) a prístroj sa prepne z hydratačného (MOISTURE) režimu do režimu **EMS/L** (Lifting - nízka intenzita). Rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **EMS/L**. Po 5 minútach činnosti v režime EMS/L sa prístroj automaticky vypne.

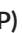Znova stlačte tlačidlo  (**ZAP/VYP**) a prístroj sa prepne z režimu EMS/L do režimu **EMS/H** (Lifting - vysoká intenzita). Rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **EMS/H**. Po 5 minútach činnosti v režime EMS/H sa prístroj automaticky vypne.

Opakovaným stláčaním tlačidla  (**ZAP / VYP**) prepínate jednotlivé režimy prístroja.

VYPNUTIE PRÍSTROJA :

Prístroj sa v každom režime automaticky vypne po ubehnutí 5 minút.

Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo  (**ZAP/VYP**) na 2 sekundy a prístroj sa vypne.

NÍZKY STAV BATÉRIE:

Keď je zostávajúca kapacita batérie veľmi nízka, prístroj 3x pípne a indikátor stavu batérie začne blikať načerveno. Keď je batéria takmer vybitá, prístroj 2x pípne, indikátor stavu batérie prestane svietiť a prístroj sa následne vypne.

Režim CLEAN - čistenie (ultrazvuk plus kladné ióny plus modré svetlo)

V režime čistenia emituje prístroj kladné ióny, vďaka čomu sa z povrchového tkaniva pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je tak účinne čistená aj do hĺbky. Súčasne prístroj generuje aj ultrazvukové vlny, ktoré zvýšia prekrvenie oblasti, rozkmitajú tkanivo a čistenie pleti je tak oveľa dôkladnejšie. Modré LED svetlo súčasne upokojuje podráždenú pokožku a má výrazný antiseptický účinok.



1. Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up a vyčistite pleť od nečistôt.
2. Prepnite prístroj do režimu **CLEAN** (čistenie). Rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **ION+**.
3. Umiestnite ošetrovaciu hlavicu tak, aby bol displej otočený k tvári a predná hrana hlavice sa dotýkala pokožky. Bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte priamymi posuvmi hlavice po celej tvári po dobu 5 minút. Sústreďte sa najmä na nos a okolie nosa, aby ste dokonale vyčistili aj nečistoty z hĺbkych pórov.
4. Po 5 minútach činnosti sa prístroj automaticky vypne. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou
5. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

Režim MOISTURE – hydratácia (ultrazvuk plus záporné ióny plus červené svetlo)

V hydratačnom režime emituje prístroj záporné ióny spolu s ultrazvukovými vlnami. Táto kombinácia umožňuje vynikajúcu absorpciu aktívnych látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do hlbších vrstiev pokožky. Červené svetlo zároveň posilňuje elasticitu pokožky a je veľmi užitočné aj pre proces obnovy pokožky.



1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby (pocit suchej pleti) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu. Keďže aplikovaný kozmetický prípravok musí byť vodivý, nepoužívajte pleťový krém ani fluid.
2. Prepnite prístroj do režimu **MOISTURE**. Rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **ION-**.
3. Umiestnite ošetrovaciu hlavicu tak, aby bol displej otočený smerom od tváre a predná hrana hlavice sa dotýkala pokožky. Bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte priamymi ťahmi hlavice po celej tvári po dobu 5 minút. Sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica hladko kĺže.
4. Po 5 minútach činnosti sa prístroj automaticky vypne.
5. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.

Režim EMS - spevňujúci lifting a anti-aging

V tomto režime prístroj využíva technológiu EMS pre spevnenie pleti a zvýšenie produkcie kolagénu. EMS je terapia mikroprúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže imitovať pocit reálnej masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi efektívna na vyčistenie kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie krvného obehu v oblasti aplikácie.

Táto mikroprúdová terapia stimuluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu s nízkymi frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to aj pasívny pohyb.

Technológia EMS aktivuje bunky na povrchu aj vo vnútorných vrstvách pokožky, výrazne stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky a zanecháva pokožku hebkú a sviežu.



1. Prepnete prístroj do režimu **EMS/L** alebo **EMS/H**. Rozsvietia sa kontrolky **SONIC** a **EMS/L** alebo **EMS/H**. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyaluronového séra, alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby (pocit suchej pleti) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu.
2. Umiestnite ošetrovaciu hlavicu tak, aby bol displej otočený k tvári a predná hrana hlavice sa dotýkala pokožky. Bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte priamymi ťahmi hlavice po celej tvári po dobu 5 minút. Sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások a ochabnutej pleti. Uistite sa, že pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica hladko kĺže
3. Po 5 minútach sa prístroj automaticky vypne.
4. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.
5. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

POZNÁMKA: Príliš veľké množstvo gélu alebo séra by mohlo spôsobiť šupinky na pokožke. Preto nie je vhodné použiť na jednu aplikáciu viac ako 1-2 stlačenia aplikátora hyaluronového gélu, alebo séra.

Ako často prístroj používať

Odporúčame pravidelné ošetrovanie pleti 2 až 3× do týždňa, 3 až 5 minút každý z režimov.

Parametre a technické údaje:

Menovité napätie:	3,7 V
Menovitý prúd (max.):	500 mA
Batéria:	Lítiová
Vodeodolnosť:	IPX5 (prístroj), nabíjacia základňa nie je vodeodolná
Čas nabíjania:	približne 4 hodiny
Časovač:	5 minút
Ultrazvuk (frekvencia):	25,5 kHz (± 5 kHz)

Tento kozmetický prístroj je elektrické zariadenie.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Čistenie

Po použití prístroja utrite prístroj navlhčenou handričkou. Následne prístroj dôkladne osušte suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte alkohol, ani čistiace prostriedky. Neponárajte prístroj do vody, alebo ho neumiestňujte pod prúd vody.

Skladovanie

Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Často kladené otázky a riešenie problémov:

Problém:	Možná príčina:	Riešenie problému:
Prístroj sa nezapol.	<ol style="list-style-type: none">1. Príliš nízka zostávajúca kapacita batérie.2. Neznáma porucha.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyskúšajte zapnúť prístroj po 3 hodinách nabíjania.2. Ak sa prístroj nezapne, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
Prístroj nefunguje ani po plnom nabití.	<ol style="list-style-type: none">1. USB kábel nie je správne zasunutý do nabíjacieho konektora, alebo adaptér nie je správne zapojený v elektrickej sieti.2. Prístroj sa dostatočne nenabil.3. Batéria je na konci svojej životnosti.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či sa prístroj správne nabíja. Blikajúce kontrolky symbolizujú nabíjanie.2. Ak sa prístroj nezapne, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
V režime EMS nepociťujem žiadny účinok.	<ol style="list-style-type: none">1. Nedotýkate sa dotykovej plochy (mikroprúdového senzora) navlhčenými prstami.2. Príliš nízka zostávajúca kapacita batérie.3. Poškodenie prístroja.	<ol style="list-style-type: none">1. Navlhčíte si ruky, dotknite sa prstami dotykovej plochy (senzora) a hlavicu priložte na pokožku.2. Nabíjajte prístroj 3 hodiny a znova vyskúšajte.3. Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
Teplota prístroja je príliš vysoká.	<ol style="list-style-type: none">1. Prístroj používate príliš dlho.2. Do prístroja mohla vniknúť voda.3. Poškodenie prístroja.	<ol style="list-style-type: none">1. Vypnite prístroj a opätovne ho vyskúšajte o 30 minút.2. Nevystavujte prístroj kontaktu s vodou.3. Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
Použitie prístroja po dlhšom časovom období.		Ak ste prístroj nepoužívali dlhšie ako 6 mesiacov, odporúčame prístroj najskôr nabiť a až následne používať.

NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

Děkujeme za vaši důvěru, projevenou zakoupením našeho produktu. Přejeme vám příjemné používání tohoto kosmetického přístroje a hodně radosti a spokojenosti z dosažených výsledků.

DŮLEŽITÉ: Abyste se z kosmetického přístroje mohli těšit po dlouhou dobu, doporučujeme si přečíst návod k použití, než začnete přístroj používat. Návod uschovejte pro pozdější použití.

BALENÍ OBSAHUJE:

Kosmetický přístroj, indukční nabíjecí základna, čistící hadřík.

Bezpečnostní upozornění

- Nenamáčejte přístroj do vody ani do jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí a nepoužívejte ho pod vodou.
- Používejte výhradně originální adaptér, který je součástí balení.
- Po každém použití odpojte kosmetický přístroj od napájecího kabelu a adaptéru
- Nepoužívejte kosmetický přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo přístroj samotný.
- Nepoužívejte přístroj po pádu na zem, pokud došlo k jeho poškození.
- Nabíjecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí. Nevystavujte ho působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nikdy se nepokoušejte kosmetický přístroj rozebírat nebo opravovat.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti vody, umyvadla, vany, sprchového koutu, toalety, nebo ve vlhkém prostředí.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně očistíte suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí. Nenechte děti hrát si s přístrojem.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Výše uvedené osoby (kromě dětí) mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použití.
- Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyaluron gely nebo koncentráty.
- Ultrazvuk se nesmí používat na oblast očí, v bezprostřední blízkosti očí (oblast oční bulvy) a v oblasti štítné žlázy.
- Používejte přístroj pouze na zdravé pokožce.
- Přístroj používejte maximálně 1x denně. Na citlivou pokožku 1 týdně, případně podle potřeby.
- Pokud pociťujete nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celé tváři.
- Po zakoupení přístroje zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy.

POZNÁMKA: Přístroj funguje pouze tehdy, když se rukama dotýkáte dotykové plochy a když je přístroj umístěn kolmo na pokožku. Pouze tehdy prochází pokožkou mikroproudu.

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení ošetření pokožky se ujistěte, že je přístroj suchý a následně jej umístěte do základny.

Kontraindikace


- Těhotenství, kojení, menstruace
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
- Horečka, záněty, akutní infekce (např. Akné, lupénka, zarděnky)
- Bakteriální infekce kůže, akutní herpetické a zánětlivé onemocnění kůže
- Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
- Oblasti těla se závažnými poruchami krevního oběhu
- Ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie
- Akutní revmatická onemocnění
- Neurologická onemocnění (např. migrény)
- Užívání kortizolu nebo léků zvyšujících citlivost na světlo
- Auto-imunitní onemocnění
- Poruchy krve, cévnímu systému nebo jiné interní onemocnění
- Poruchy srážlivosti krve
- Poškozená nebo spálená pokožka
- Alergie na kovy, na změny teploty, na elektromagnetické vlnění

POZNÁMKA: Pokud máte pochybnosti, zda můžete přístroj používat, kontaktujte svého prodejce, vaši kosmetičku nebo odborného lékaře.

Oblasti těla, které byste neměli ošetřovat

- Mícha, páteř, mozek
- Oční bulvy, oční víčka, rty
- Zóny intenzivního růstu u dětí a dospívajících
- Oblast pohlavních žláz
- Oblast štítné žlázy

Popis přístroje:

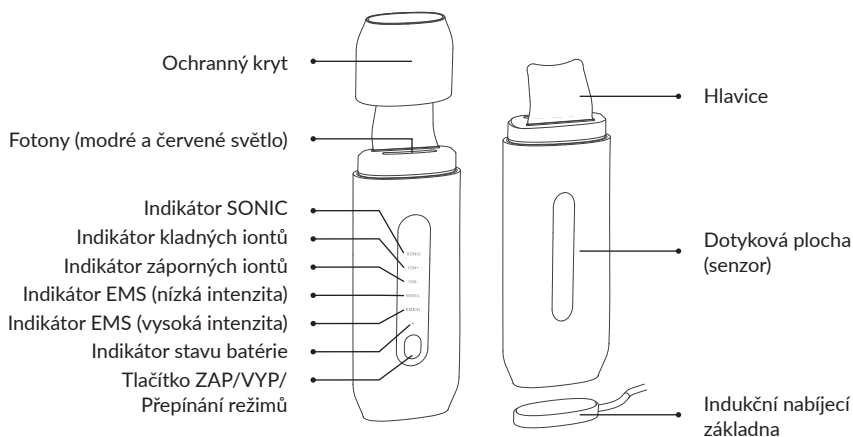

Nabíjení kosmetického přístroje

- Před použitím musí být přístroj zcela nabitý. Standardní nabíjení přístroje trvá přibližně 4 hodiny.
- Dodávaný USB kabel připojte k nabíjecímu konektoru USB na přístroji. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému adaptéru, nebo USB konektoru vašeho počítače.
- Přístroj umístěte do nabíjecí základny. Indikátor stavu baterie začne blikat červeně.
- Když je baterie přístroje naplno nabitá, indikátor stavu baterie bude svítit zeleně.
- Když je zbývající kapacita baterie velmi nízká, přístroj 3x pípne a indikátor stavu baterie začne blikat červeně.
- Když je baterie téměř vybitá, přístroj 2x pípne, indikátor stavu baterie přestane svítit a přístroj se následně vypne.

POZNÁMKA: Přístroj obsahuje lithiové baterie. Příložený adaptér je určen pouze pro nabíjecí základnu. Abyste předešli riziku poruchy nebo úrazu, nevkládejte do nabíječky žádné předměty.

Funkce kosmetického přístroje

Tento kosmetický přístroj je určen pro zlepšení kvality vaší pleti. Pomáhá eliminovat vrásky, zpevňuje pokožku, dokonale vyčistí vaši pokožku až do hloubky, zlepšuje její prokrvení, texturu pokožky, napomáhá při absorpci aktivních látek. Už po několika ošetřeních bude vaše pokožka vypadat jasnější a svěžejší, se zřetelně definovanými konturami.

Používání kosmetického přístroje

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ:

UPOZORNĚNÍ: Před použitím odpojte přístroj z nabíjení.

Stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP/VYP)** na 2 sekundy pro zapnutí přístroje. Aktivuje se režim **CLEAN** (čištění) a rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **ION+**. Po pěti minutách činnosti v režimu CLEAN se přístroj automaticky vypne.

Znovu stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP/VYP)** a přístroj se přepne z režimu CLEAN do režimu **MOISTURE** (hydratace). Rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **ION-**. Po 5 minutách činnosti v režimu MOISTURE se přístroj automaticky vypne.

Znovu stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP/VYP)** a přístroj se přepne z režimu MOISTURE do režimu **EMS/L** (Lifting - nízká intenzita). Rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **EMS/L**. Po 5 minutách činnosti v režimu EMS/L se přístroj automaticky vypne.

Znovu stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP/VYP)** a přístroj se přepne z režimu EMS/L do režimu **EMS/H** (Lifting - vysoká intenzita). Rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **EMS/H**. Po 5 minutách činnosti v režimu EMS/H se přístroj automaticky vypne.

Opakováním stisknutím tlačítka **⏻ (ZAP / VYP)** přepínáte jednotlivé režimy přístroje.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:

Přístroj se v každém režimu automaticky vypne po uběhnutí času 5 minut.

Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP/VYP)** na 2 sekundy a přístroj se vypne.

NÍZKÝ STAV BATERIE:

Když je zbývající kapacita baterie velmi nízká, přístroj 3x pípne a indikátor stavu baterie začne blikat červeně. Když je baterie téměř vybitá, přístroj 2x pípne, indikátor stavu baterie přestane svítit a přístroj se následně vypne.

Režim CLEAN - čištění **(ultrazvuk plus kladné ionty plus modré světlo)**

V režimu čištění emituje přístroj kladné ionty, díky čemuž se z povrchové tkáně pokožky extrahují záporné ionty a vaše pokožka je tak účinně čištěna i do hloubky. Současně přístroj generuje i ultrazvukové vlny, které zvýší prokrvení oblasti, rozkmitají tkáň a čištění pleti je tak mnohem důkladnější. Modré LED světlo současně zklidňuje podrážděnou pokožku a má výrazný antiseptický účinek.



1. Před samotným čištěním důkladně odstraňte make-up a vyčistěte pleť od nečistot.
2. Přepněte přístroj do režimu **CLEAN** (čištění). Rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **ION+**.
3. Umístěte ošetřovací hlavici tak, aby displej byl otočen směrem k obličeji a přední hrana hlavice se dotýkala pokožky. Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte přímými posuny hlavice po celém obličeji po dobu 5 minut. Soustřeďte se hlavně na nos a okolí nosu, abyste dokonale vyčistili i nečistoty z hloubky porů.
4. Po 5 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne. Hlavici důkladně vyčistěte čistícím hadříkem.
5. Důkladně opláchněte obličej čistou vodou.

Režim **MOISTURE** – hydratace (ultrazvuk plus záporné ionty plus červené světlo)

V hydratačním režimu emituje přístroj záporné ionty spolu s ultrazvukovými vlnami. Taková kombinace umožňuje absorpci látek (kyselina hyaluronová) i do hlubších vrstev pokožky. Červené světlo zároveň posiluje elasticitu pokožky a je velmi užitečné i pro proces obnovy pokožky.



1. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyaluronové gelu nebo séra (1-2 stlačení aplikátoru). Nepoužívejte tampónek. V případě potřeby (pocit suché pleti) naneste malé množství vody, nebo vodivého gelu. Jelikož aplikován kosmetický přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový krém, ani fluid.
2. Přepněte přístroj do režimu **MOISTURE**. Rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **ION-**.
3. Umístěte ošetřovací hlavici tak, aby displej byl otočen směrem od obličeje a přední hrana hlavice se dotýkala pokožky. Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte přímými posuny hlavice po celém obličeji po dobu 5 minut. Soustřeďte se hlavně na oblasti výskytu vrásek. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní hlavice lehce klouže.
4. Po 5 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne.
5. Hlavici důkladně vyčistěte čistícím hadříkem.

Režim EMS - zpevňující lifting a anti-aging

V tomto režimu přístroj využívá technologii EMS pro zpevnění pleti a zvýšení produkce kolagenu. EMS je terapie mikroproudy s nízkými frekvencemi, která dokáže imitovat pocit reálné masáže, poklepávání, akupunktury, či baňkování. Je velmi efektivní na vyčištění kanálů, posílení životní energie, jakož i pro zvýšení krevního oběhu v oblasti aplikace.

Tato mikroproudová terapie stimuluje (dráždí) svaly pomocí elektrického proudu s nízkými frekvencemi a vyvolává jejich nucenou kontrakci. Nazývá se to i pasivní pohyb.

Technologie EMS aktivuje buňky na povrchu, ale i ve vnitřních vrstvách pokožky, výrazně stimuluje tvorbu kolagenu, zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky a zanechává pokožku hebkou a svěží.



1. Přepněte přístroj do režimu **EMS/L** nebo **EMS/H**. Rozsvítí se kontrolky **SONIC** a **EMS/L** nebo **EMS/H**. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyaluronového gelu nebo séra (1-2 stlačení aplikátoru). Nepoužívejte tampónek. V případě potřeby (pocit suché pleti) naneste malé množství vody, nebo vodivého gelu. Jelikož aplikovaný kosmetický přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový krém, ani fluid.
2. Umístěte ošetrovací hlavici tak, aby displej byl otočen směrem k obličejí a přední hrana hlavice se dotýkala pokožky. Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte přímými posuny hlavice po celém obličejí po dobu 5 minut. Soustředte se hlavně na oblasti vrásek a ochablé pokožky. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní hlavice lehce klouže.
3. Po 5 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne.
4. Hlavici důkladně vytřete čistícím hadříkem.
5. Důkladně opláchněte obličej čistou vodou.

POZNÁMKA: Příliš velké množství gelu nebo séra by mohlo způsobit šupinky na pokožce. Proto není vhodné použít na jednu aplikaci 1-2 stlačení kyseliny hyaluronové ve formě gelu nebo séra.

Jak často přístroj používat

Doporučujeme pravidelné ošetření pleti 2x až 3x týdně, každý z režimů.

Parametry a technické údaje:

Jmenovité napětí:	3,7 V
Jmenovitý proud (max.):	500 mA
Baterie:	Lithiová
Voděodolnost:	IPX5 (přístroj), nabíjecí základna není voděodolná
Doba nabíjení:	přibližně 4 hodiny
Časovač:	5 minut
Ultrazvuk (frekvence):	25,5 kHz (±5 kHz)

Tento kosmetický přístroj je elektrické zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a designové úpravy.

Informace o životním prostředí

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních komponentů a materiálů. Na konci své životnosti výrobek nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale předejte na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pomozte chránit životní prostředí na recyklaci použitých výrobků.

Čištění

Po použití přístroje otřete přístroj navlhčeným hadříkem. Následně přístroj důkladně osušte suchým hadříkem. Nikdy neotírejte magnetický kruh alkoholem, ani čisticími prostředky. Neponořujte přístroj do vody, ani ho neumísťujte pod proud vody.

Skladování

Skladujte na místě s konstantní vlhkostí a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. Skladujte mimo dosah dětí. Přístroj je určen pro dospělého uživatele, který důkladně porozuměl návodu k použití. Přístroj je elektrické zařízení.

Často kladené otázky a řešení problémů:

Problém:	Možná příčina:	Řešení problémů:
Přístroj se nezapnul.	<ol style="list-style-type: none">1. Příliš nízká zbývajcí kapacita baterie.2. Neznáma porucha.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyzkoušejte zapnout přístroj po 3 hodinách nabíjení.2. Pokud se přístroj nezapne, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
Přístroj nefunguje ani po dlouhém nabíjení.	<ol style="list-style-type: none">1. USB kabel není správně zasunut do nabíjecího konektoru nebo adaptér není správně zapojen v elektrické síti.2. Přístroj se dostatečně nenabil.3. Baterie je na konci své životnosti.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda se přístroj správně nabíjí. Blikající kontrolky symbolizují nabíjení.2. Pokud se přístroj nezapne, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
V režimu EMS nepocítuji žádný účinek.	<ol style="list-style-type: none">1. Nedotýkáte se dotykové plochy (mikroprúdového senzoru) navlhčenými prsty.2. Příliš nízká zbývajcí kapacita baterie.3. Poškození přístroje.	<ol style="list-style-type: none">1. Navlhčete si ruce. Dotýkejte se dotykového senzoru a hlavici přiložte na pokožku.2. Nabíjejte přístroj 3 hodiny a znovu vyzkoušejte.3. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
Teplota přístroje je příliš vysoká.	<ol style="list-style-type: none">1. Přístroj používáte příliš dlouho.2. Do přístroje mohla vniknout voda.3. Poškození přístroje.	<ol style="list-style-type: none">1. Vypněte přístroj a znovu jej vyzkoušejte o 30 minut.2. Nevystavujte přístroj kontaktu s vodou.3. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
Použití přístroje po delším časovém období.		Pokud jste přístroj nepoužívali déle než 6 měsíců, doporučujeme přístroj naplno nabít a až následně používat.

Importér:

Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com



*Beauty[®]
Biowave*