

*Beauty®
Biowave*



PROFESIONÁLNA ŽEHLIČKA NA PLEŤ (SK)
KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ (CZ)

PROFI 7v1

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

Beauty®
Biowave

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

BALENIE OBSAHUJE:

prístroj, stojan, USB kábel na nabíjanie, okuliare

Bezpečnostné upozornenia

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Napájací ani nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospeléj osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Nenechajte deti hrať sa prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmami a koncentrátmi.

Kontraindikácie

- kardiostimulátor
- tehotenstvo
- rakovina/nádory
- horúčkavité stavy a zápaly
- bakteriálne infekcie kože

- pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- poškodenia kože
- oblasti tela so závažnými poruchami krvného obehu
- nedostatočný krvný obeh
- ischemická choroba srdca
- srdcová arytmia
- cievne choroby končatín (trombóza, flebitída)
- poruchy koagulácie (zrážania krvi)

Oblasti tela, ktoré by ste nemali ošetrovať ultrazvukom a galvanickým prúdom

- Miecha a chrbtica
- Očné bulvy
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospievajúcich
- Oblasť pohlavných žliaz
- Oblasť štítnej žľazy

Funkcie kozmetického prístroja:

Galvanický prúd - kladné ióny (čistenie)

Galvanický prúd – záporné ióny (výživa)

Ultrazvuková technológia

Mikromasáž

Fotóny (modré svetlo, červené svetlo, zelené svetlo, žlté svetlo)

Lifting anti-aging na najvyššej úrovni

Sme potešení, že ste sa rozhodli pre kozmetický prístroj **Profi 7v1**. Pomocou tohto kozmetického prístroja dosiahnete v starostlivosti o vašu pleť tie najlepšie výsledky, a to najmä v kombinácii s hyalurónovými prípravkami z našej ponuky (gély, koncentráty). **Profi 7v1** dokáže vašu pokožku dôkladne regenerovať do hĺbky, takže už po niekoľkých ošetrovaniach vyzerá vaša pokožka oveľa jasnejšie a sviežejšie. Ošetrovanie vašej pokožky je úplne jednoduché a šetrné, redukuje jemné vrásky a linky, omladzuje vaše spojivé tkanivo, podporuje krvný obeh a obeh lymfatických tekutín a má tiež pozitívny vplyv na poškodenú a podráždenú pokožku.

Čo je ultrazvuk?

Ultrazvuk sú zvukové vlny, nachádzajúce sa nad prahom počuteľnosti ľudského sluchu. Ultrazvuk účinkuje na pokožku tak tepelne, ako aj mechanicky a biochemicky.

Mechanický účinok ultrazvuku je dosahovaný intenzívnou masážou elastických vlákien pokožky. Takáto masáž stimuluje tvorbu nového kolagénu, vďaka čomu je pokožka pevnejšia a napnutejšia. Uvoľnia sa komedóny (čierne bodky), vďaka čomu sa po ultrazvukovom ošetroaní dajú veľmi ľahko a bezbolestne odstrániť. V hĺbke pokožky vzniká teplo, ktoré aktivuje metabolizmus a podporuje detoxikáciu. Toto stimuluje regeneráciu pokožky a pôsobí proti procesu starnutia. Po aplikovaní aktívnych látok, ktoré vďaka použitiu prístroja prenikajú intenzívne do pokožky, dosiahneme krajšiu a žiarivejšiu pleť a to aj v prípade chýb na pokožke, ako sú napríklad ružienka, akné, jazvy, atď. Na ošetrovanie ultrazvukom sú obzvlášť vhodné hyaluronové gély a koncentráty. Hyaluronové gély nemeckej značky Wellmaxx® a Deveen® obsahujú kyselinu hyaluronovú s vysokou alebo nízkou molekulárnou hmotnosťou vo veľmi vysokej koncentrácii a sú veľmi vhodné na použitie s týmto prístrojom.

Ošetrovaním vašej pleti pomocou tohto prístroja a vhodných prípravkov dosiahnete výrazné zlepšenie rovnováhy vlhkosti pokožky a vďaka tomu trvalo sviežu a omladenú pleť. Aplikovaním samotných hyaluronových gélov alebo koncentrátov bez použitia ultrazvukového alebo galvanického prúdu taký pozoruhodný efekt nedosiahnete.

Ultrazvukové ošetrovanie je obvykle mimoriadne príjemné, väčšinou cítite iba miernu tvorbu tepla. Už po 3 až 4 ošetrovaniach zaregistrujete viditeľné zlepšenie stavu vašej pokožky. Ultrazvuk tiež pomáha uvoľňovať napätie v krku a zmierňovať bolesti hlavy.

Čo je galvanický prúd?

Galvanický prúd je jednosmerný prúd bez frekvencie a striedania pólov, ktorý tečie vždy len v jednom smere. Kladne nabité častice sa pohybujú smerom k pólu MÍNUS, záporne nabité častice migrujú k pólu PLUS. Pri správnom postupe vyvolávajú v tele pozitívne reakcie, na ktorých sú založené rôzne metódy ošetrovania a liečby.

Už Luigi Galvani, objaviteľ galvanického prúdu, publikoval svoje vedomosti o využití galvanického prúdu v naturopatii (celostnej medicíne). Do kozmetiky sa galvanický prúd dostal postupom času cestou prírodnej medicíny.

V kozmetike sa galvanický prúd využíva najmä na vysoko účinné čistenie pórov, intenzívnejšie a efektívnejšie zavádzanie účinných látok do pokožky, posilňovanie spojivového tkaniva, zlepšenie krvného obehu a prietoku lymfatických tekutín.

Čo je fotónová funkcia?

PHOTON LED (svetelná energia) funguje vďaka použitiu špeciálneho LED svetla vyvinutého výhradne pre kozmetické prístroje veľmi účinne a efektívne bez akéhokoľvek poškodzovania pokožky. Rozlúčte sa s vašimi kožnými problémami, získajte dokonalú pleť použitím modrého, zeleného, červeného a žltého svetla.

Pri používaní fotónovej funkcie dosiahnete najlepšie výsledky tak, že počas jednej aplikácie striedavo použijete všetky druhy svetla PHOTON LED (červené, žlté, zelené, modré).

ČERVENÉ SVETLO (PHOTON LED)

- preniká do hĺbky 8 až 10 mm a je vhodné pre všetky typy pleti
- v ošetrovanej oblasti zvyšuje mikrocirkuláciu, tvorbu kolagénu, redukuje vrásky, stimuluje bunkovú aktivitu, po jeho použití sa pleť vypne a zjemní

ZELENÉ SVETLO (PHOTON LED)

- pôsobí na pleť upokojujúco a veľmi relaxačne, je vhodné aj pre zmiešanú pleť
- používajte pri problémoch s nadmernou pigmentáciou, na flaky a poškodenia z nadmerného vystavovania pokožky slnku a tiež na jazvičky v dôsledku akné

MODRÉ SVETLO (PHOTON LED)

- preniká do hĺbky 0,5 mm a upokojuje pleť
- vhodné pre citlivú pleť, mastnú pleť a je veľmi vhodné pre pleť s akné (ničí akné baktérie)

ŽLTÉ SVETLO (PHOTON LED)

- má upokojujúci, revitalizujúci a omladzujúci efekt na pokožku, je mimoriadne vhodné na citlivú pleť, v kombinácii s modrým svetlom skvele pôsobí na akné a na pleť
- vhodné na širšiu škálu problémov, napr. rosacea, vystupujúce žilky, červená, zapálená, podráždená pokožka, v kombinácii s červeným svetlom skvele účinkuje pri eliminácii vrások

Doprajte svojej pokožke dokonalú starostlivosť

Kombináciou inovatívnych technológií obsiahnutých v kozmetickom prístroji **Profi 7v1** a vysoko kvalitných produktov WELLMAXX a DEVEE dosiahnete aj v pohodlí vášho domova vynikajúce účinky v starostlivosti o pleť. Kozmetický prístroj **Profi 7v1** zabezpečí dokonalý prenos aktívnych zložiek do pokožky, hyalurónový gél a hyalurónové koncentráty poskytujú zložky tej najvyššej kvality. Tento perfektne zladený tím poskytne vašej pokožke na dlhú dobu sviežejší a žiarivejší vzhľad. Už po niekoľkých aplikáciách zbadáte viditeľné výsledky. Zvoľte si individuálny režim ošetrovania, ktorý je optimálny pre vašu pokožku. Pred každým ošetrením si bežným postupom dôkladne očistíte vašu tvár.

A len tak mimochodom – nielen pleť na vašej tvári sa poteší tejto zvýšenej starostlivosti. Rovnako váš dekolt a vaše ruky budú vyzerat' sviežejšie a akoby bezstarostnejšie. Dokonca aj pri celulitíde dokáže ultrazvukové ošetrovanie postihnutých častí tela priniesť veľmi pozitívne výsledky.

Starostlivosť o pleť

Snečné žiarenie, dedičné dispozície, prirodzené starnutie pokožky – tieto a ďalšie vplyvy spôsobujú úbytok kolagénu vo vašej pokožke. Dochádza k vzniku vrások a fenoménu ochabnutej kože. Kozmetické prípravky účinkujú len na povrchu kože, ale na kolagén

nachádzajúci sa v hlbších vrstvách pokožky nemajú prakticky žiaden účinok. Aj toto je dôvod, prečo ani pri použití drahej kozmetiky často nedochádza k viditeľnému efektu zlepšenia zvráskavenej pleti.

Vďaka kozmetickému prístroju **Profi 7v1** dosiahnete unikátny hĺbkový stimulujúci efekt, ktorý dokáže aktivovať regeneráciu kolagénu, spevniť kožu, pozoruhodne vplýva na zlepšenie vzhľadu pokožky a farby pleti. Súčasná aplikácia hyalurónového séra, koncentrátu, gélu a následne aj pleťového krému spolu s týmto prístrojom je veľmi efektívna cesta k výraznému zlepšeniu stavu a vzhľadu vašej pokožky.

Kozmetický prístroj **Profi 7v1** je absolútne bezpečný a jeho použitie je úplne bezbolestné. V minulosti platilo, že výživu v hĺbke pokožky dokázala dokonale doplniť len injekcia. Za pomoci tohto prístroja môže teraz výživa prenikať do pokožky výrazne hlbšie a veľmi rovnomerne. Vďaka tomu dokážete zabezpečiť vašej pokožke intenzívnu starostlivosť aj v pohodlí vášho domova. Nezabudnite však, že **výber správnej kozmetiky je 50% úspechu a ďalších 50% úspechu je správne použitie vašej žehličky na pleť.**

Čo môžete očakávať?

Už po prvom ošetrení žehličkou bude vaša pokožka lepšie zásobená krvou a kyslíkom, bude vyzerat' žiarivejšie a sviežejšie. Z pokožky budú účinne odstraňované odpadové produkty, vďaka čomu sa poznateľne zredukujú kruhy pod očami. Hĺbková masáž „vycvičí“, vaše spojivové tkanivo, toto následne spevnie, minimalizujú sa jemné linky a hĺbka vrások sa výrazne zmenší. Vaša tvár bude vyzerat' jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne definovanými kontúrami.

Ako žehličku na pleť profi 7v1 používať?

PROGRAMY CLEANSE A DEEP PRE ČISTENIE PLETI

Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up.

Stlačte tlačidlo **⏻ (ZAP / VYP)** pre zapnutie prístroja. Opakovaným stlačením tlačidla **⏻** vyberte režim čistenia **CLEANSE**, dvoma stlačeniami tlačidla **⏻** vyberte režim hĺbkového čistenia **DEEP**. Na ultrazvukovú hlavicu umiestnite navlhčený čistiaci tampónik a upevnite ho gumovým krúžkom. Čistiacu emulziu naneste priamo na pokožku a ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavicom po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko kľže.

Ak je to potrebné, znova naneste na pokožku čistiacu emulziu.

V programe **CLEANSE** sa prístroj automaticky vypne po 5 minútach, v programe **DEEP** sa prístroj vypne po 10 minútach.

V čistiacich programoch **CLEANSE** a **DEEP** emituje kozmetický prístroj kladné ióny. Vďaka tomu sa z povrchového tkaniva pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je účinne čistená aj do hĺbky. V čistiacom programe **DEEP** generuje kozmetický prístroj navyše aj ultrazvukové vlny, ktoré zvýšia prekrvenie oblastí, rozkmitajú tkanivo a čistenie pleti je tak oveľa dôkladnejšie. V závislosti od toho, do akej miery má vaša pokožka tendenciu k začervneniu a do akej miery je náchylná k tvorbe chýb na pleti (škvrny, fláky, akné...), používajte zvolený čistiaci program podľa vašej individuálnej potreby - buď pravidelne, alebo len sporadicky.

PROGRAM NUTRITION A NUTRI-PLUS PRE VÝŽIVU PLETI

Dôkladne odstráňte make-up (ak ste ho ešte neodstránili).

Stlačte tlačidlo **⏻ (ZAP / VYP)** pre zapnutie prístroja. Jedným stlačením tlačidla **NUTRITION/PLUS+** spustíte program **NUTRITION**. Dvomi stlačeniami tohto tlačidla aktivujete program **NUTRI-PLUS**.

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste hyalurónový prípravok (gél alebo koncentrát z ampulky). Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavicom po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko kĺže.

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku hyalurónový gél alebo koncentrát z ampulky.

V programe **NUTRITION** emituje prístroj záporné ióny a vypne sa po 5 minútach. V programe **NUTRI-PLUS** emituje kozmetický prístroj záporné ióny aj ultrazvukové vlny a vypne sa po 10 minútach.

Tieto programy zabezpečujú, aby sa vďaka migrácii iónov dostali účinné látky z hyalurónového gélu alebo hyalurónových koncentrátov aj do hlbších vrstiev pokožky. Programy penetrácie výživných látok **NUTRITION** a **NUTRI-PLUS** používajte pravidelne 2x do týždňa.

FOTÓNOVÁ TERAPIA - FUNKCIA PHOTON

Stlačte tlačidlo **⏻ (ZAP / VYP)** pre zapnutie prístroja. Jedným stlačením tlačidla **WHITEN/ANTI-ACNE** spustíte program fotónovej terapie **WHITENING**. Dvomi stlačeniami tohto tlačidla aktivujete program fotónovej terapie **ANTI-ACNE**.

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste hyalurónový prípravok (gél alebo koncentrát z ampulky). Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavickou po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko kĺže.

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku hyalurónový gél alebo koncentrát z ampulky.

REŽIM WHITENING pre stabilizáciu kozmetických prípravkov

- **ČERVENÉ SVETLO 630 nm** - prvých 5 minút

Červené (tzv. kolagénové) svetlo je vďaka dlhším vlnovým dĺžkam veľmi užitočné pre proces obnovy pokožky. Červené svetlo a teplo prenikajú hlboko do pokožky a to až do tých vrstiev, v ktorých sa nachádza kolagén a elastín. Kolagén a elastín sú štruktúrne proteíny, ktoré dodávajú našej pokožke pevnosť a elasticitu. Kolagénové svetlo podporuje elimináciu stvrdnutia a usadenín týchto proteínov. Okrem toho posilňuje pevnosť a elasticitu pokožky

- **ŽLTÉ SVETLO 592 nm** - druhých 5 minút

Upokojuje, revitalizuje a omladzuje pokožku, je mimoriadne vhodné na citlivú pleť.

REŽIM ANTI-ACNE pre ošetrovanie akné a pigmentových škvŕn

- **MODRÉ SVETLO 463 nm** - prvých 5 minút

Farba vody a neba upokojuje podráždenú pokožku a má výrazný antiseptický účinok. Vďaka tomu je modré svetlo zvlášť vhodné na zlepšenie vzhľadu pokožky v prípade jej poškodenia a kuperózy. Okrem toho stimuluje v pokožke produkciu kyseliny, čistí ju a bojuje proti tvorbe baktérií. Zlepšuje tiež imunitný systém pokožky.

- **ZELENÉ SVETLO 525 nm** - druhých 5 minút

Pôsobí na pleť upokojujúco a veľmi relaxačne.

VIBRAČNÁ FUNKCIA - FACELIFTING

Mäkké vibrácie stimulujú obeh lymfatických tekutín, redukujú tmavé kruhy pod očami a spevňujú kontúry tváre.

Stlačte tlačidlo  (**ZAP / VYP**) pre zapnutie prístroja. Stlačením tlačidla **FACELIFTING** aktivujete vibračnú funkciu **FACELIFTING**.

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste masážny prípravok alebo vodivý gél. Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavickou po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko kĺže.

Tlačidlá a popis funkcií

TLAČIDLÁ:

- **POWER** – pre zapnutie a vypnutie prístroja
- **CLEANSE / DEEP** – pre čistenie a hĺbkové čistenie pleti
- **NUTRITION / PLUS+** – pre výživu a hĺbkovú výživu pleti
- **WHITEN / ANTI-ACNE** – pre elimináciu vrások a akné
- **FACELIFTING** – pre bunkový lifting

7 FUNKCIÍ:

1. **Ultrazvuková terapia** - ultrazvuk 3 MHz (**CLEANSE** - ČISTENIE PLETI)
2. **Ultrazvuková terapia** - ultrazvuk 3 MHz + kladné ióny (**DEEP** - HĽBKOVÉ ČISTENIE PLETI)
3. **Galvanoterapia** - záporné ióny (**NUTRITION** - PENETRÁCIA ÚČINNÝCH LÁTKO)
4. **Galvanoterapia** - záporné ióny + ultrazvuk 3 MHz (**NUTRITION PLUS** - ZVÝŠENÁ PENETRÁCIA ÚČINNÝCH LÁTKO)
5. **Fotónová terapia** - červené + žlté svetlo (**WHITEN** - BIELENIE A ZJEMNENIE VRÁSOK)
6. **Fotónová terapia** - modré + žlté svetlo (**ANTI-ACNE** - ELIMINÁCIA AKNÉ)
7. **Lifting pleti** + kladné a záporné ióny (**FACE LIFTING** - LIFTING PLETI)

Po ošetrení

V závislosti od typu pleti môžete cítiť po ošetrení pocit pnutia. Po ošetrení pokožky prístrojom sa odporúča naniesť na pleť kvalitný hydratačný krém (nočný alebo denný).

Ako často prístroj používať

Používajte prístroj 2 až 4x do týždňa.

Odporúčané prípravky

Odporúčame tieto čistiace prípravky:

- DEVEE CLEAR SKIN GÉL · WELLMAXX HYALURON FACE WASH

Odporúčame tieto hyaluronové preparáty:

- DEVEE HYALURON GÉL · WELLMAXX HYALURON GÉL
- DEVEE HYALURON EFFECT AMPULKY
- WELLMAXX HYALURON CALCIUM AMPULKY

Odporúčame tieto telové prípravky na chudnutie:

- WELLMAXX SHAPE SPREJ
- WELLMAXX SHAPE TELOVÝ DENNÝ KRÉM / TELOVÝ NOČNÝ KRÉM

Parametre a technické údaje:

Menovité napätie:	100 - 240 V AC (sieťový adaptér)
Menovité napätie:	5 V DC (zariadenie)
Menovitý prúd:	1 150 mAh
Fotóny (vlnová dĺžka):	625 nm, 465 nm, 525 nm, 592 nm
Ultrazvuk (frekvencia):	3 MHz
Menovitý výkon:	3 W
Rozmery:	50 × 185 × 50 mm (Š × V × H)
Hmotnosť:	195 g

Kontrola funkčnosti ultrazvuku

Ultrazvukové vibrácie môžete sami skontrolovať pomocou kvapky vody. Navlhčíte ultrazvukovú hlavicu niekoľkými kvapkami vody a prepnete prístroj do ultrazvukového režimu **CLEANSE**, **NUTRITION PLUS** alebo **DEEP**. Uvidíte, ako kvapka vody vibruje na ultrazvukovej hlavici.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Čistenie a skladovanie

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Video

Videonávody k našim produktom nájdete na:

www.hyaluron.sk/video

NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

BALENÍ OBSAHUJE: přístroj, stojan, USB kabel pro nabíjení, brýle.

Bezpečnostní upozornění

- Nenamáčejte přístroj do vody ani do jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí a nepoužívejte ho pod vodou.
- Před použitím odpojte přístroj od nabíjecího kabelu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nabíjecí kabel nebo přístroj samotný.
- Nepoužívejte přístroj po pádu na zem, pokud došlo k jeho poškození.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti vody, umyvadla, vany, sprchového koutu, toalety, nebo ve vlhkém prostředí.
- Používejte přístroj pouze na zdravé pokožce.
- Nepřikládejte přístroj na okolí štítné žlázy.
- Přístroj používejte maximálně 1x denně.
- Pokud pociťujete jakékoli nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Nabíjecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí. Nevystavujte jejich působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez obsluhy.
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen. Přístroj používejte a nabíjejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Přístroj nerozebírejte. Rozebrání přístroje a jeho nesprávné použití znamená ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celé tváři.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Výše uvedené osoby mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použití.
- Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně očistěte suchým hadříkem.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí. Nenechte děti hrát si s přístrojem.
- Přístroj v režimu výživy používejte pouze s vodivými nebo hyaluron gely.
- Po zakoupení přístroje zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy.
- Za žádných okolností nerozebírejte zařízení. Za škody způsobené nesprávným použitím dovozce ani prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost.
- Na citlivou pokožku používejte pouze jednou týdně.

POZNÁMKA: Přístroj funguje pouze tehdy, když se rukama dotýkáte kovové desky.

Kontraindikace

- Těhotenství, kojení, menstruace
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
- Horečnaté stavy a záněty, akutní infekce nebo zánět (např. Akné, zarděnky, psoriáza)
- Bakteriální infekce kůže, akutní herpetické infekce
- Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
- Oblasti těla se závažnými poruchami krevního oběhu
- Nedostatečný krevní oběh
- Ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie
- Poruchy krve, cévního systému, nebo jiné interní onemocnění
- Cévní nemoci končetin (trombóza, flebitida)
- Poruchy koagulace (srážení krve)
- Poškozená a popraskaná pokožka, alergie na elektromagnetické vlnění nebo kovy, tetování
- Pokožka spálená ze slunce před méně než měsícem
- Akutní revmatické onemocnění
- Oslabený imunitní systém, auto imunitní onemocnění
- Alergie na kovy
- Alergie na změny teploty, alergie na teplo

POZNÁMKA: Pokud máte pochybnosti, zda můžete přístroj používat, kontaktujte svého prodejce, vaši kosmetičku nebo odborného lékaře.

Oblasti těla, které byste neměli ošetřovat

- Mícha a páteř
- Oční bulvy, oční víčka, rty
- Zóny intenzivního růstu u dětí a dospívajících
- Oblast pohlavních žláz
- Oblast štítné žlázy
- Oblasti obličeje operované před méně než měsícem
- Okolí očí, úst a oblastí kde byl proveden kosmetický (např. zkrášlující) zákrok

Před prvním použitím

Nabijte přístroj před prvním použitím. Přístroj musí být vypnutý během nabíjení. Připojte USB kabel k přístroji a USB výstup zapojte do adaptéru. Nabíjení trvá 2-3 hodiny. Na přístroji svítí kontrolka nabíjení. Následně odpojte kabel a můžete začít přístroj používat.

Funkce kosmetického přístroje

Kosmetický přístroj má 2 programy pro čištění pleti, 2 programy pro výživu pleti, 2 fotonové programy (proti vráskám a proti akné) a 1 program pro facelifting.

- galvanický proud - kladné ionty (čištění)
- galvanický proud - záporné ionty (výživa)
- ultrazvuková technologie
- mikromasáž a fotony (modré světlo, červené světlo, zelené světlo, žluté světlo)


Postup

1. Před prvním použitím nabíjejte přístroj 2-3 hodiny.
2. Přístroj odpojte od nabíjecího kabelu a můžete jej začít používat.
3. Před použitím přístroje důkladně odstraňte make-up.
4. Stiskněte tlačítko CLEANSE / DEEP na 2 sekundy pro zapnutí přístroje. Více o tomto programu najdete v tabulce.
5. **Pro čištění pleti** si navolte program CLEANSE nebo program DEEP. Více o tomto programu najdete v tabulce.
6. **Pro výživu pleti** si navolte program NUTRITION nebo program PLUS +. Více o tomto programu najdete v tabulce.
7. **Pro fotonovou funkci proti vráskám** si navolte program WHITEN. Více o tomto programu najdete v tabulce.
8. **Pro fotonovou funkci proti akné** si navolte program ANTI-ACNE. Více o tomto programu najdete v tabulce.
9. **Pro facelifting pleti** si navolte program facelifting. Více o tomto programu najdete v tabulce.
10. Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko CLEANSE / DEEP na 2 sekundy.
11. **Postup:** Jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení tlaku přejíždějte ultrazvukovou hlavici po pokožce na tváři. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní ultrazvuková hlavice snadno klouže.
12. Na závěr použijte hydratační krém.

UPOZORNĚNÍ: Neošetřujte pokožku v okolí očí a přímo na oční bulvu!

Masáž obličeje pomocí žehličky

Postupujte podle instrukcí na obrázku.

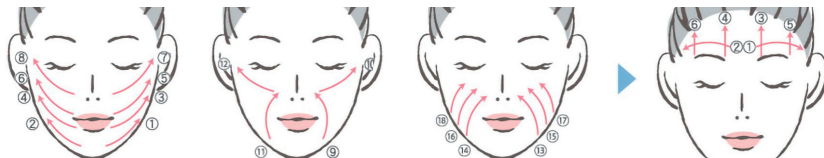

Tabulka programů

	1	2	3	4	5	6	7
Programy	Cleanse	Deep	Nutrition	Plus+	Whiten	Anti-Acne	Facelifting
Účel	Čištění pleti	Čištění pleti	Výživa pleti	Výživa pleti	Proti vráskám	Proti akné	Buněčný lifting
Funkce	Kladné ionty	Kladné ionty Ultrazvuk	Záporné ionty	Záporné ionty Ultrazvuk	Červené světlo / Žluté světlo Po 5min.	Modré světlo / Zelené světlo Po 5 min.	Střídání iontů Vibrace
Přípravek	Čistící gel nanést na obličej / Čistící tonikum na kosmetický tampónek. Uchytit úchytkou.	Čistící gel / Čistící tonikum na kosmetický tampónek. Uchytit úchytkou.	Hyaluron koncentrát (gel, sérum, nebo ampule) nanést na obličej.	Hyaluron koncentrát (gel, sérum, nebo ampule) nanést na obličej.			Ultrazvukový gel nanést na obličej. Po ošetření ho odstraňte kosmetickým tampónkem.
Délka aplikace	5 min.	10 min.	5 min.	10 min.	5+5 min.	5+5 min.	15 min.
Volba tohoto programu	1 stisknutí tlačítka (Cleanse / Deep)	2 stisknutí tlačítka (Cleanse / Deep)	1 stisknutí tlačítka (Nutrition / Plus+)	2 stisknutí tlačítka (Nutrition / Plus+)	1 stisknutí tlačítka (Whiten / Antiacne)	2 stisknutí tlačítka (Whiten / Antiacne)	1 stisknutí tlačítka
Jak často se může používat	2-3 × týdně	2-3 × týdně	2-3 × týdně	2-3 × týdně	denně	denně	2-3 × týdně
Postup	Jemné krouživé pohyby	Jemné krouživé pohyby	Jemné krouživé pohyby	Jemné krouživé pohyby	Svítit na pokožku	Svítit na pokožku	Jemné krouživé pohyby
Oblast ošetření	Obličej	Obličej	Obličej	Obličej	Obličej. Použijte brýle.	Obličej. Použijte brýle.	Obličej.

Parametry a technické údaje:

Jmenovité napětí:	100-240 V AC, 50/60 Hz (síťový adaptér)
Jmenovité napětí:	5 V DC (zařízení)
Jmenovitý proud:	1 150 mAh
Fotony (vlnová délka):	625 nm, 525 nm, 465 nm, 592 nm
Ultrazvuk (frekvence):	3 MHz
Jmenovitý výkon:	3 W
Rozměry:	50 × 185 × 50 mm
Hmotnost:	195 g

Skladování

O použití přístroj otřete suchým hadříkem. Skladujte na místě s konstantní vlhkostí a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. Skladujte mimo dosah dětí.

Informace o životním prostředí

Přístroj je elektrické zařízení. Na konci své životnosti ho prosím nelikvidujte spolu s běžným odpadem, předejte na sběrné místo pro recyklaci elektronických a elektrických zařízení. Pomozte chránit životní prostředí recyklací použitých výrobků.

Importér:

Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: +421 907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*