

*Beauty[®]
Biowave*



GALVANICKÝ PRÍSTROJ S FOTÓNMI
NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU V OKOLÍ OČÍ A PIER

BeautyBiowave Lip and Eye

NÁVOD NA POUŽITIE

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento kozmetický prístroj je určený pre starostlivosť o pokožku v okolí očí a v okolí pier.

BALENIE OBSAHUJE:

Kozmetický prístroj, USB kábel na nabíjanie.

Bezpečnostné upozornenia

- Tento prístroj je určený na starostlivosť o okolie očí, pier a tváre.
- Pokiaľ pociťujete akékoľvek nepohodlie, prestaňte prístroj používať.
- Nepoužívajte v blízkosti vody.
- Pred čistením prístroja odpojte USB kábel.
- Napájací ani nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nenechávajte zapnutý prístroj bez obsluhy.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospeléj osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyaluronovými gélmami a koncentrátmi.
- Pokiaľ sa prístroj príliš zahrieva, prestaňte ho používať a nechajte ho vychladnúť.
- Pokiaľ používate kontaktné šošovky, pred použitím prístroja si ich vyberte.

Kontraindikácie

- kardiostimulátor
- tehotenstvo
- onkologické ochorenia/nádory
- horúčkovité stavy a zápal
- bakteriálne infekcie kože
- pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- nedostatočný krvný obeh
- oblasti tela so závažnými poruchami krvného obehu
- srdcová arytmia
- cievne choroby končatín (trombóza, flebitída)
- poruchy koagulácie (zrážania krvi)
- poškodenia kože (rany, začervenanie, zápal, výsev, podráždenie)

Oblasti tela, ktoré by ste nemali ošetrovať ultrazvukom a galvanickým prúdom

- Miecha a chrbtica
- Očné bulvy
- Oblasť pohlavných žliaz
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospelujúcich
- Oblasť štítnej žľazy


Test na znášanlivosť

Pred prvým použitím odporúčame otestovať citlivosť na použitie prístroja spolu s gélom obsahujúcim kyselinu hyalurónovú alebo s hyalurónovým koncentrátom - napríklad na zápästí.


Pred prvým použitím

Pred použitím musí byť prístroj úplne nabitý. Počas nabíjania musí byť prístroj vypnutý. Pripojte USB kábel k prístroju a USB konektor zapojte do vhodného adaptéra, alebo počítača. Nabíjanie trvá približne 1,5 - 2 hodiny. Keď je prístroj plne nabitý, indikátor zmení farbu z červenej na zelenú. Následne kábel odpojte a prístroj môžete začať používať.

Popis prístroja

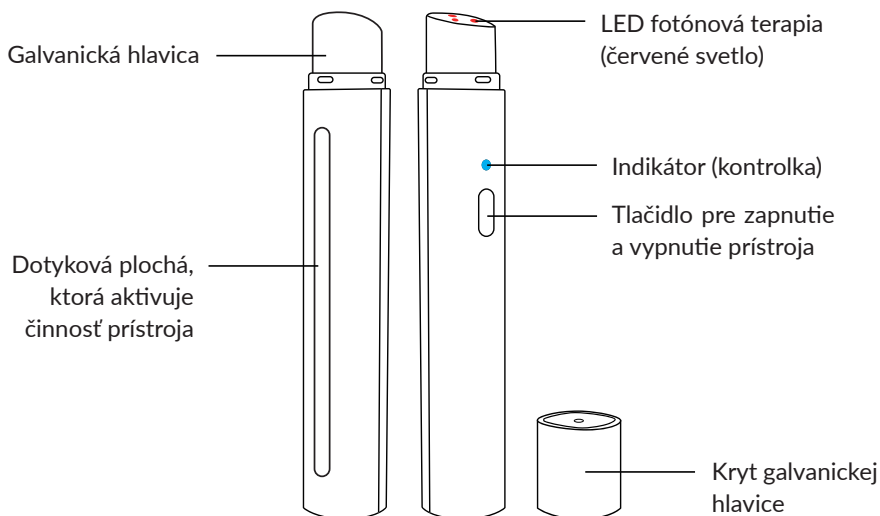


Zapnutie a vypnutie prístroja

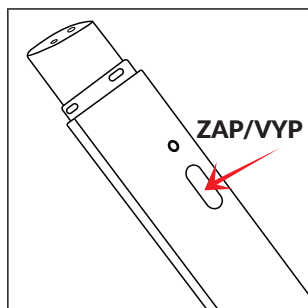


1. Stlačte tlačidlo **ZAP/VYP** na 1 sekundu pre zapnutie prístroja.
2. Všetky funkcie prístroja sa aktivujú a indikátor svieti.
3. Prístroj sa automaticky vypne po 5 minútach.

Indikátor - farby a stavy

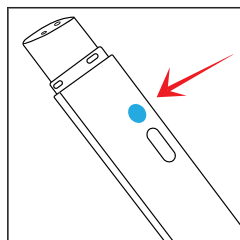


Indikátor svieti na modro

Pohotovostný režim.

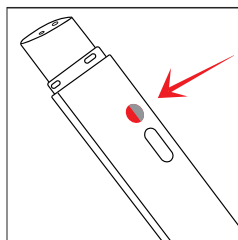


Indikátor bliká na červeno.

Prístroj je potrebné nabiť.

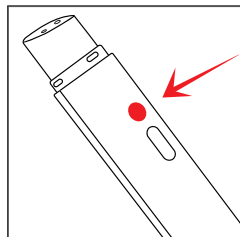

Indikátor svieti na červeno

Prístroj sa nabíja.

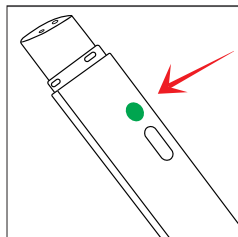


Indikátor svieti na zeleno

Prístroj je plne nabitý.

Prístroj sa automaticky **vypne po 5 minútach** činnosti.


Ak sa rozbliká červená kontrolka, znamená to, že prístroj je potrebné nabiť. Kontrolka bude blikať 10-krát a prístroj sa následne vypne.

Ako používať prístroj v okolí očí:

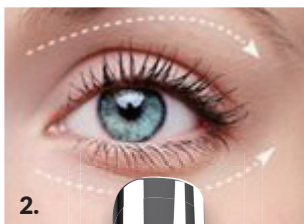

1. Naneste na pleť v okolí očí vodivý prípravok (hyalurónový gél, sérum s kyselinou hyalurónovou alebo koncentrát z ampulky).
2. Zapnite prístroj. Držte prístroj tak, aby ste sa dotýkali kovovej plochy a krúživými pohybmi prechádzajte po pokožke v smere šípok na obrázku. Plocha hlavice sa musí dotýkať pokožky celou svojou plochou.

3. Použite tlakovú bodovú masáž. Priložte hlavicu na body podľa obrázku, jemne zatlačte na 10 sekúnd a ku každému bodu sa vráťte 2- až 3-krát. Plocha hlavice sa musí dotýkať pokožky celou svojou plochou.
4. Masírujte pokožku krúživými pohybmi podľa obrázka, 3- až 5-krát.

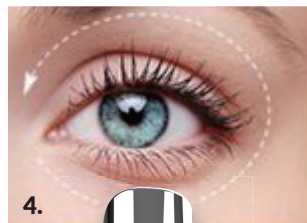

UPOZORNENIE: Hlavica sa má po pokožke klzáť. Odporúčame sa mierne navlhčiť pleť, naniesť hyalurónový koncentrát a použiť kozmetický prístroj.

Ako používať prístroj na tvár a v okolí pier:



1. Naneste na pleť vodivý prípravok (hyalurónový gél, sérum s kyselinou hyalurónovou alebo koncentrát z ampulky).
2. Zapnite prístroj. Držte prístroj tak, aby ste sa dotýkali kovovej plochy a krúživými pohybmi prechádzajte po pokožke v smere šípok na obrázku. Plocha hlavice sa musí dotýkať pokožky celou svojou plochou.
3. Prechádzajte po okolí perí krúživými pohybmi.
4. Masírujte pokožku krúživými pohybmi podľa obrázka, 3- až 5-krát.

Po ošetrení pokožky kozmetickým prístrojom nechajte pleť na pár minút odpočívať.

Na záver ošetrovania naneste na pokožku váš obľúbený očný krém a pleťový krém.

Funkcie

Galvanická funkcia: Galvanický prúd sa používa na stimuláciu kožných buniek, zjemnenie pokožky a „vpichovanie“ resp. penetrovanie účinných látok (kyseliny hyaluronovej) do hlbších vrstiev pokožky. Toto umožní kyseline hyaluronovej rozvinúť svoj objem naprieč tkanivami, vďaka čomu sa minimalizujú jemné linky a hĺbka vrások sa výrazne zmenší.

Mikrovibračná funkcia: Mikrovibrácie zlepšujú lokálne prekrvenie, zlepši sa okysličenie pleti a aktivujú sa tiež detoxikačné mechanizmy. Mikromasáž dokáže zároveň stimulovať tvorbu kolagénu. Výsledkom je zníženie opuchov, jasnejší a sviežejší vzhľad pokožky.

Fotónová funkcia (červené svetlo): Špeciálne kozmetické LED svetlo stabilizuje kozmetické prípravky v pokožke (predovšetkým kyselinu hyaluronovú). Spôsobuje efekt tzv. fotopolymerizácie - dotýkajúce molekuly sa navzájom poprepájajú, vďaka čomu sú v pokožke oveľa stabilnejšie. Červené a infračervené fotóny sú na tento účel najvhodnejšie. Kozmetické LED svetlo zároveň stimuluje fibroblastické bunky pokožky k výrazne zvýšenej produkcii kolagénu.

Hrejivá funkcia: Tepelná masáž je veľmi efektívna metóda, ktorá zvyšuje prietok krvi, čím poskytuje fibroblastickým bunkám výdatnú pomoc pri omladzovaní pokožky a zvyšovaní produkcie kolagénu. Takáto masáž pomáha tiež redukovať opuchy (odtoky) v okolí očí.

Lifting a anti-aging na najvyššej úrovni

Sme potešení, že ste sa rozhodli pre tento kozmetický prístroj. Pomocou tohto kozmetického prístroja dosiahnete v starostlivosti o vašu pleť tie najlepšie výsledky, a to najmä v kombinácii s hyaluronovými prípravkami z našej ponuky (gély, koncentráty). Tento prístroj dokáže vašu pokožku regenerovať dôkladne a do hĺbky, takže už po niekoľkých ošetreniach vyzerá vaša pokožka oveľa zdravšie, jasnejšie a sviežejšie. Tento prístroj je určený na redukovanie vrások v okolí očí a úst. Pomáha regenerovať tkanivá, podporuje krvný obeh a obeh lymfatických tekutín a pomáha tiež zlepšovať odstraňovanie odpadových produktov.

Odporúčanie

Odporúčame použitie kvalitných hyaluronových gélov, alebo koncentrátov z ampuliek s vysokým obsahom kyseliny hyaluronovej, ktoré sú vhodné pre použitie s galvanoterapiou. Skvelé výsledky určite dosiahnete s našimi produktmi Devee Hyaluron gél a Wellmaxx Hyaluron gél. Pre použitie s galvanoterapiou nie sú vhodné rastlinné, nehyaluronové ani olejové prípravky.

Parametre a technické údaje:

Batéria:	500 mAh
Čas nabíjania:	približne 2 hodiny
Menovité napätie:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz (sieťový adaptér)
Menovité napätie:	5 V DC (zariadenie)
Vlnová dĺžka:	625 nm $\pm$ 3 nm
Frekvencia vibrácií:	7 000 r/min.
Termálna funkcia:	42 °C $\pm$ 3 °C
Hmotnosť:	41 g
Rozmery:	21 mm $\times$ 134 mm $\times$ 21 mm (Š $\times$ V $\times$ H)
Prevádzková teplota:	5 °C až 40 °C

Kozmetický prístroj je určený pre použitie v okolí očí a v okolí pier.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Skladovanie

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Prístroj môže použiť iba dospelý používateľ, ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Importér:

Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: 0907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*