

Beauty[®]
Biowave




PROFESIONÁLNA ŽEHLIČKA NA TELO A NA PLEŤ (SK)
KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ (CZ)

SLIMMING BEAUTY

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS ČASTÍ PRÍSTROJA

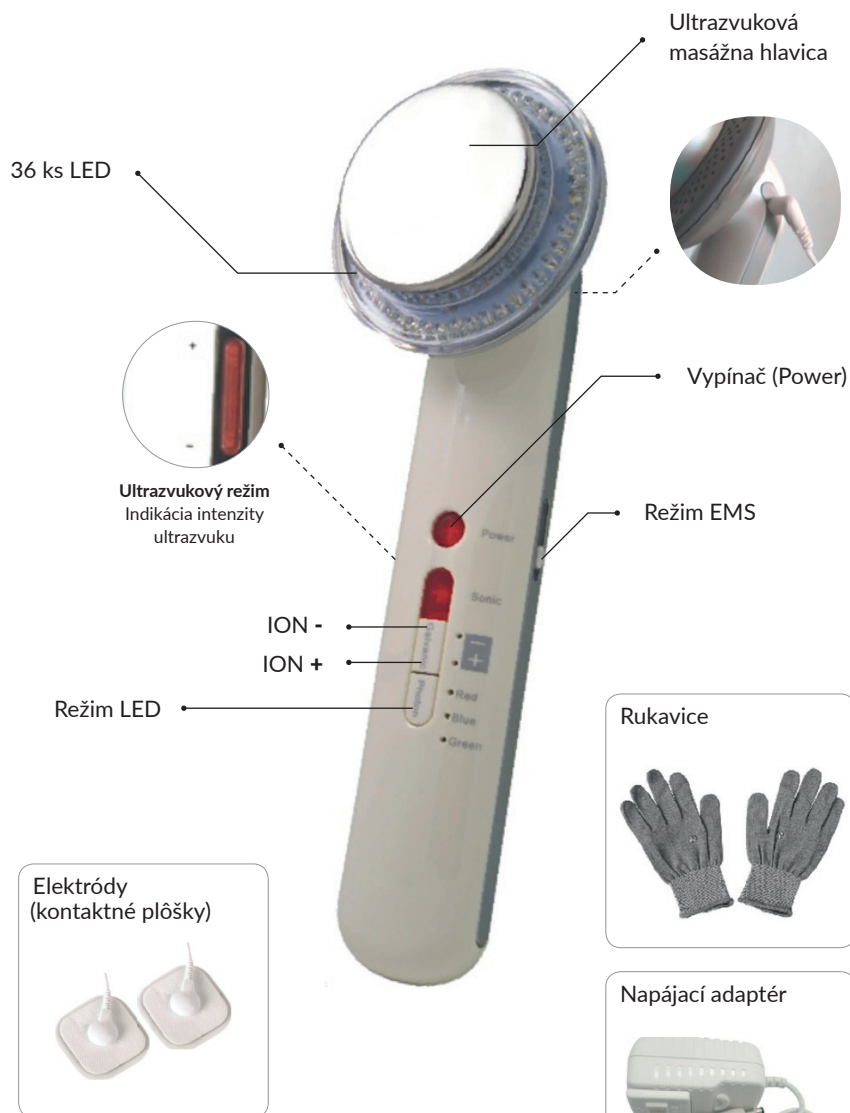

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

- Vynikajúca aplikácia výživy pre pokožku
- Spevňuje a napína pokožku
- Účinná eliminácia (redukcia) vrások
- Odstraňuje akné a čistí plet'
- Použitie pre oči, tvár, krk a telo

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Sme potešení, že ste sa rozhodli pre kozmetický prístroj Slimming Beauty, ktorý je žehličkou na plet' a zároveň kavitačným prístrojom na chudnutie.

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Bezpečnostné upozornenia

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou a nepoužívajte ho pod vodou.
- Používajte výhradne originálny adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
- Po každom použití odpojte kozmetický prístroj od napájacieho kábla a adaptéra
- Nepoužívajte kozmetický prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo prístroj samotný.
- Nepoužívajte prístroj po páde na zem pokiaľ došlo k jeho poškodeniu.
- Nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ho pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nikdy sa nepokúšajte kozmetický prístroj rozoberať, alebo opravovať.
- Nenabíjajte prístroj v blízkosti vody, umývadla, vane, sprchového kúta, toalety, alebo vo vlhkom prostredí.
- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou alebo vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí. Nenechajte deti hrať sa s prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou, alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby (okrem detí) môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospeléj osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurón gélmi, alebo koncentrátmi.
- Ultrazvuk sa nesmie používať na oblasť očí, v bezprostrednej blízkosti očí (oblasť očnej bulvy) a v oblasti štítnej žľazy.
- Používajte prístroj len na zdravej pokožke.
- Prístroj používajte max. 1x denne. Na citlivú pokožku 1 týždenne, prípadne podľa potreby.
- Pokiaľ pociťujete nepohodlie, prestaňte prístroj používať.
- Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.

Kontraindikácie

- Tehotenstvo, kojenie, menštruácia
- Kardioštimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
- Horúčka, zápaly, akútne infekcie (napr. akné, psoriáza, ružienka)
- Bakteriálna infekcia kože, akútne herpetické a zápalové ochorenia kože
- Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- Oblasť tela so závažnými poruchami krvného obehu
- Ischemická choroba srdca, srdcová arytmia
- Akútne reumatické ochorenia
- Neurologické ochorenia (napr. migrény)
- Užívanie kortizolu alebo liekov zvyšujúcich citlivosť na svetlo
- Auto-imunitné ochorenia
- Poruchy krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia
- Poruchy zrážanlivosti krvi
- Poškodená, alebo spálená pokožka
- Alergie na kovy, na zmeny teploty, na elektromagnetické vlnenie

Oblasť tela, ktoré by ste nemali ošetrovať kozmetickým prístrojom

- Miecha, chrbtica, mozog
- Očné bulvy, očné viečka, pery
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospievajúcich
- Oblasť pohlavných žliaz
- Oblasť štítnej žľazy

Lifting anti-aging na najvyššej úrovni

Sme potešení, že ste sa rozhodli pre kozmetický prístroj Slimming Beauty. Pomocou tohto kozmetického prístroja dosiahnete v starostlivosti o vašu pleť tie najlepšie výsledky, a to najmä v kombinácii s hyalurónovými prípravkami z našej ponuky (gély, koncentráty). Prístroj Slimming Beauty dokáže vašu pokožku dôkladne regenerovať do hĺbky, takže už po niekoľkých ošetrovaniach vyzerá vaša pokožka oveľa jasnejšie a sviežejšie. Ošetrovanie vašej pokožky je úplne jednoduché a šetrné, prístroj redukuje jemné vrásky a linky, omladzuje vaše spojivové tkanivo, podporuje krvný obeh a obeh lymfatických tekutín a má tiež pozitívny vplyv na poškodenú a podráždenú pokožku.

Čo je ultrazvuk?

Ultrazvuk sú zvukové vlny, nachádzajúce sa nad prahom počuteľnosti ľudského sluchu. Ultrazvuk účinkuje na pokožku tak tepelne, ako aj mechanicky a biochemicky.

Mechanický účinok ultrazvuku je dosahovaný intenzívnou masážou elastických vlákien pokožky. Takáto masáž stimuluje tvorbu nového kolagénu, vďaka čomu je pokožka pevnejšia a napnutejšia. Uvoľnia sa komedóny (čierne bodky), vďaka čomu sa po ultrazvukovom ošetroaní dajú veľmi ľahko a bezbolestne odstrániť. V hĺbke pokožky vzniká teplo, ktoré aktivuje metabolizmus a podporuje detoxikáciu. Toto stimuluje regeneráciu pokožky a pôsobí proti procesu starnutia. Po aplikovaní aktívnych látok, ktoré vďaka použitiu prístroja prenikajú intenzívne do pokožky, dosiahneme krajšiu a žiarivejšiu pleť a to aj v prípade chýb na pokožke, ako sú napríklad ružienka, akné, jazvy, atď. Na ošetrovanie ultrazvukom sú obzvlášť vhodné hyaluronové gély a koncentráty. Hyaluronové gély nemeckej značky Wellmaxx® a Devee® obsahujú kyselinu hyaluronovú s vysokou alebo nízkou molekulárnou hmotnosťou vo veľmi vysokej koncentrácii a sú veľmi vhodné na použitie s týmto prístrojom.

Ošetrovaním vašej pleti pomocou tohto prístroja a vhodných prípravkov dosiahnete výrazné zlepšenie rovnováhy vlhkosti pokožky a vďaka tomu trvalo sviežu a omladenú pleť. Aplikovaním samotných hyaluronových gélov alebo koncentrátov bez použitia ultrazvukového alebo galvanického prúdu taký pozoruhodný efekt nedosiahnete.

Ultrazvukové ošetrovanie je obvykle mimoriadne príjemné, väčšinou cítite iba miernu tvorbu tepla. Už po 3 až 4 ošetrovaniach zaregistrujete viditeľné zlepšenie stavu vašej pokožky. Ultrazvuk tiež pomáha uvoľňovať napätie v krku a zmierňovať bolesti hlavy.

Čo je galvanický prúd?

Galvanický prúd je jednosmerný prúd bez frekvencie a striedania pólov, ktorý tečie vždy len v jednom smere. Kladne nabité častice sa pohybujú smerom k pólu MÍNUS, záporne nabité častice migrujú k pólu PLUS. Pri správnom postupe vyvolávajú v tele pozitívne reakcie, na ktorých sú založené rôzne metódy ošetrovania a liečby.

Už Luigi Galvani, objaviteľ galvanického prúdu, publikoval svoje vedomosti o využití galvanického prúdu v naturopatii (celostnej medicíne). Do kozmetiky sa galvanický prúd dostal postupom času cestou prírodnej medicíny.

V kozmetike sa galvanický prúd využíva najmä na vysoko účinné čistenie pórov, intenzívnejšie a efektívnejšie zavádzanie účinných látok do pokožky, posilňovanie spojivového tkaniva, zlepšenie krvného obehu a prietoku lymfatických tekutín.

Čo je fotónová terapia?

Pre svoju jedinečnú schopnosť prirodzene aktivovať samoliečebnú funkciu ľudského organizmu je už dnes fototerapia (terapia svetlom) všeobecne uznávanou fyzikálno-biologickou preventívnou metódou.

Červené svetlo preniká najhlbšie do vrstiev pokožky, napomáha zvyšovať produkciu kolagénu v pokožke, aktivuje samoopravné mechanizmy, stimuluje bunky fibroblastov a rast buniek.

Modré svetlo má výrazné dezinfekčné účinky, skvele zaberá pri problémoch s akné a je tiež veľmi vhodné na ožarovanie otvorených rán. Modré svetlo je schopné likvidovať veľa druhov baktérií a pri problematickej mastnej pleti znižuje množstvo mazu v pokožke.

Zelené svetlo preniká do vrchných vrstiev pokožky, zasahuje však hlbšie ako modré svetlo. Pomáha znižovať pigmentáciu, vďaka čomu slúži ako prevencia tvorby flakov, stareckých škvŕn a zároveň udržiava pokožku hladkú a sviežu.

Čo je EMS?

EMS je terapia mikroprúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže imitovať pocit reálnej masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi efektívna na vyčistenie kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie krvného obehu v oblasti aplikácie.

Táto mikroprúdová terapia stimuluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu s nízkymi frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to aj pasívny pohyb.

EMS sa používa ako skvelý pomocník pri chudnutí, pri redukovaní tuku napríklad v oblasti stehien, pásu a ramien.

EMS sa tiež úspešne používa na vytvorenie svalového tonusu po úraze aj na cielený rozvoj svalstva, napríklad u atlétov.

Doprajte svojej pokožke dokonalú starostlivosť

Kombináciou inovatívnych technológií obsiahnutých v kozmetickom prístroji **SLIMMING BEAUTY** a vysoko kvalitných produktov **WELLMAXX** a **DEVEE** dosiahnete aj v pohodlí vášho domova vynikajúce účinky v starostlivosti o pleť. Kozmetický prístroj **SLIMMING BEAUTY** zabezpečí dokonalý prenos aktívnych zložiek do pokožky, hyalurónový gél a hyalurónové koncentráty poskytujú zložky tej najvyššej kvality. Tento perfektne zladený tím dodá vašej pokožke na dlhú dobu sviežejší a žiarivejší vzhľad. Už po niekoľkých aplikáciách zbadáte viditeľné výsledky. Zvoľte si individuálny režim ošetrovania, ktorý je optimálny pre vašu pokožku. Pred každým ošetrením si bežným postupom dôkladne očistite vašu tvár.

A len tak mimochodom – nielen pleť na vašej tvári sa poteší tejto zvýšenej starostlivosti. Rovnako váš dekolt a vaše ruky budú vyzerat' sviežejšie a akoby bezstarostnejšie. Dokonca aj pri celulitíde dokáže ultrazvukové ošetrovanie postihnutých častí tela priniesť veľmi pozitívne výsledky.

Čo môžete očakávať?

Už po prvom ošetrovaní žehličkou bude vaša pokožka lepšie zásobená krvou a kyslíkom, bude vyzerat' žiarivejšie a sviežejšie. Z pokožky budú účinne odstraňované odpadové produkty, vďaka čomu sa poznateľne zredukujú kruhy pod očami. Hĺbková masáž „vycvičí“, vaše spojivové tkanivo, toto následne spevnie, minimalizujú sa jemné linky a hĺbka vrások sa výrazne zmenší. Vaša tvár bude vyzerat' jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne definovanými kontúrami.

Starostlivosť o pleť

Slnčné žiarenie, dedičné dispozície, prirodzené starnutie pokožky – tieto a ďalšie vplyvy spôsobujú úbytok kolagénu vo vašej pokožke. Dochádza k vzniku vrások a fenoménu ochabnutej kože. Kozmetické prípravky účinkujú len na povrchu kože, ale na kolagén nachádzajúci sa v hlbších vrstvách pokožky nemajú prakticky žiaden účinok. Aj toto je dôvod, prečo ani pri použití drahej kozmetiky často nedochádza k viditeľnému efektu zlepšenia zvráskavenej pleti.

Vďaka kozmetickému prístroju **SLIMMING BEAUTY** dosiahnete unikátny hĺbkový stimulujúci efekt, ktorý dokáže aktivovať regeneráciu kolagénu, spevniť kožu, pozoruhodne vplyva na zlepšenie vzhľadu pokožky a farby pleti. Súčasná aplikácia hyalurónového séra, koncentrátu, gélu a následne aj pleťového krému spolu s týmto prístrojom je veľmi efektívna cesta k výraznému zlepšeniu stavu a vzhľadu vašej pokožky.

Kozmetický prístroj **SLIMMING BEAUTY** je absolútne bezpečný a jeho použitie je úplne bezbolestné. V minulosti platilo, že výživu v hĺbke pokožky dokázala dokonale doplniť len injekcia. Za pomoci tohto prístroja môže teraz výživa prenikať do pokožky výrazne hlbšie a veľmi rovnomerne. Vďaka tomu dokážete zabezpečiť vašej pokožke intenzívnu starostlivosť aj v pohodlí vášho domova. Nezabudnite však, že **výber správnej kozmetiky je len 50% úspechu. Ďalších 50% úspechu je správne použitie vašej žehličky na pleť.**

Čistenie pleti

Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up.

Stlačte tlačidlo **POWER** pre zapnutie prístroja. Aktivujte funkciu **SONIC**, spolu s ňou navoľte aj funkciu **GALVANIC plus** a zároveň môžete použiť aj fotónovú terapiu – červené, modré alebo zelené svetlo. Pre čistenie pleti odporúčame použiť kombináciu funkcií **SONIC + GALVANIC PLUS** (kladné ióny) + **PHOTON BLUE** (modré svetlo).

UPOZORNENIE: Prepínač **EMS** musí byť v polohe **OFF**.

Na ultrazvukovú hlavicu a tiež priamo na pokožku naneste čistiacu emulziu. Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavicom po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko klíže.

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku čistiacu emulziu.

Čistenie pleti by malo trvať približne 5 minút.

Počas procesu čistenia generuje kozmetický prístroj kladné ióny. Vďaka tomu sa z povrchového tkaniva pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je účinne čistená aj do hĺbky. Počas procesu čistenia generuje kozmetický prístroj aj ultrazvukové vlny, ktoré zvýšia prekrvenie oblasti, rozkmitajú tkanivo a čistenie pleti je tak oveľa dôkladnejšie.

Ak má vaša pokožka tendenciu k začervenaniu, prípadne je náchylná k tvorbe nerovností na pleti (škrvrny, fláky, akné), používanie čistiaceho programu si upravte podľa vašich individuálnych preferencií - pravidelne, alebo občas.

Penetrácia aktívnych látok

Dôkladne odstráňte make-up (ak ste ho ešte neodstránili).

Stlačte tlačidlo **POWER** pre zapnutie prístroja. Aktivujte funkciu **SONIC**, spolu s ňou aj funkciu **GALVANIC mínus** a súčasne môžete použiť aj fotónovú terapiu – červené, modré alebo zelené svetlo. Pre dokonalú penetráciu (vstrebanie) aktívnych látok odporúčame navoľiť kombináciu **SONIC + GALVANIC mínus** (záporné ióny) + **PHOTON RED** (červené svetlo).

UPOZORNENIE: Prepínač **EMS** musí byť v polohe **OFF**.

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste hyalurónový prípravok (gél alebo ampulky). Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavicom po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko klíže.

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku hyalurón gél alebo koncentrát z ampulky.

Počas tohto procesu generuje kozmetický prístroj záporné ióny, aby sa účinné látky dostali aj do hlbších vrstiev pokožky. Súčasne prístroj generuje aj ultrazvukové vlny, ktoré stimulujú tvorbu kolagénu a spevňujú ochabnutú pokožku.

V dôsledku migrácie iónov sa účinné látky z hyalurónového gélu alebo hyalurónových koncentrátov veľmi efektívne dostávajú do hlbších vrstiev pokožky. Funkciu penetrácie (vyživovania) používajte pravidelne 2x do týždňa.

Fotónová terapia – funkcia photon

Dôkladne si očistite tvár.

Stlačte tlačidlo **POWER** pre zapnutie prístroja. Zapnite **PHOTON RED** (červené svetlo), **BLUE** (modré svetlo) alebo **GREEN** (zelené svetlo). Túto funkciu môžete používať počas čistenia pleti, počas penetrácie účinných látok do pokožky, ale aj samostatne. **UPOZORNENIE:** Prepínač **EMS** musí byť v polohe **OFF**.

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste hyalurónový prípravok (gél alebo ampulky). Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavicom po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko kľže.

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku hyalurón gél alebo koncentrát z ampulky.

ČERVENÉ SVETLO (eliminácia vrások)

Červené (tzv. kolagénové) svetlo je vďaka dlhším vlnám veľmi užitočné pre proces obnovy pokožky. Červené svetlo a teplo prenikajú hlboko do pokožky až do tých vrstiev, v ktorých sa nachádza kolagén a elastín. Kolagén a elastín sú štruktúrne proteíny, ktoré dodávajú našej pokožke pevnosť a elasticitu. Kolagénové svetlo podporuje elimináciu stvrdnutia a usadenín týchto proteínov. Okrem toho posilňuje pevnosť a elasticitu pokožky.

ZELENÉ SVETLO

Aktivuje mikrocirkuláciu v bunkách a udržuje pokožku hladkú a sviežu.

MODRÉ SVETLO (na akné a pigmentové škvrny)

Farba vody a neba upokojuje podráždenú pokožku a má výrazný antiseptický účinok. Vďaka tomu je modré svetlo zvlášť vhodné na zlepšenie vzhľadu pokožky v prípade jej poškodenia a kuperózy. Okrem toho stimuluje v pokožke produkciu kyslíka, čistí ju a bojuje proti tvorbe baktérií. Zlepšuje tiež imunitný systém pokožky.

Ošetrovanie pokožky na tvári



7 FUNKCIÍ:

1. **Ultrazvuková terapia**, ultrazvuk 1 MHz (SONIC)
2. **Galvanoterapia** - záporný galvanický prúd (GALVANIC MINUS)
3. **Galvanoterapia** - kladný galvanický prúd (GALVANIC PLUS)
4. **Fotónová terapia** červeným svetlom (PHOTON RED)
5. **Fotónová terapia** modrým svetlom (PHOTON BLUE)
6. **Fotónová terapia** zeleným svetlom (PHOTON GREEN)
7. **EMS** (elektrická stimulácia) - 5 režimov

TLAČIDLÁ:

- **POWER** – pre zapnutie a vypnutie prístroja
- **SONIC** – pre aktiváciu ultrazvuku
- **GALVANIC** – pre aktiváciu kladných alebo záporných iónov.
Pri značke PLUS alebo MINUS sa rozsvieti červená kontrolka
- **PHOTON** – pre aktiváciu fotónovej terapie.
Pri značke RED, BLUE alebo GREEN sa rozsvieti červená kontrolka

Formovanie postavy pomocou funkcií SONIC, GALVANIC A PHOTON

Dôkladne očistite vaše telo, použite sprchový peeling alebo sprchový gél. Telo následne dôkladne osušte uterákom alebo osuškou.

Stlačte tlačidlo **POWER** pre zapnutie prístroja. Aktivujte funkciu **SONIC**, spolu s ňou aj funkciu **GALVANIC mínus** a súčasne môžete použiť aj **fotónovú terapiu** – červené, modré alebo zelené svetlo. Pre efektívne formovanie postavy odporúčame navoliť kombináciu **SONIC + GALVANIC mínus** (záporné ióny) + **PHOTON RED** (červené svetlo), prípadne prestriedať všetky voliteľné farby svetla.

UPOZORNENIE: Prepínač **EMS** musí byť v polohe **OFF**.

Na ultrazvukovú hlavicu aj priamo na pokožku naneste ultrazvukový gél alebo anti-celulitídny gél na tvarovanie postavy. Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky (brucho, stehná, ramená,...)

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou hlavicom po pokožke. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej ultrazvuková hlavica hladko kĺže.

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku používaný prípravok.

Aplikácia by mala trvať 5 až 10 minút pre každú ošetrovanú oblasť.

Masáž rúk: Postupujete od zápästia k ramenu priamymi ťahmi alebo krúživými pohybmi.

Masáž brucha: Masírujete brucho krúživými pohybmi.

Masáž zadnej časti tela: Masírujete zadné partie krúživými pohybmi.

Masáž nôh: Postupujete od priehlavku k stehnu priamymi ťahmi alebo krúživými pohybmi.



Formovanie postavy pomocou funkcie EMS

Dôkladne očistite vaše telo, použite sprchový peeling alebo sprchový gél. Telo následne dôkladne osušte uterákom alebo osuškou.

Stlačte tlačidlo **POWER** pre zapnutie prístroja. Do otvoru za hlavicou prístroja pripojte vodivý kábel. K vodivému káblu pripojte kontaktné elektródy alebo rukavice (nacvaknite kontakty). Kontaktné elektródy (s adhéznyimi štvorčekovými plôškami) sa lepia na čistú pokožku. Rukavice sa prikladajú k jednotlivým častiam tela. Keď používate rukavice, dotýkajte sa ukazovákom jednej rukavice a ukazovákom druhej rukavice zvolenej časti tela tak, ako keby ste používali naliepacie elektródy.

Aktivujte režim **EMS** a nastavte jeden z režimov 1 až 5.

Režim 1 (mode 1) – **TAPPING** (poklepávanie) - spevnenie brucha a zadných partií tela.

Režim 2 (mode 2) – **MASSAGE** (masáž) - formovanie drieku.

Režim 3 (mode 3) – **KNEAD** (hnetenie) - spevnenie brucha a zadných partií tela.

Režim 4 (mode 4) – **SCRAPPING** - chrbát a brucho.

Režim 5 (mode 5) – **SLIMMING** - chudnutie - oblasť brucha, stehna, zadných partií tela, drieku a ramien.

Tlačidlom +/- nastavte želanú intenzitu od 1 do 7.

Vyberte vhodný program a nastavte intenzitu tak, aby to bolo pre vás pohodlné a príjemné. Prístroj bude pracovať 10 minút a následne sa automaticky vypne. Ak s formovaním postavy pomocou funkcie EMS začínate, nepoužívajte zvolený program dlhšie ako 15 minút. Maximálna odporúčaná dĺžka aplikácie je 30 minút v danej oblasti. za deň. Odporúčame používať 2x alebo 3x do týždňa.



Kontrola funkčnosti ultrazvuku

Ultrazvukové vibrácie môžete sami skontrolovať pomocou kvapky vody. Navlhčíte ultrazvukovú hlavicu niekoľkými kvapkami vody a prepnete prístroj do ultrazvukového režimu **SONIC**. Uvidíte, ako kvapka vody vibruje na ultrazvukovej hlavici.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Parametre a technické údaje:

Menovité napätie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (sieťový adaptér)

Menovité napätie: 5 V DC, 0, 4 A, trieda II A dvojité izolácia. (zariadenie)

Hmotnosť: 235 g

Ultrazvuk (frekvencia): 1 Mhz

Červené svetlo 625 nm, 12 ks LED

Zelené svetlo 525 nm, 12 ks LED

Modré svetlo 465 nm, 12 ks LED

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.

Po ošetrení

V závislosti od typu pleti môžete cítiť po ošetrení pocit pnutia. Po ošetrení pokožky prístrojom sa odporúča naniesť na pleť kvalitný hydratačný krém (nočný alebo denný).

Ako často prístroj používať

Používajte prístroj 2 x do týždňa.

Odporúčané prípravky

Odporúčame tieto čistiace prípravky:

- DEVEE CLEAR SKIN GÉL
- WELLMAXX HYALURON FACE WASH

Odporúčame tieto hyaluronové preparáty:

- DEVEE HYALURON GÉL · WELLMAXX HYALURON GÉL
- DEVEE HYALURON EFFECT AMPULKY
- WELLMAXX HYALURON CALCIUM AMPULKY

Odporúčame tieto telové prípravky na chudnutie:

- WELLMAXX SHAPE TELOVÝ DENNÝ KRÉM
- WELLMAXX SHAPE TELOVÝ NOČNÝ KRÉM

Čistenie a skladovanie

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Ďalšie informácie

Tento ultrazvukový prístroj je elektrické zariadenie.

Balenie obsahuje:

Kozmetický prístroj, adaptér, 4 ks elektród s adhézными kontaktnými plôškami, rukavice, EMS vodivý kábel, okuliare.

Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o pleť

Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o pleť:

1. Odstránenie make-up-u.
2. Čistenie pleti žehličkou na pleť (SONIC, GALVANIC, PHOTON) a čistiacou emulziou.
3. Peelingová maska alebo peeling pokožky.
4. Tonizovanie pokožky micelárnou vodou alebo tonikom.
5. Penetrácia účinných látok do pleti žehličkou na pleť (SONIC, GALVANIC, PHOTON) s použitím koncentrátu účinných látok – gél, sérum, ampulky.
6. Masáž pleti s použitím masážnej emulzie. Po masáži odstráňte emulziu tampónikom.
7. Pleťová maska 10-15 minút
8. Na záver: očný krém, pleťový krém.

Žehličku na pleť používate v krokoch 2 a 5. Jednotlivé kroky si prispôsobte podľa vašich individuálnych možností.

POSTUP OPAKUJTE MINIMÁLNE 2 MESIACE, 2x DO TÝŽDŇA.

Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o telo

Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o telo:

1. Zbavte pokožku mastnoty použitím sprchového peelingu alebo sprchového gélu.
2. Použite funkciu EMS, niektorý z režimov 1 až 5.
3. Použite funkciu SONIC-GALVANIC-PHOTON (RED) na stimulovanie tvorby kolagénu a spevnenie pokožky spolu s vhodným prípravkom (anticelulitídny gél, vodivý gél).
4. Ráno a večer použitie Wellmaxx Shape telové mlieko na formovanie postavy.

POSTUP OPAKUJTE MINIMÁLNE 2 MESIACE, 2x DO TÝŽDŇA.

Video postup

Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:

www.hyaluron.sk/video

NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

BALENÍ OBSAHUJE:

přístroj, napájecí adaptér s kabelem, elektrody (kontaktní plošky),
kontaktní rukavice

Bezpečnostní upozornění

- Nenamáčejte přístroj do vody ani do jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí a nepoužívejte ho pod vodou.
- Používejte výhradně originální adaptér, který je součástí balení.
- Po každém použití odpojte kosmetický přístroj od napájecího kabelu a adaptéru
- Nepoužívejte kosmetický přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo přístroj samotný.
- Nepoužívejte přístroj po pádu na zem, pokud došlo k jeho poškození.
- Nabíjecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí. Nevystavujte ho působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nikdy se nepokoušejte kosmetický přístroj rozebírat nebo opravovat.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti vody, umyvadla, vany, sprchového koutu, toalety, nebo ve vlhkém prostředí.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně očistěte suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí. Nenechte děti hrát si s přístrojem.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Výše uvedené osoby (kromě dětí) mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použití.
- Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyaluron gely nebo koncentráty.
- Ultrazvuk se nesmí používat na oblast očí, v bezprostřední blízkosti očí (oblast oční bulvy) a v oblasti štítné žlázy.
- Používejte přístroj pouze na zdravé pokožce.
- Přístroj používejte maximálně 1x denně. Na citlivou pokožku 1 týdně, případně podle potřeby.
- Pokud pociťujete nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celé tváři.
- Po zakoupení přístroje zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy.

POZNÁMKA: Přístroj funguje pouze tehdy, když se rukama dotýkáte kovové desky.

Kontraindikace

- Těhotenství, kojení, menstruace
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
- Horečka, záněty, akutní infekce (např. Akné, lupénka, zarděnky)
- Bakteriální infekce kůže, akutní herpetické a zánětlivá onemocnění kůže
- Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
- Oblasti těla se závažnými poruchami krevního oběhu
- Ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie
- Akutní revmatická onemocnění
- Neurologická onemocnění (např. migrény)
- Užívání kortizolu nebo léků zvyšujících citlivost na světlo
- Auto-imunitní onemocnění
- Poruchy krve, cévnímu systému nebo jiné interní onemocnění
- Poruchy srážlivosti krve
- Poškozená nebo spálená pokožka
- Alergie na kovy, na změny teploty, na elektromagnetické vlnění

POZNÁMKA: Pokud máte pochybnosti, zda můžete přístroj používat, kontaktujte svého prodejce, vaši kosmetičku nebo odborného lékaře.

Oblasti těla, které byste neměli ošetřovat

- Mícha, páteř, mozek
- Oční bulvy, oční víčka, rty
- Zóny intenzivního růstu u dětí a dospívajících
- Oblast pohlavních žláz
- Oblast štítné žlázy

Funkce kosmetického přístroje:

- **galvanický proud** - kladné ionty (čištění pleti)
- **galvanický proud** - záporné ionty (výživa pleti)
- **ultrazvuková technologie**
- **fotonová terapie** (modré, červené, zelené světlo),
- **EMS** - elektrická mikroproudová stimulace (mikroproud)

Postup pro použití EMS (mikroproud):

1. Připojte přístroj k elektrické síti.
2. Důkladně očistěte vaše tělo a osušte ho ručníkem.
3. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje.
4. Do otvoru za hlavicí přístroje připojte elektrodový kabel. K elektrodovému kabelu připojte kontaktní elektrody s kontaktními ploškami, nebo použijte rukavice. Nacvakněte. Kontaktní elektrody se lepí na čistou pokožku. Rukavice se přikládají k jednotlivým částem těla.
5. Aktivujte režim EMS navolením režimu 1, 2, 3, 4 nebo 5.
6. Nastavte si požadovanou intenzitu 1-7.


Postup pro použití ultrazvukové hlavičky:

1. Připojte přístroj k elektrické síti.
2. Před použitím přístroje na obličej důkladně odstraňte make-up.
3. Stiskněte tlačítko POWER na 2 sekundy pro zapnutí přístroje.
4. **Pro čištění pleti si navolte následovně:** tlačítkem SONIC ultrazvuk + tlačítkem GALVANIC kladné ionty + tlačítkem PHOTON modré světlo. Při každé funkci se rozsvítí kontrolka.
5. **Pro výživu pleti si navolte následovně:** tlačítkem SONIC ultrazvuk + tlačítkem GALVANIC záporné ionty + tlačítkem PHOTON červené světlo. Při každé funkci se rozsvítí kontrolka.
6. Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko POWER na 2 sekundy.
7. **Postup:** Jemnými kruhovými pohyby bez vyvíjení tlaku přejíždějte ultrazvukovou hlavicí po pokožce na tváři. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní ultrazvuková hlavička snadno klouže.

UPOZORNĚNÍ: Neošetřujte pokožku v okolí očí a ani přímo na oční bulvu!

8. Na závěr použijte hydratační krém.

Masáž obličeje pomocí žehličky

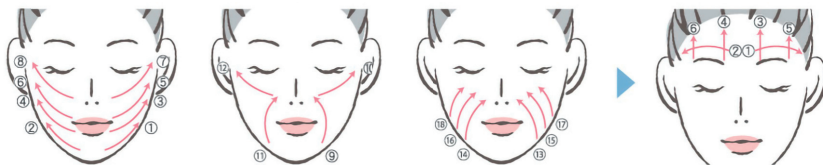

Parametry a technické údaje:

Jmenovité napětí:	100-240 V AC, 50/60 Hz (síťový adaptér)
Jmenovité napětí:	5 V DC (zařízení), 0.4 třída II A dvojité izolace
Ultrazvuk:	1 MHz.
Fotony (vlnová délka):	625 nm, 525 nm, 465 nm
Hmotnost:	235 g

Tabulka programů

	1.	2.	3.	4.
Programy	Čištění pleti	Výživa pleti	Formování těla ultrazvukem	Formování těla EMS (mikroproud)
Účel	Čištění pleti	Výživa pleti	Hubnutí	Zpevnění těla
Kterou část přístroje použijete	Ultrazvuková hlavice	Ultrazvuková hlavice	Ultrazvuková hlavice	EMS elektrody + kontaktní plošky / rukavice
Funkce	Kladné ionty Ultrazvuk Modré světlo	Záporné ionty Ultrazvuk Červené světlo	Záporné ionty Ultrazvuk Červené světlo	EMS
Upozornění	EMS v poloze OFF	EMS v poloze OFF	EMS v poloze OFF	EMS v poloze 1, 2, 3, 4, 5. Tlačítkem +/- navolte požadovanou intenzitu od 1-7
Přípravek	Čistící gel nanést na obličej.	Hyaluron koncentrát (gel, sérum, nebo ampule) nanést na obličej. Pro masáž pleti můžete použít i vodivý gel. Po ošetření pleti vodivý gel odstraňte kosmetickým tampónkem.	Ultrazvukový gel nanést na část těla. Po ošetření ho odstraňte kosmetickým tampónkem.	Žádný. Plocha těla musí být odmaštěná a suchá.
Délka aplikace	5 min.	5 min.	5 min.	15-30 min.
Volba tohoto programu	Tlačítko ultrasonic Tlačítko Galvanic (+) Tlačítko photon (BLUE)	Tlačítko ultrasonic Tlačítko Galvanic (-) Tlačítko photon (RED)	Tlačítko ultrasonic Tlačítko Galvanic (-) Tlačítko photon (RED)	EMS Režim 1 - poklepávání (břicho, hýždě) Režim 2 - masáž (dřík) Režim 3 - hnětení (břicho, hýždě) Režim 4 - scrapping (záda, břicho) Režim 5 - hubnutí (břicho, hýždě, stehna, ramena)
Jak často se může používat	2-3 x týdně	2-3 x týdně	2-3 x týdně	2-3 x týdně
Postup	Jemné krouživé pohyby	Jemné krouživé pohyby	Jemné krouživé pohyby	Přilepením kontaktních plošek, nebo použitím rukavic napojených na elektrody (elektrodový kabelík připojte k přístroji).
Oblast ošetření	Obličej	Obličej	Tělo	Tělo

Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:
www.hyaluron.sk/video

Importér:

Yalong Trade s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: 0907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*