

*Beauty®
Biowave*



ŽEHLIČKA NA PLEŤ S ROLLEROM
ŽEHLIČKA NA PLEŤ S ROLLEREM

BeautyBiowave MR821

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

Beauty®
Biowave

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

BALENIE OBSAHUJE:

Kozmetický prístroj, magnetickú základňu, USB kábel, čistiacu handričku.

Bezpečnostné upozornenia

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou a nepoužívajte ho pod vodou.
- Používajte výhradne originálny adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
- Po každom použití odpojte kozmetický prístroj od napájacieho kábla a adaptéra
- Nepoužívajte kozmetický prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo prístroj samotný.
- Nepoužívajte prístroj po páde na zem pokiaľ došlo k jeho poškodeniu.
- Nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho príviknutiu. Nevystavujte ho pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nikdy sa nepokúšajte kozmetický prístroj rozoberať, alebo opravovať.
- Nenabíjajte prístroj v blízkosti vody, umývadla, vane, sprchového kúta, toalety, alebo vo vlhkom prostredí.
- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou alebo vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí. Nenechajte deti hrať sa s prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou, alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby (okrem detí) môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospeljej osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurón gélmi, alebo koncentrátmi.
- Ultrazvuk sa nesmie používať na oblasť očí, v bezprostrednej blízkosti očí (oblasť očnej bulvy) a v oblasti štítnej žľazy.
- Používajte prístroj len na zdravej pokožke.
- Prístroj používajte max. 1x denne. Na citlivú pokožku 1 týždenne, prípadne podľa potreby.
- Pokiaľ pociťujete nepohodlie, prestaňte prístroj používať.
- Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.

UPOZORNENIE: Prístroj za žiadnych okolností nerozoberajte a používajte ho výhradne v súlade s dodaným návodom na použitie. Rozobratie prístroja, prípadne jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.

POZNÁMKA: Roller funguje len vtedy, keď sa rukami dotýkate dotykovej plochy a keď je roller umiestnený kolmo na pokožku. Iba vtedy prechádza pokožkou mikroprúd.

Kontraindikácie


- Tehotenstvo, kojenie, menštruácia
- Kardiolstimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
- Horúčka, zápal, akútne infekcie (napr. akné, psoriáza, ružienka)
- Bakteriálna infekcia kože, akútne herpetické a zápalové ochorenia kože
- Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- Oblasť tela so závažnými poruchami krvného obehu
- Ischemická choroba srdca, srdcová arytmia
- Akútne reumatické ochorenia
- Neurologické ochorenia (napr. migrény)
- Užívanie kortizolu alebo liekov zvyšujúcich citlivosť na svetlo
- Auto-imunitné ochorenia
- Poruchy krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia
- Poruchy zrážanlivosti krvi
- Poškodená, alebo spálená pokožka
- Alergie na kovy, na zmeny teploty, na elektromagnetické vlnenie

Oblasť tela, ktoré by ste nemali ošetrovať kozmetickým prístrojom

- Miecha, chrbtica, mozog
- Očné bulvy, očné viečka, pery
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospievajúcich
- Oblasť pohlavných žliaz
- Oblasť štítnej žľazy

POZNÁMKA: Ak máte pochybnosti, či môžete prístroj používať, kontaktujte vášho predajcu, vašu kozmetičku, alebo odborného lekára.

Popis prístroja

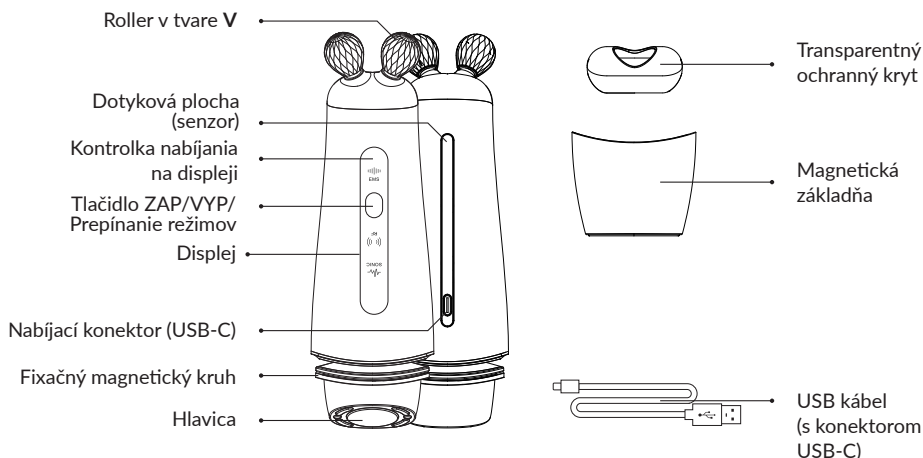

Nabíjanie kozmetického prístroja

- Pred použitím musí byť prístroj úplne nabitý. Štandardné nabíjanie prístroja trvá približne 3 hodiny.
- Dodávaný USB kábel pripojte k nabíjacímu konektoru USB-C na prístroji. Druhý koniec kábla pripojte k vhodnému adaptéru, alebo k USB konektoru vášho PC. Ak použijete nabíjací adaptér, pripojte ho do zásuvky elektrickej siete 230 V / 50 Hz, AC.
- Počas nabíjania bude na displeji (v jeho hornej časti) blikať biela kontrolka nabíjania.
- Keď je batéria prístroja naplno nabitá, biela kontrolka nabíjania bude trvalo svietiť.
- Keď je zostávajúca kapacita batérie menšia ako 10 %, na displeji (v jeho hornej časti) bude pomaly blikať biela kontrolka nabíjania - cca 1x za 3 sekundy.
- Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie 3x pípne, biely indikátor nabíjania bude 5 sekúnd blikať a prístroj sa následne vypne.

POZNÁMKA: Produkt obsahuje lítiové batérie. Súčasťou balenia je aj nabíjací USB kábel s koncovkou typu USB-C.

Funkcie kozmetického prístroja

Tento kozmetický prístroj je určený na zlepšenie kvality vašej pleti. Pomáha eliminovať vrásky, spevňuje pokožku, dokonale vyčistí vašu pokožku až do hĺbky, zlepší jej prekrvenie, textúru pokožky, napomáha pri absorpcii aktívnych látok. Už po niekoľkých ošetreniach bude vaša pokožka vyzerať oveľa jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne definovanými kontúrami. Prístroj má dve hlavice na jednoduché dosiahnutie želaných výsledkov.

Hlavica na vrchnej strane prístroja má zabudovanú technológiu ultrazvukových vibrácií, technológiu emitácie iónov a RF technológiu. Vďaka kombinácii ultrazvukových vibrácií a emitácie kladných iónov sa z nej stane ideálny nástroj na čistenie pleti.


Keď súčasne aktivujete RF technológiu a emitáciu záporných iónov, spravíte z tejto hlavice dokonalého pomocníka pre implementovanie aktívnych látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do najhlbších vrstiev pokožky.


Roller zo spodnej časti prístroja má zabudovaný systém EMS, ktorý napomáha vypnutiu pokožky (lifting účinnok) a zároveň výrazne aktivuje zvýšenie produkcie kolagénu.


Používanie kozmetického prístroja

ZAPNUTIE PRÍSTROJA A PREPÍNANIE REŽIMOV:

UPOZORNENIE: Pred použitím odpojte prístroj od nabíjania.

Stlačte tlačidlo  (**ZAP / VYP**) na 2 sekundy pre zapnutie prístroja. Prístroj pípne a aktivuje sa režim **SONIC**. Na displeji sa rozsvieti indikátor režimu SONIC. Po 3 minútach činnosti v režime SONIC sa prístroj automaticky vypne.


Znova stlačte tlačidlo  (**ZAP / VYP**) a prístroj sa prepne z režimu SONIC do režimu **RF**. Na displeji sa rozsvieti indikátor režimu RF. Po 5 minútach činnosti v režime RF sa prístroj automaticky vypne.

Znova stlačte tlačidlo  (**ZAP / VYP**) a prístroj sa prepne z režimu RF do režimu **EMS**. Na displeji sa rozsvieti indikátor režimu EMS. Po 6 minútach činnosti v režime EMS sa prístroj automaticky vypne.

Opakovaným stláčaním tlačidla  (**ZAP / VYP**) prepínate jednotlivé režimy prístroja.

VYPNUTIE PRÍSTROJA :

Prístroj sa v každom režime automaticky vypne po ubehnutí času, ktorý je špecifický pre konkrétny režim (SONIC - 3 minúty, RF - 5 minút, EMS - 6 minút).



Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo  (**ZAP / VYP**) na 2 sekundy a prístroj sa vypne.

NÍZKY STAV BATÉRIE:

Keď je zostávajúca kapacita batérie príliš nízka, všetky kontrolky 5x zablikajú a prístroj sa automaticky vypne.

Režim SONIC - čistenie (ultrazvuk plus kladné ióny)

V režime čistenia emituje prístroj kladné ióny, vďaka čomu sa z povrchového tkaniva pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je tak účinne čistená aj do hĺbky. Súčasne prístroj generuje aj ultrazvukové vlny, ktoré zvýšia prekrvenie oblastí, rozkmitajú tkanivo a čistenie pleti je tak oveľa dôkladnejšie.

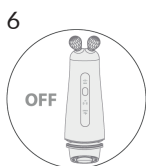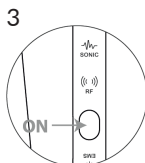

1. Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up a vyčistite pleť od nečistôt.
2. Na hlavicu prístroja umiestnite tampónik a zafixujte ho magnetickým kruhom. Navlhčite tampónik vodou, vašim obľúbeným tonikom alebo pleťovou vodou. Môžete použiť aj čistiacu penu, alebo čistiaci gél.
3. Prepnete prístroj do režimu SONIC.
4. Umiestnite hlavicu kolmo na pokožku a jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicom po celej tvári. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica hladko klíže.
5. Čistenie vykonávajte po dobu 3 minút. Sústreďte sa najmä na nos a okolie nosa, aby ste dokonale vyčistili aj nečistoty z hĺbky pórov.
6. Po 3 minútach činnosti sa prístroj automaticky vypne.
7. Odstráňte tampónik a hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.
8. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

Režim RF - hydratácia (rádiofrekvencia spolu so zápornými iónmi)

V hydratačnom režime emituje prístroj záporné ióny spolu s ultrazvukovými vlnami. Táto kombinácia umožňuje vynikajúcu absorpciu aktívnych látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do hlbších vrstiev pokožky.



1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby (pocit suchej pleti) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu Beauty Biowave. Keďže aplikovaný kozmetický prípravok musí byť vodivý, nepoužívajte pleťový krém ani fluid.
2. Prepnete prístroj do režimu RF.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou po celej tvári po dobu 5 minút a sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica hladko kĺže.
4. Po 5 minútach sa prístroj automaticky vypne.
5. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.

POZNÁMKA: Príliš veľké množstvo gélu alebo séra by mohlo spôsobiť šupinky na pokožke. Preto nie je vhodné použiť na jednu aplikáciu viac ako 1-2 stlačenia aplikátora hyalurónového gélu, alebo séra.

Režim EMS - spevňujúci lifting a anti-aging

V tomto režime prístroj využíva technológiu EMS pre spevnenie pleti a zvýšenie produkcie kolagénu. EMS je terapia mikroprúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže imitovať pocit reálnej masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi efektívna na vyčistenie kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie krvného obehu v oblasti aplikácie.

Táto mikroprúdová terapia stimuluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu s nízkymi frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to aj pasívny pohyb.

Technológia EMS aktivuje bunky na povrchu aj vo vnútorných vrstvách pokožky, výrazne stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky a zanecháva pokožku hebkú a sviežu.

Prístroj je vybavený rollerom v tvare diamantu, ktorý perfektne "sadne" na pokožku a poskytne vám veľmi dobrý pocit z ošetrovania vašej pleti.



1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby (pocit suchej pleti) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu Beauty Biowave.
2. Prepnete prístroj do režimu EMS.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou po celej tvári po dobu 6 minút a sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások a ochabnutej pleti.
4. Po 6 minútach sa prístroj automaticky vypne.
5. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.

Ako často prístroj používať

Odporúčame pravidelné ošetrovanie pleti 2 až 3x do týždňa, každý z režimov.

Odporúčané prípravky

Čistiace prípravky:

- Wellmaxx Skineffect - čistiaca pena, alebo tonikum.
- Wellmaxx Hyaluron5 Facewash - čistiace tonikum, alebo čistiaci gél.

Hyalurónové preparáty:

- Devee Hyaluron gél Superkoncentrát (obsahuje 3 druhy kyseliny hyalurónovej)
- Devee Hyaluron sérum (obsahuje 4 druhy kyseliny hyalurónovej)
- Wellmaxx Hyaluron5 Collagen Booster
- Wellmaxx Skineffect super hyaluron - ampulky
- BeautyBiowave ultrazvukový vodivý gél (špeciálny vodivý gél pre žehličky)

Parametre a technické údaje:

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Menovité napätie: | 3,7 V |
| Menovitý prúd: | 100 mA až 400 mA (Ultrazvuk) 200 mA až 2 800 mA (RF) 8 mA až 30 mA (EMS) |
| Ultrazvuk (frekvencia): | 3 MHz (\pm 10 %) |
| Čas nabíjania: | približne 3 hodiny |
| Časovač: | SONIC - 3 minút RF - 5 minút EMS - 6 minút |

Tento kozmetický prístroj je elektrické zariadenie.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Čistenie

Po použití prístroja utrite prístroj navlhčenou handričkou. Následne prístroj dôkladne osušte suchou handričkou. Nikdy neutierajte magnetický kruh alkoholom, ani čistiacimi prostriedkami. Neponárajte prístroj do vody, ani ho neumiestňujte pod prúd vody.

Skladovanie

Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Často kladené otázky a riešenie problémov:

| Problém: | Možná príčina: | Riešenie problému: |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj sa nezapol. | <ol style="list-style-type: none">1. Príliš nízka zostávajúca kapacita batérie.2. Neznáma porucha. | <ol style="list-style-type: none">1. Vyskúšajte zapnúť prístroj po 3 hodinách nabíjania.2. Ak sa prístroj nezapne, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis. |
| Prístroj nefunguje ani po plnom nabití. | <ol style="list-style-type: none">1. USB kábel nie je správne zasunutý do nabíjacieho konektora, alebo adaptér nie je správne zapojený v elektrickej sieti.2. Prístroj sa dostatočne nenabil.3. Batéria je na konci svojej životnosti. | <ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či sa prístroj správne nabíja. Blikajúce kontrolky symbolizujú nabíjanie.2. Ak sa prístroj nezapne, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis. |
| Neviem rozoznať, či prístroj pracuje v čistiacom alebo hydratačnom režime. | <ul style="list-style-type: none">• Ľudské ucho nie je schopné detegovať ultrazvukové vlny, ani mikroprúd. | <ul style="list-style-type: none">• V čistiacom alebo hydratačnom režime kvapnite pár kvapiek vody na hlavicu prístroja a zbadáte, ako začnú kvapky vody vibrovať. |
| V režime EMS nepociťujem žiadny účinok. | <ol style="list-style-type: none">1. Nedotýkate sa dotykovej plochy (mikroprúdového senzora) navlhčenými prstami.2. Príliš nízka zostávajúca kapacita batérie.3. Poškodenie prístroja. | <ol style="list-style-type: none">1. Navlhčíte si ruky, dotknite sa prstami dotykovej plochy (senzora) a roller priložte na pokožku.2. Nabíjajte prístroj 3 hodiny a znova vyskúšajte.3. Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis. |
| Teplota prístroja je príliš vysoká. | <ol style="list-style-type: none">1. Prístroj používate príliš dlho.2. Do prístroja mohla vniknúť voda.3. Poškodenie prístroja. | <ol style="list-style-type: none">1. Vypnite prístroj a opätovne ho vyskúšajte o 30 minút.2. Nevystavujte prístroj kontaktu s vodou.3. Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis. |

NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

Děkujeme za vaši důvěru, projevenou zakoupením našeho produktu. Přejeme vám příjemné používání tohoto kosmetického přístroje a hodně radosti a spokojenosti z dosažených výsledků.

DŮLEŽITÉ: Abyste se z kosmetického přístroje mohli těšit po dlouhou dobu, doporučujeme si přečíst návod k použití, než začnete přístroj používat. Návod uschovejte pro pozdější použití.

BALENÍ OBSAHUJE:

Kosmetický přístroj, magnetická základna, čistící hadřík.

Bezpečnostní upozornění

- Nenamáčejte přístroj do vody ani do jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí a nepoužívejte ho pod vodou.
- Používejte výhradně originální adaptér, který je součástí balení.
- Po každém použití odpojte kosmetický přístroj od napájecího kabelu a adaptéru
- Nepoužívejte kosmetický přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo přístroj samotný.
- Nepoužívejte přístroj po pádu na zem, pokud došlo k jeho poškození.
- Nabíjecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí. Nevystavujte ho působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nikdy se nepokoušejte kosmetický přístroj rozebírat nebo opravovat.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti vody, umyvadla, vany, sprchového koutu, toalety, nebo ve vlhkém prostředí.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně očistěte suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí. Nenechte děti hrát si s přístrojem.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Výše uvedené osoby (kromě dětí) mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použití.
- Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyalurón gely nebo koncentráty.
- Ultrazvuk se nesmí používat na oblast očí, v bezprostřední blízkosti očí (oblast oční bulvy) a v oblasti štítné žlázy.
- Používejte přístroj pouze na zdravé pokožce.
- Přístroj používejte maximálně 1x denně. Na citlivou pokožku 1 týdně, případně podle potřeby.
- Pokud pociťujete nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celé tváři.
- Po zakoupení přístroje zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy.

POZNÁMKA: Přístroj funguje pouze tehdy, když se rukama dotýkáte dotykové plochy a když je přístroj umístěn kolmo na pokožku. Pouze tehdy prochází pokožkou mikroproudu.

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení ošetření pokožky se ujistěte, že je přístroj suchý a následně jej umístěte do základny.

Kontraindikace


- Těhotenství, kojení, menstruace
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
- Horečka, záněty, akutní infekce (např. Akné, lupénka, zarděnky)
- Bakteriální infekce kůže, akutní herpetické a zánětlivé onemocnění kůže
- Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
- Oblasti těla se závažnými poruchami krevního oběhu
- Ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie
- Akutní revmatická onemocnění
- Neurologická onemocnění (např. migrény)
- Užívání kortizolu nebo léků zvyšujících citlivost na světlo
- Auto-imunitní onemocnění
- Poruchy krve, cévnímu systému nebo jiné interní onemocnění
- Poruchy srážlivosti krve
- Poškozená nebo spálená pokožka
- Alergie na kovy, na změny teploty, na elektromagnetické vlnění

POZNÁMKA: Pokud máte pochybnosti, zda můžete přístroj používat, kontaktujte svého prodejce, vaši kosmetičku nebo odborného lékaře.

Oblasti těla, které byste neměli ošetřovat

- Mícha, páteř, mozek
- Oční bulvy, oční víčka, rty
- Zóny intenzivního růstu u dětí a dospívajících
- Oblast pohlavních žláz
- Oblast štítné žlázy

Popis přístroje

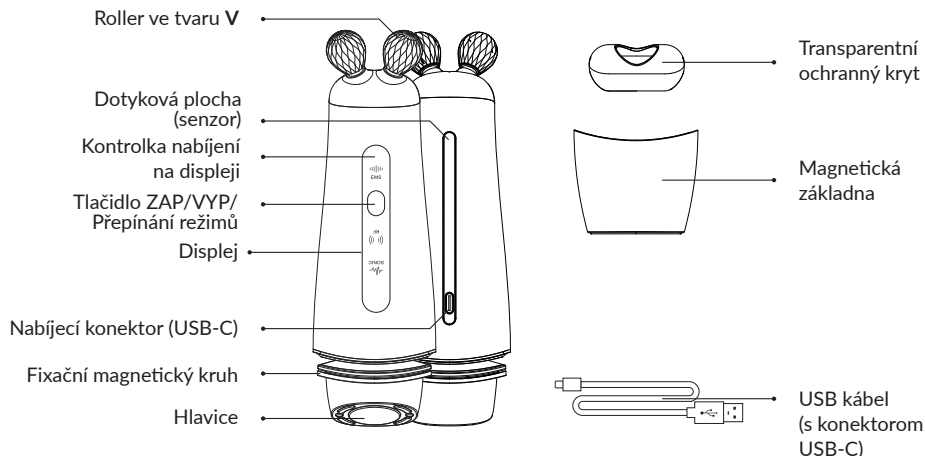

Nabíjení kosmetického přístroje

- Před použitím musí být přístroj zcela nabitý. Standardní nabíjení přístroje trvá přibližně 3 hodiny.
- Dodávaný USB kabel připojte k nabíjecímu konektoru USB-C na přístroji. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému adaptéru, nebo USB konektoru vašeho počítače. Pokud použijete nabíjecí adaptér, připojte jej do zásuvky elektrické sítě 230 V / 50 Hz, AC.
- Během nabíjení bude na displeji (v jeho horní části) blikat bílá kontrolka nabíjení.
- Když je baterie přístroje naplno nabitá, bílá kontrolka nabíjení bude trvale svítit.
- Když je zbývající kapacita baterie menší než 10%, na displeji v jeho horní části bude pomalu blikat horní kontrolka nabíjení cca. 1x za 3 sekundy.
- Když je baterie téměř vybitá, zařízení 3x pípne, bílý indikátor nabíjení bude 5 sekund blikat a přístroj se následně vypne.

POZNÁMKA: Produkt obsahuje lithiové baterie. Součástí balení je i nabíjecí USB kabel s konečkou typu USB-C.

Funkce kosmetického přístroje

Tento kosmetický přístroj je určen pro zlepšení kvality vaší pleti. Pomáhá eliminovat vrásky, zpevňuje pokožku, dokonale vyčistí vaši pokožku až do hloubky, zlepšuje její prokrvení, texturu pokožky, napomáhá při absorpci aktivních látek. Už po několika ošetřeních bude vaše pokožka vypadat jasnější a svěžejší, se zřetelně definovanými konturami.

Přístroj má dvě hlavice na jednoduché dosažení žádoucích výsledků.

Hlavice na vrchní straně přístroje má zabudovanou technologii ultrazvukových vibrací, technologii emitaci iontů a RF technologii. Díky kombinací ultrazvukových vibrací a emitaci kladných iontů se z ní stane ideální nástroj na čištění pleti.

Když současně aktivujete RF technologii a emitaci záporných iontů, uděláte z této hlavice dokonalého pomocníka pro implementování aktivních látek z kosmetických přípravků (kyselina hyaluronová) i do nejhlubších vrstev pokožky.

Roller na spodní straně přístroje má zabudovaný systém EMS, který napomáhá vypnutí pokožky (lifting účinek) a zároveň výrazně aktivuje zvýšení produkci kolagenu.

Používání kosmetického přístroje

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ:

UPOZORNĚNÍ: Před použitím odpojte přístroj z nabíjení.

Stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP / VYP)** na 2 sekundy pro zapnutí přístroje. Přístroj pípne a aktivuje se režim **SONIC**. Na displeji se rozsvítí indikátor režimu SONIC. Po třech minutách činnosti v režimu SONIC se přístroj automaticky vypne.

Znovu stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP / VYP)** a přístroj se přepne z režimu SONIC do režimu **RF**. Na displeji se rozsvítí indikátor režimu RF. Po šesti minutách činnosti v režimu RF se přístroj automaticky vypne.

Znovu stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP / VYP)** a přístroj se přepne z režimu RF do režimu **EMS**. Na displeji se rozsvítí indikátor režimu EMS. Po 6 minutách činnosti v režimu EMS se přístroj automaticky vypne.

Opakovaným stisknutím tlačítka **⏻ (ZAP / VYP)** přepínáte jednotlivé režimy přístroje.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:

Přístroj se v každém režimu automaticky vypne po uběhnutí času, který je specifický pro konkrétní režim (SONIC - 3 minuty, RF - 5 minut, EMS - 6 minut).



Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko **⏻ (ZAP / VYP)** na 2 sekundy a přístroj se vypne.

NÍZKÝ STAV BATERIE:

Když je zbývající kapacita baterie příliš nízká, všechny kontrolky 5x zablikají a přístroj se automaticky vypne.

Režim SONIC - čištění (ultrazvuk plus kladné ionty)

V režimu čištění emituje přístroj kladné ionty, díky čemuž se z povrchové tkáně pokožky extrahují záporné ionty a vaše pokožka je tak účinně čištěna i do hloubky. Současně přístroj generuje i ultrazvukové vlny, které zvýší prokrvení oblasti, rozkmitají tkáň a čištění pleti je tak mnohem důkladnější.

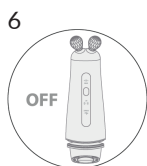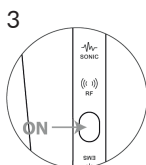

1. Před samotným čištěním důkladně odstraňte make-up a vyčistěte pleť od nečistot.
2. Na hlavici přístroje umístěte tampónek a zařijte ho magnetickým kruhem. Navlhčete tampónek vodou, vaším oblíbeným tonikem nebo pleťovou vodou. Můžete použít i čistící pěnu nebo čistící gel.
3. Přepněte přístroj do režimu **SONIC**.
4. Umístěte hlavici kolmo na pokožku a jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavicí po celé tváři. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní hlavice lehce klouže.
5. Čištění provádějte po dobu 3 minut. Soustředte se hlavně na nos a okolí nosu, abyste dokonale vyčistili i nečistoty z hloubky pórů.
6. Po 3 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne.
7. Odstraňte tampónek a hlavici důkladně vytřete čistícím hadříkem.
8. Důkladně opláchněte obličej čistou vodou.

Režim RF - hydratace (Radiofrekvence spolu se zápornými ionty)

V hydratačním režimu emituje přístroj záporné ionty spolu s radiofrekvenčními vlnami. Taková kombinace umožňuje absorpci aktivních látek z kosmetických přípravků (kyselina hyaluronová) i do hlubších vrstev pokožky.



1. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyaluronového gelu nebo séra (1-2 stlačení aplikátoru). Nepoužívejte tampónek. V případě potřeby (pocit suché pleti) naneste malé množství vody, nebo vodivého gelu Beauty Biowave. Jelikož aplikovaný kosmetický přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový krém, ani fluid.
2. Přepněte přístroj do režimu **RF**.
3. Umístěte hlavici kolmo na pokožku a jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavici po celé tváři po dobu 5 minut a soustředte se hlavně na oblasti výskytu vrásek. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní hlavice lehce klouže.
4. Po 5 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne.
5. Hlavici důkladně vytřete čistícím hadříkem.

POZNÁMKA: Příliš velké množství gelu nebo séra by mohlo způsobit šupinky na pokožce. Proto není vhodné použít na jednu aplikaci více jak 1-2 stlačení kyseliny hyaluronové ve formě gelu nebo séra.

Režim EMS - zpevňující lifting a anti-aging

V tomto režimu přístroj využívá technologii EMS pro zpevnění pleti a zvýšení produkce kolagenu. EMS je terapie mikroproudy s nízkými frekvencemi, která dokáže imitovat pocit reálné masáže, poklepávání, akupunktury, či baňkování. Je velmi efektivní na vyčištění kanálů, posílení životní energie, jakož i pro zvýšení krevního oběhu v oblasti aplikace.

Tato mikroproudová terapie stimuluje (dráždí) svaly pomocí elektrického proudu s nízkými frekvencemi a vyvolává jejich nucenou kontrakci. Nazývá se to i pasivní pohyb.

Technologie EMS aktivuje buňky na povrchu, ale i ve vnitřních vrstvách pokožky, výrazně stimuluje tvorbu kolagenu, zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky a zanechává pokožku hebkou a svěží.

Přístroj je vybaven rollerem ve tvaru diamantu, který perfektně "sedne", na pokožku a poskytne vám velmi dobrý pocit z ošetření vaší pleti.



1. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyaluronové gelu nebo séra (1-2 stlačení aplikátoru). Nepoužívejte tampónek. V případě potřeby (pocit suché pleti) naneste malé množství vody, nebo vodivého gelu Beauty Biowave. Jelikož aplikovaný kosmetický přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový krém, ani fluid.
2. Přepněte přístroj do režimu EMS.
3. Umístěte roller kolmo na pokožku a jemnými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavicí po celé tváři po dobu 6 minut a soustřeďte se hlavně na oblasti výskytu vrásek a ochablé pleti. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní hlavice lehce klouže.
4. Po 6 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne.
5. Hlavici důkladně vytřete čistícím hadříkem.

Jak často přístroj používat?

Doporučujeme pravidelné ošetření pleti 2x až 3x týdně, každý z režimů.

Doporučené přípravky

Čistící přípravky:

- Wellmaxx Skineffect - čistící pěna nebo tonikum
- Wellmaxx Hyauron5 Facewash - čistící tonikum nebo čistící gel

Hyaluronové preparáty:

- Devee Hyaluron gel superkoncentrát - obsahuje 3 druhy kyseliny hyaluronové
- Devee Hyaluron sérum - obsahuje 4 druhy kyseliny hyaluronové
- Wellmaxx Hyaluron Collagen booster
- Wellmaxx Skineffect super hyaluron ampulky
- Beauty Biowave ultrazvukový vodivý gel (speciální vodivý gel pro žehličky)

Parametry a technické údaje:

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí: | 3,7 V |
| Jmenovitý proud: | 100 mA až 400 mA (ultrazvuk) 200 mA až 2 800 mA (RF) 8 mA až 30 mA (EMS) |
| Ultrazvuk (frekvence): | 3 MHz ($\pm 10\%$) |
| Doba nabíjení: | přibližně 3 hodiny |
| Časovač: | SONIC - 3 minuty RF - 5 minut EMS - 6 minut |

Tento kosmetický přístroj je elektrické zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a designové úpravy.

Informace o životním prostředí

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních komponentů a materiálů. Na konci své životnosti výrobek nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale předejte na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pomozte chránit životní prostředí recyklací použitých výrobků.

Čištění


Po použití otřete přístroj navlhčeným hadříkem. Následně přístroj důkladně osušte suchým hadříkem. Nikdy neotírejte magnetický kruh alkoholem, ani čisticími prostředky. Neponořujte přístroj do vody, ani ho neumísťujte pod proud vody.

Skladování

Skladujte přístroj na místě s konstantní vlhkostí a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. Skladujte mimo dosah dětí. Přístroj je určen pro dospělého uživatele, který důkladně porozuměl návodu k použití. Přístroj je elektrické zařízení.

Často kladené otázky a řešení problémů:

| Problém: | Možná příčina: | Řešení problému: |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj se nezapnul. | <ol style="list-style-type: none">1. Příliš nízká zbývajcí kapacita baterie.2. Neznáma porucha. | <ol style="list-style-type: none">1. Vyzkoušejte zapnout přístroj po 3 hodinách nabíjení.2. Pokud se přístroj nezapne, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. |
| Přístroj nefunguje ani po dlouhém nabíjení. | <ol style="list-style-type: none">1. USB kabel není správně zasunut do nabíjecího konektoru nebo adaptér není správně zapojen v elektrické síti.2. Přístroj se dostatečně nenabil.3. Baterie je na konci své životnosti. | <ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda se přístroj správně nabíjí. Blikající kontrolky symbolizují nabíjení.2. Pokud se přístroj nezapne, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. |
| Nedokážu rozeznat, zda přístroj pracuje v čistícím nebo hydratačním režimu. | <ul style="list-style-type: none">• Lidské ucho není schopno detekovat ultrazvukové vlny, ani mikroproudy. | <ul style="list-style-type: none">• V čistícím nebo hydratačním režimu kápněte pár kapek vody na hlavici přístroje a spatříte, jak začnou kapky vody vibrovat. |
| V režimu EMS nepocítuji žádný účinek. | <ol style="list-style-type: none">1. Nedotýkáte se dotykové plochy (mikroproudového senzoru) navlhčenými prsty.2. Příliš nízká zbývajcí kapacita baterie.3. Poškození přístroje. | <ol style="list-style-type: none">1. Navlhčete si ruce, stiskněte prsty dotykové plochy (senzor) a roller přiložte na pokožku.2. Nabíjejte přístroj 3 hodiny a znovu vyzkoušejte.3. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. |
| Teplota přístroje je příliš vysoká. | <ol style="list-style-type: none">1. Přístroj používáte příliš dlouho.2. Do přístroje mohla vniknout voda.3. Poškození přístroje. | <ol style="list-style-type: none">1. Vypněte přístroj a znovu jej vyzkoušejte o 30 minut.2. Nevystavujte přístroj kontaktu s vodou.3. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. |



Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:
www.hyaluron.sk/video

Importér:

Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: 0907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*