


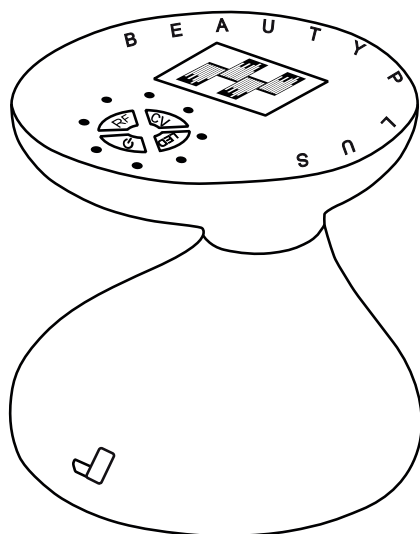

PRÍSTROJ NA FORMOVANIE POSTAVY
PŘÍSTROJ NA FORMOVÁNÍ POSTAVY

BEAUTY PLUS 3D RF

NÁVOD NA POUŽITIE

Beauty®
Biowave

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, odporúčame si prečítať návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať, a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

BALENIE OBSAHUJE: Zariadenie, USB kábel, návod na použitie, ochranný obal.

Bezpečnostné upozornenia

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou a nepoužívajte ho pod vodou.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Napájací ani nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Pred nabíjaním odstráňte zo zariadenia všetok gél, alebo nečistoty.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. Prístroj používajte a nabíjajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi. Pred použitím ho odpojte od napájania.
- Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne predmety.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospelé osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Nenechajte deti hrať sa prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmi a koncentrátmi.
- Ak máte alergiu na kovy, prístroj nepoužívajte.
- Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, ale rovnomerne po celej ploche.
- Nepoužívajte prístroj počas nabíjania, po páde na zem, ak došlo k jeho poškodeniu.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.

UPOZORNENIE: Prístroj za žiadnych okolností nerozoberajte a používajte ho výhradne v súlade s dodaným návodom na použitie. Rozobratie prístroja, prípadne jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.

Kontraindikácie

- Tehotenstvo, dojčenie, menštruácia
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Migrény, chronické bolesti hlavy, závraty
- Rakovina/nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
- Horúčkovité stavy a zápaly, akútna infekcia alebo zápal (napr. akné, ružienka, psoriáza)
- Bakteriálne infekcie kože, akútne herpetické infekcie
- Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- Oblasti tela so závažnými poruchami krvného obehu
- Nedostatočný krvný obeh
- Ischemická choroba srdca
- Srdcová arytmia, ochorenia krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenie
- Cievne choroby končatín (trombóza, flebitída)
- Poruchy koagulácie (zrážania krvi),
- Poškodená a popraskaná pokožka, alergia na elektromagnetické vlnenie, tetovanie
- Pokožka spálená zo slnka pred menej ako mesiacom
- Akútne reumatické ochorenie
- Oslabený imunitný systém, auto imunitné ochorenie




Oblasti tela, ktoré by ste nemali ošetrovať ultrazvukom a RF vlnami

- Miecha a chrbtica
- Očné bulvy, očné viečka, pery
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospievajúcich
- Oblasť pohlavných žliaz
- Oblasť štítnej žľazy
- Oblasti tváre, operované pred menej ako mesiacom
- Okolie očí, úst a oblastí, kde bol vykonaný kozmetický (napr. skrášľujúci) zákrok
- Režim RF a CV sa nesmie používať na tvár a hlavu.

Funkcie kozmetického prístroja

- **LED** - fotónová terapia - červené a modré svetlo
- **RF** - Rádiofrekvenčné vlny
- **CV** - Ultrazvuková terapia (kavitácia)

Popis produktu

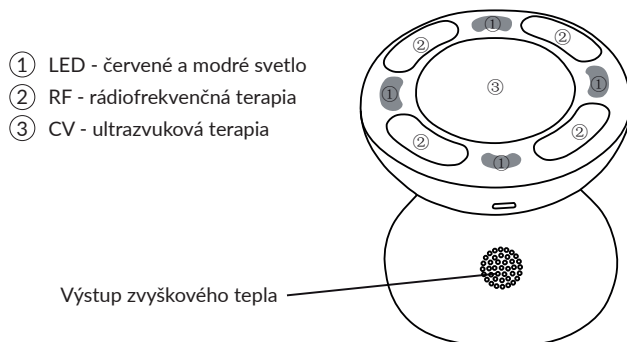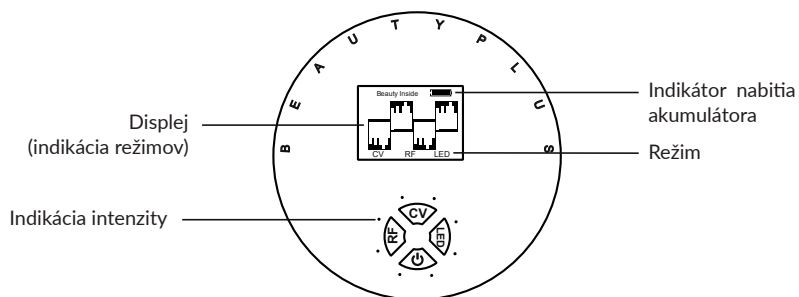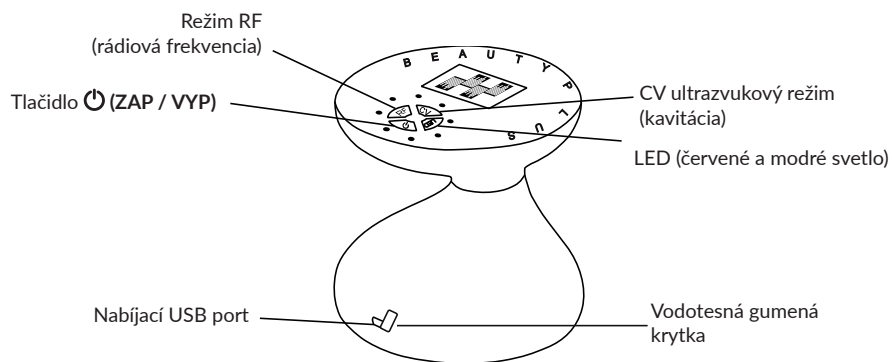

Ovládacie tlačidlá


Tlačidlo:	Funkcia:	Indikácia:
	Zapnuté Vypnuté	Modré indikátory svietia Modré indikátory nesvietia
	Dve úrovne	Modrý RF indikátor svieti (1 alebo 2 indikátory)
	Dve úrovne	Modrý CV indikátor svieti (1 alebo 2 indikátory)
	Zapnite režim fotónovej terapie	Dva modré LED indikátory svietia

Nastavenie intenzity režimu

V režime **rádiofrekvenčnej (RF) terapie** môžete nastaviť dve úrovne intenzity:

Stlačte tlačidlo RF a rozsvieti sa jeden modrý indikátor RF. Je nastavená intenzita 1.


Opakovane stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity 2. Rozsvieti sa aj druhý indikátor.

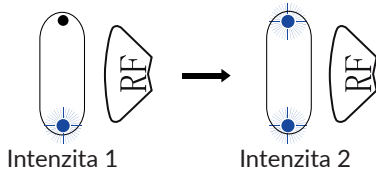

V režime **ultrazvukovej (CV) terapie** môžete nastaviť dve úrovne intenzity:


Stlačte tlačidlo CV a rozsvieti sa jeden modrý indikátor CV. Je nastavená intenzita 1.

Opakovane stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity 2. Rozsvieti sa aj druhý indikátor.

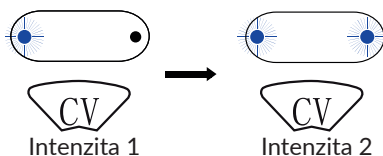

LED terapia - červené a modré svetlo:

Stlačte tlačidlo LED a obidva indikátory sa rozsvietia.

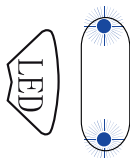

Režimy a funkcie

Prístroj na formovanie postavy 3D RF využíva inovovanú vysokofrekvenčnú technológiu BTL (ultrazvuk + RF) v kombinácii s červeným a modrým svetlom. Prístroj je určený na formovanie a zoštíhlenie postavy, napnutie pokožky a elimináciu jemných vrások.

Prístroj má tri hlavné režimy, pričom LED svetlo je možné kombinovať s ktorýmkoľvek z dvoch ďalších režimov.

3 režimy - použitie

RF - Rádiofrekvenčná terapia

Vysokofrekvenčné rádiové vlny s frekvenciou 100 kHz/min slúžia na napnutie pokožky, redukciu celulitídy a elimináciu jemných vrások.

CV - ultrazvuková terapia

Ultrazvuková terapia s frekvenciou 1 MHz je často využívaná aj v profesionálnych zariadeniach na chudnutie. Vysokofrekvenčné vibrácie spôsobené ultrazvukovou terapiou umožňujú výrazne redukovať celulitídu aj hlboko pod pokožkou, redukujú nepoddajný tuk, čím pomáhajú znižovať hmotnosť a formovať postavu.

LED - červené a modré svetlo

Červené a modré svetlo sú vysoko intenzívne studené svetlá. Zlepšujú stav pokožky, zjemňujú ju a pomáhajú znovu získať mladistvý a vitálny vzhľad vašej pokožky.


Funkcia automatického vypnutia

Predvolené nastavenie trvania je 10 minút pre každý režim. Po uplynutí tohto času sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Pohotovostný režim trvá 2 minúty. Po uplynutí týchto 2 minút sa prístroj automaticky vypne. Časovač automatického vypnutia zabezpečuje, aby ste sa vyhli nadmernému použitiu prístroja. Bráni tiež trvalému zapnutiu prístroja v prípade, že by ste prístroj zabudli vypnúť.

Ako zariadenie nabíjať

USB kábel zapojte do zariadenia. Kábel následne pripojte k vhodnému sieťovému adaptéru. Ak indikátor nabitia batérie na LED displeji signalizuje, že je batéria prístroja úplne nabitá, odpojte sieťový adaptér od siete a vytiahnite USB kábel z prístroja.


Prístroj používajte len keď je dostatočne nabitý. Pred prvým použitím alebo ak ste prístroj dlhšiu dobu nepoužívali, prístroj úplne nabite.

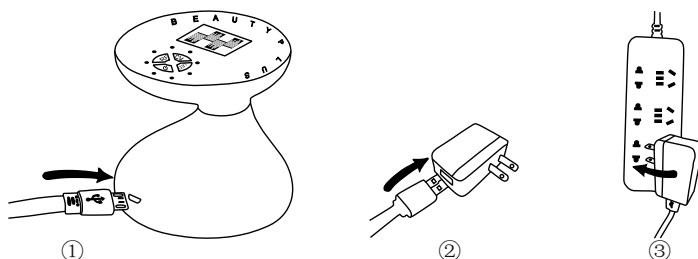

Test znášanlivosti pokožky (pred použitím)

Pred prvým použitím vyskúšajte, či je použitie prístroja vhodné pre vašu pokožku.

- ① Presvedčte sa, že vnútorná strana ramena je suchá a čistá.
- ② Na vnútornú stranu ruky naneste vodivý gél. Aktivujte RF režim a používajte ho cca 3 minúty. Následne aktivujte CV režim a používajte tiež cca 3 minúty. Počas jednotlivých režimov prístroj pomaly a plynulo posúvajte po pokožke. Ak sa ani po uplynutí 24 hodín neobjaví erytém, začervenanie alebo iné negatívne reakcie pokožky, môžete prístroj bez obáv používať. Počas testovania použite nastavenie režimov na intenzitu 1.

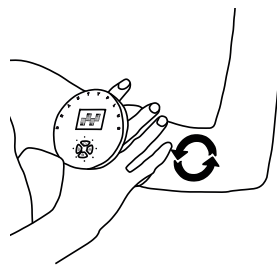

UPOZORNENIE!

- Ak sa pri testovaní znášanlivosti objaví na pokožke vyrážka, svrbenie alebo podráždenie, testovanie okamžite ukončite.
- Ak máte počas testovania akýkoľvek nezvyčajný pocit, testovanie okamžite ukončite.

Ako používať jednotlivé režimy

Pred každým použitím prístroja aplikujte na vašu pokožku vodivý gél.

Pri používaní udržiavajte pokožku dostatočne vlhkú.



Tlačidlo	Funkcia	Oblasť ošetrovania	Počet opakovaní
	Redukcia celulitídy	Použiť na zvolenú oblasť tela	2-3x každú oblasť po dobu 10 minút
	Formovanie postavy a redukcia hmotnosti	Použiť na zvolenú oblasť tela	
	Starostlivosť o pokožku	Použiť na zvolenú oblasť tela a tváre	

UPOZORNENIE!

- Pri používaní režimov RF a CV prístroj plynule posúvajte po povrchu pokožky a nedržte ho na jednom mieste. Dlhšie používanie prístroja na jednom mieste môže poškodiť vašu pokožku, preto so zariadením kontinuálne krúžte po pokožke.

Používanie prístroja na pokožke

Uistite sa, že kontaktné plochy zariadenia sa celým povrchom dotýkajú vašej pokožky tak, ako je to vyobrazené na obrázku nižšie (vľavo).

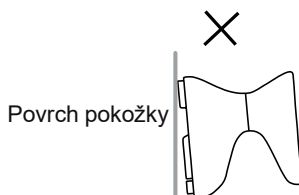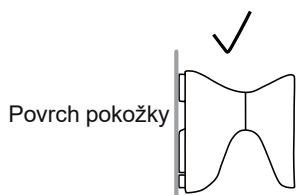

Ako prístroj používať na jednotlivé časti tela

Stlačením tlačidla  (ZAP / VYP) prístroj zapnite. Zvoľte jeden z režimov (RF alebo CV). Ktorýkoľvek z režimov RF alebo CV je veľmi vhodné skombinovať s LED režimom. Pri používaní režimov RF alebo CV dbajte na to, aby sa kontaktné plochy zariadenia celým povrchom dotýkali vašej pokožky. Pred použitím prístroja naneste na ošetrovanú oblasť pokožky vodivý gél.




Zóna začiatku ošetrovania
pre RF alebo CV terapiu



Smer pohybu prístroja


Ruky (5 minút každá):

- ① Ruku zdvihnite pred seba a celú ju vystrite.
- ② Posúvajte prístroj od lakťa až k podpažšiu.
- ③ Rovnaký postup zopakujte aj pre druhú ruku.

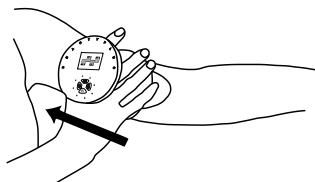



Stehná (5 minút každé stehno)

- ① Na vnútornej strane stehna presúvajte prístroj od kolena až k vrchnej strane stehna.
- ② Na vonkajšej strane stehna presúvajte prístroj od kolena až k vrchnej strane stehna.
- ③ Rovnaký postup zopakujte aj pre druhé stehno.

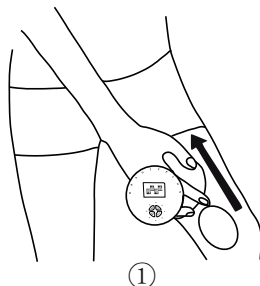



Brucho (5 minút krok 1, následne 5 minút krok 2 + 3)

- ① Pohybujte prístrojom z vonkajšej časti brucha smerom k vnútornej strane v smere písmena Z. Prístroj pomaly presúvajte od pásu smerom k pupku.
- ② Prístroj pomaly presúvajte od pásu smerom k vrchnej strane stehna.
- ③ Vykonávajte pomalé krúživé pohyby v pupočnej oblasti.

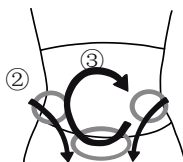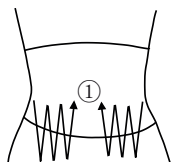

Zadok (5 minút krok 1, následne 5 minút krok 2 + 3)

- ① Pohybujte prístrojom z vnútornej časti zadku smerom k vonkajšej časti v smere písmena Z.
- ② Pohybujte prístrojom od vnútorných častí smerom k vonkajším.
- ③ Pohybujte prístrojom zhora nadol.

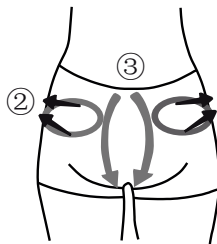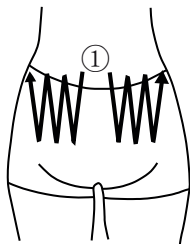

Tvár (5 až 10 minút)

Prístroj môžete použiť aj na ošetrovanie pokožky vašej tváre a elimináciu jemných mimických vrások. Pri ošetrovaní tváre používajte výhradne **režim fotónovej terapie** a nekombinujte ho so žiadnym ďalším režimom.

Ak pri ošetrovaní vašej tváre pomocou režimu fotónovej terapie použijete vodivý gél, hyaluronový gél alebo kvalitný krém, môžete sa prístrojom dotýkať pokožky.

Ak žiaden prípravok (gél alebo krém) nepoužijete, vedzte prístroj tesne nad povrchom pokožky vašej tváre - nedotýkajte sa jej.

Červené LED svetlo napomáha eliminácii jemných vrások, modré LED svetlo má výrazné dezinfekčné účinky a je veľmi nápomocné napríklad pri problémoch s akné.

- ① Prepnite prístroj do režimu fotónovej terapie
- ② Pohybujte prístrojom po vašej tvári v smere šípkov - viď obrázok nižšie.



Čistenie zariadenia

Aby ste predišli poruche prístroja, po každom použití očistite povrch elektród mäkkou čistou handričkou. Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania.

Môžete použiť čistiacu špongiu alebo mäkkú handričku namočenú jemnom roztoku neutrálneho čistiaceho prostriedku.

Na čistenie nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky, riedidlo, benzín ani odstraňovač laku na nechty.

Údržba zariadenia

- Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, pred uskladnením ho dôkladne vyčistite.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a odpojte od napájania.
- Neumiestňujte zariadenie do prostredia s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo priamym slnečným žiarením.
- Zariadenie skladujte mimo dosahu detí.

Najčastejšie problémy a ich riešenie

Problém	Riešenie
Kedy je najvhodnejší čas na použitie prístroja?	Prístroj je odporúčané používať najmä po kúpeli, keď je vaša pokožka nahriata.
Je prístroj vhodný aj pre citlivú pleť?	Vykonajte prosím test znášanlivosti. Ak sa nevyskytnú žiadne nežiaduce účinky, môžete zariadenie používať.
Aký typ kozmetického prípravku by som mal použiť?	Je vhodné použiť vodivý gél.

Riešenie problémov

V nasledujúcej tabuľke nájdete riešenie najčastejších problémov.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Nestlačili ste tlačidlo  (ZAP / VYP).	Stlačte tlačidlo  (ZAP / VYP).
	Batéria je vybitá.	Úplne nabite zariadenie a následne ho zapnite.
Prístroj funguje veľmi krátko.	Takmer vybitá batéria.	Úplne nabite zariadenie.
	Nastavenie časovača.	Znova zapnite zariadenie.
Prístroj nie je možné nabiť.	Nabíjací USB kábel nie je dôkladne zasunutý.	USB kábel dôkladne pripojte do nabíjacieho konektora.
	Zariadenie je plne nabité.	Indikátor nabitia akumulátora signalizuje, že akumulátor prístroja je plne nabitý.
Necítim účinok v režime RF.	Oblasť ošetrovania pokožky nie je dostatočne vlhká (je príliš suchá).	Aplikujte vhodný kozmetický prípravok (napr. vodivý gél).
	Úroveň intenzity je príliš nízka.	Nastavte intenzitu na vyššiu úroveň.
	Prístrojom pohybuje príliš rýchlo.	Odporúčaná rýchlosť pohybu prístroja je približne 2-5 cm/s.
	Kontaktné plochy sa nedotýkajú pokožky celou plochou.	Zabezpečte, aby sa kontaktné plochy celou plochou dotýkali pokožky.
V režime RF je prístroj príliš horúci.	V jednej oblasti používate prístroj príliš dlho.	Odporúčaná rýchlosť pohybu prístroja je približne 2-5 cm/s.
	Kontaktné plochy sa nedotýkajú pokožky celou plochou.	Zabezpečte, aby sa kontaktné plochy celou plochou dotýkali pokožky.
	Úroveň intenzity je príliš vysoká.	Nastavte intenzitu na nižší stupeň.
Nie je cítiť ultrazvukové vibrácie.	Ultrazvukové vibrácie nie sú detegovateľné - je to normálne.	
Zariadenie vydáva počas používania šum.	Tento šum je spôsobený ultrazvukovými vibráciami.	

NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

Děkujeme za vaši důvěru, projevenou zakoupením našeho produktu. Přejeme vám příjemné používání tohoto kosmetického přístroje a spoustu radosti a spokojenosti z dosažených výsledků.

DŮLEŽITÉ: Abyste se z kosmetického přístroje mohli těšit po dlouhou dobu, doporučujeme si přečíst návod k použití dříve, než začnete přístroj používat. Návod uschovejte pro pozdější použití.

BALENÍ OBSAHUJE:

Kosmetický přístroj, USB kabel, návod k použití.

Bezpečnostní upozornění

- Nenamáčejte přístroj do vody, ani do jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí, nepoužívejte jej pod vodou.
- Před použitím odpojte přístroj od nabíjecího kabelu.
- Napájecí ani nabíjecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí. Nevystavujte je působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen nabíjecí / napájecí kabel, nebo přístroj samotný.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně očistěte suchým hadříkem.
- Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určen. Přístroj používejte a nabíjejte pouze s originálním příslušenstvím a díly. Před použitím jej odpojte od napájení.
- Do otvorů přístroje ani USB kabelu nevstoukejte žádné předměty.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí. Je-li přístroj poškozen, nepoužívejte jej.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Výše uvedené osoby mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použití.
- Nenechte děti hrát si přístrojem, ani bez dozoru provádět jeho čištění a údržbu.
- Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyaluronovými gely a koncentráty.
- Máte-li alergii na kovy, přístroj nepoužívejte.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celém obličejí.
- Nepoužívejte přístroj během nabíjení, po pádu na zem, došlo-li k jeho poškození.
- Po zakoupení přístroje zkontrolujte přístroj, zda se nepoškodil během přepravy.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj za žádných okolností nerozebírejte a používejte jej výhradně v souladu s dodaným návodem k použití. Rozebrání přístroje, případně jeho nesprávné použití znamená ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody.

Kontraindikace

- Těhotenství, kojení, menstruace
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Migrény, chronické bolesti hlavy, závratě
- Rakovina/nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
- Horečné stavy a záněty, akutní infekce nebo zánět (např. akné, růžovka, psoriáza)
- Bakteriální infekce kůže, akutní herpetické infekce
- Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
- Oblasti těla se závažnými poruchami krevního oběhu
- Nedostatečný krevní oběh
- Ischemická choroba srdeční
- Srdeční arytmie, onemocnění krve, cévního systému nebo jiné interní onemocnění
- Cévní choroby končetin (trombóza, flebitida)
- Poruchy koagulace (srážení krve),
- Poškozená a popraskaná pokožka, alergie na elektromagnetické vlnění, tetování
- Pokožka spálená ze slunce před méně než měsícem
- Akutní revmatické onemocnění
- Oslabený imunitní systém, auto imunitní onemocnění



Oblasti těla, které byste neměli ošetřovat ultrazvukem a RF vlnami

- Mícha a páteř
- Oční bulvy, oční víčka, rty
- Zóny intenzivního růstu u dětí a dospívajících
- Oblast pohlavních žláz
- Oblast štítné žlázy
- Oblasti obličeje, operované před méně než měsícem
- Okolí očí, úst a oblastí, kde byl proveden kosmetický (např. zkrášlující) zákrok
- Režim RF a CV se nesmí používat na tvář a hlavu.


Funkce kosmetického přístroje

- **LED** - fotonová terapie - červené a modré světlo
- **RF** - radiofrekvenční vlny
- **CV** - ultrazvuková terapie (kavitace)

Popis produktu

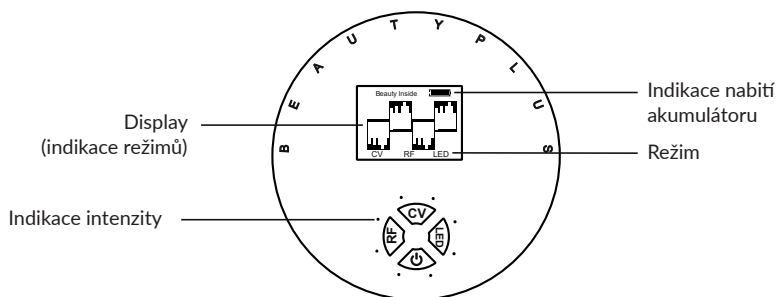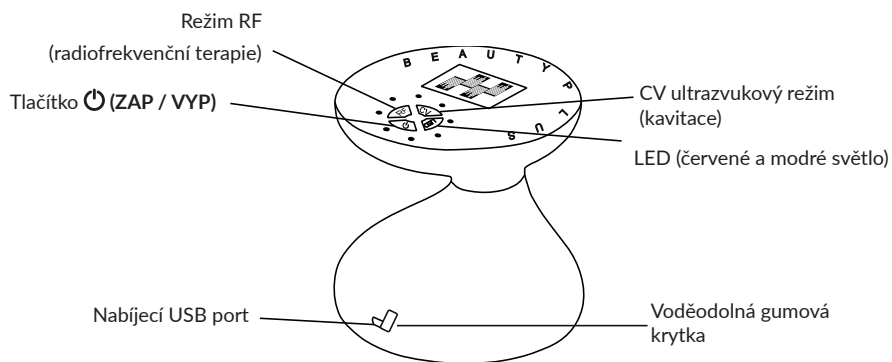

- ① LED - červené a modré světlo
- ② RF - radiofrekvenční terapie
- ③ CV - ultrazvuková terapie

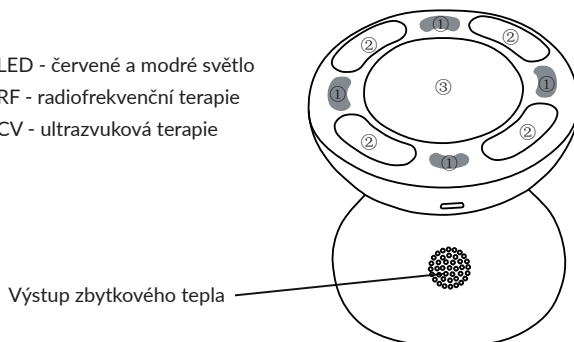

Ovládací tlačítka


Tlačítko:	Funkce:	Indikace:
	Zapnuto Vypnuto	Modré indikátory svítí Modré indikátory nesvítí
	Dvě úrovně	Modrý RF indikátor svítí (1 nebo 2 indikátory)
	Dvě úrovně	Modrý CV indikátor svítí (1 nebo 2 indikátory)
	Zapněte režim fotonové terapie	Dva modré LED indikátory svítí

Nastavení intenzity režimu

V režimu **radiofrekvenční (RF) terapie** můžete nastavit dvě úrovně intenzity:

Stlačte tlačítko RF a rozsvítí se jeden modrý indikátor RF. Je nastavená intenzita 1.


Opakovaně stlačte tlačítko pro nastavení intenzity 2. Rozsvítí se i druhý indikátor.

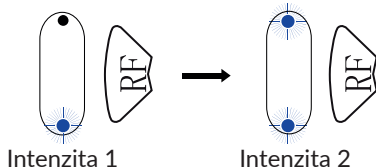

V režimu **ultrazvukové (CV) terapie** můžete nastavit dvě úrovně intenzity:


Stlačte tlačítko CV a rozsvítí se jeden modrý indikátor RF. Je nastavená intenzita 1.

Opakovaně stlačte tlačítko pro nastavení intenzity 2. Rozsvítí se i druhý indikátor.

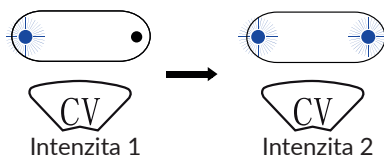

LED terapie - červené a modré světlo:

Stlačte tlačítko LED a oba indikátory se rozsvítí.

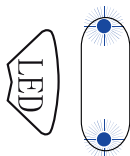

Režimy a funkce

Přístroj na formování postavy 3D RF využívá inovativní vysokofrekvenční technologii BTL (ultrazvuk + RF) v kombinaci s červeným a modrým světlem. Přístroj je určen na formování a zeštíhlení postavy, vypnutí pokožky a eliminaci jemných vrásek.

Přístroj má tři hlavní režimy, přičemž LED světlo je možné kombinovat s kterýmkoli z dvou dalších režimů.

3 režimy - použití

RF - Radiofrekvenční terapie

Vysokofrekvenční rádiové vlny s frekvencí 100 kHz/min slouží na vypnutí pokožky, redukci celulitidy a eliminaci jemných vrásek.

CV - ultrazvuková terapie

Ultrazvuková terapie s frekvencí 1 MHz je často využívána aj v profesionálních přístrojích na hubnutí. Vysokofrekvenční vibrace způsobené ultrazvukovou terapií umožňují výrazně redukovat celulitidu i hluboko pod pokožkou, redukují nepoddajný tuk, čím pomáhají snižovat hmotnost a formovat postavu.

LED - červené a modré světlo

Červené a modré světlo jsou vysoko intenzivní studená světla. Zlepšují stav pokožky, zjemňují ji a napomáhají znovu získat mladistvý a vitální vzhled vaší pokožky.


Funkce automatického vypnutí

Předvolené nastavení trvání je 10 minut pro každý režim. Po uplynutí tohoto času se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim trvá 2 minuty. Po uplynutí 2 minut se přístroj automaticky vypne. Časovač automatického vypnutí zabezpečuje, abyste se vyhnuli nadměrnému použití přístroje. Brání taktéž trvalému zapnutí přístroje v případě, že byste přístroj zapomněli vypnout.

Jak přístroj nabíjet

USB kabel zapojte do přístroje. Kabel následně připojte k vhodnému síťovému adaptéru. Když indikátor nabití baterie signalizuje, že je baterie přístroje plně nabitá, odpojte síťový adaptér od sítě a odpojte také USB kabel od přístroje.


Přístroj používejte, pouze když je dostatečně nabitý. Před prvním použitím, nebo pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, přístroj zcela nabijte.

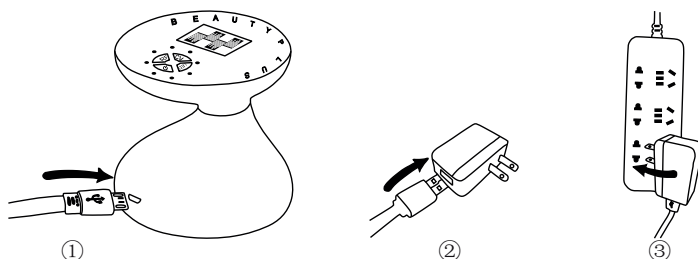

Test snášenlivosti pokožky (před použitím)

Před prvním použitím vyzkoušejte, jestli je použití přístroje vhodné pro vaši pokožku.

- ① Vnitřní strana ramena musí být suchá a čistá.
- ② Na vnitřní stranu ruky naneste vodivý gel.
Aktivujte RF režim a používejte ho cca 3 minuty.
Následně aktivujte CV režim a používejte cca 3 minuty.
Během používání pomalu a plynule posouvejte po pokožce.
Pokud se ani po uplynutí 24 hodin neobjeví erytém, zarudnutí nebo jiné negativní reakce pokožky, můžete přístroj bez obav používat.
Během testování použijte nastavení režimů na intenzitu 1.

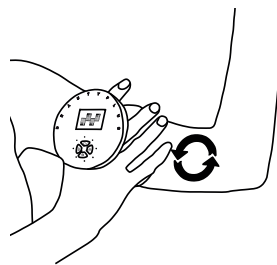

UPOZORNĚNÍ!

- Pokud se při testování snášenlivosti objeví na pokožce vyrážka, svědění nebo podráždění, testování okamžitě ukončete.
- Pokud máte během testování jakýkoli neobvyklý pocit, testování okamžitě ukončete.

Jak používat jednotlivé režimy

Před každým použitím přístroje aplikujte na vaši pokožku vodivý gel.

Při používání udržujte pokožku dostatečně vlhkou.


Tlačítko	Funkce	Oblast ošetření	Počet opakování
	Redukce celulitidy	Použít na zvolenou oblast těla	2-3x každou oblast po dobu 10 minut
	Formování postavy a redukce hmotnosti	Použít na zvolenou oblast těla	
	Starostlivost o pokožku	Použít na zvolenou oblast těla a tváře	

UPOZORNĚNÍ!

- Při používání režimů RF a CV přístroj plynule posouvejte po povrchu pokožky a nedržte jej na jednom místě. Delší používání přístroje na jednom místě může poškodit vaši pokožku, proto se zařízením kontinuálně kroužte po pokožce.

Používání přístroje na pokožce

Ujistěte se, že kontaktní plochy zařízení se celým povrchem dotýkají vaší pokožky tak, jak je vyobrazeno na obrázku níže (vlevo).

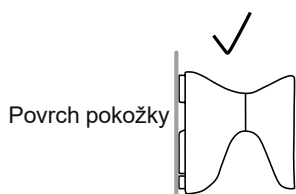

Jak přístroj používat na jednotlivé části těla

Stlačením tlačítka  (ZAP / VYP) přístroj zapněte. Zvolte jeden z režimů (RF nebo CV). Kterýkoli z režimů RF nebo CV je velmi vhodné zkombinovat s LED režimem. Při používání režimů RF nebo CV dbejte na to, aby se kontaktní plochy zařízení celým povrchem dotýkaly vaší pokožky. Před použitím přístroje naneste na ošetřovanou oblast pokožky vodivý gel.




Zóna začátku ošetření
pro RF nebo CV terapii



Směr pohybu přístroje


Ruky (5 minut každá):

- ① Ruku zvedněte před sebe a celou ji vystřete.
- ② Posunujte přístroj od lokte až k podpaží.
- ③ Stejný postup zopakujte i pro druhou ruku.

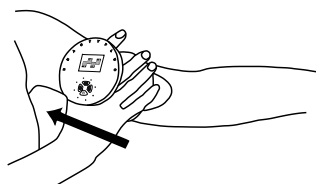



Stehna (5 minut každé stehno)

- ① Na vnitřní straně stehna přesouvejte přístroj od kolena až k vrchní straně stehna.
- ② Na vnější straně stehna přesouvejte přístroj od kolena až k vrchní straně stehna.
- ③ Stejný postup zopakujte i pro druhé stehno.

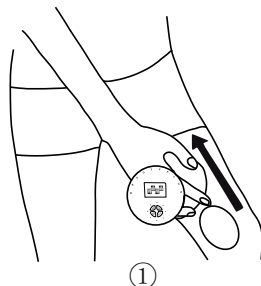



Břicho (5 minut krok 1, následně 5 minut krok 2 + 3)

- ① Pohubujte přístrojem z vnější části břicha směrem k vnitřní straně ve směru písmene Z. Přístroj pomalu přesouvejte od pasu směrem k pupku.
- ② Přístroj pomalu přesouvejte od pasu směrem k vrchní straně stehna.
- ③ Provádějte pomalé krouživé pohyby v pupční oblasti.

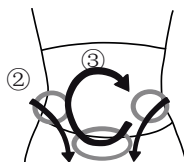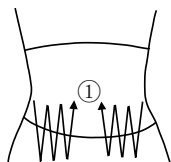

Zadek (5 minut krok 1, následně 5 minut krok 2 + 3)

- ① Pohybuje přístrojem z vnitřní části zadní zadku směrem k vnější části ve směru písmene Z.
- ② Pohybuje přístrojem od vnitřních částí směrem k vnějším.
- ③ Pohybuje přístrojem shora dolů.

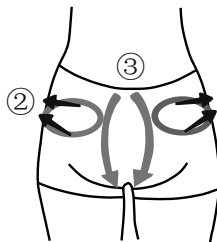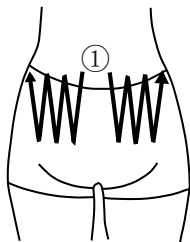

Tvář (5 až 10 minut)

Přístroj můžete použít také k ošetření pokožky vašeho obličeje a eliminaci jemných mimických vrásek. Při ošetřování obličeje používejte výhradně **režim fotonové terapie** a nekombinujte jej s žádným dalším režimem.

Pokud při ošetření vašeho obličeje pomocí režimu fotonové terapie použijete vodivý gel, hyaluronový gel nebo kvalitní krém, můžete se přístrojem dotýkat pokožky.

Pokud žádný přípravek (gel nebo krém) nepoužijete, přístroj těsně nad povrchem pokožky vašeho obličeje - nedotýkejte se jí.

Červené LED světlo napomáhá eliminaci jemných vrásek, modré LED světlo má výrazné dezinfekční účinky a je velmi nápomocné například při problémech s akné.

- ① Přepněte přístroj do režimu fotonové terapie.
- ② Pohybuje přístrojem vaší tváří ve směru šípek - viz obrázek níže.



Čištění přístroje

Abyste předešli poruše přístroje, po každém použití očistíte povrch elektrod měkkým čistým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení.

Můžete použít čistící houbu nebo měkký hadřík namočený jemným roztoku neutrálního čistícího prostředku.

K čištění nepoužívejte alkalické čistící prostředky, ředidlo, benzín ani odstraňovač laku na nehty.

Informace o životním prostředí

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních komponentů a materiálů. Na konci své životnosti výrobek nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale předejte jej na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pomozte chránit životní prostředí recyklací použitých výrobků.

Skladování

Skladujte na místě s konstantní vlhkostí a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. Skladujte mimo dosah dětí. Přístroj je určen pro dospělého uživatele, který důkladně porozuměl návodu k použití.

Nejčastější problémy a jejich řešení

Problém	Řešení
Kdy je nejvhodnější doba pro použití přístroje?	Přístroj je vhodné používat zejména po koupeli, kdy je vaše pokožka nahřátá.
Je přístroj vhodný i pro citlivou pleť?	Provedte prosím test snášenlivosti. Pokud se nevyskytnou žádné nežádoucí účinky, můžete zařízení používat.
Jaký typ kosmetického přípravku bych měla použít?	Je vhodné použít vodivý gel.

Řešení problémů

V následující tabulce naleznete řešení nejčastějších problémů.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj není možné zapnout.	Nestiskli jste tlačítko  (ZAP / VYP).	Stlačte tlačítko  (ZAP / VYP).
	Baterie je vybitá.	Úplně nabijte přístroj a následně jej zapněte.
Přístroj funguje velmi krátce.	Téměř vybitá baterie.	Úplně nabijte přístroj.
	Nastavení časovače.	Znova zapněte přístroj.
Přístroj nelze nabít.	Nabíjecí USB kabel není důkladně zasunutý.	USB kabel důkladně připojte do nabíjecího konektoru.
	Zařízení je plně nabité.	Indikátor nabití akumulátoru signalizuje, že akumulátor přístroje je plně nabitý.
Necítím účinek v režimu RF.	Oblast ošetření pokožky ne je dostatečně vlhká (je příliš suchá).	Aplikujte vhodný kosmetický přípravek (např. vodivý gel).
	Úroveň intenzity je příliš nízká.	Nastavte intenzitu na vyšší úroveň.
	Přístrojem pohybujete příliš rychle.	Doporučená rychlost pohybu přístroje je přibližně 2-5 cm/s.
	Kontaktní plochy se nedotýkají pokožky celou plochou.	Zajistěte, aby se kontaktní plochy celou plochou dotýkaly pokožky.
V režimu RF je přístroj příliš horký.	V jedné oblasti používáte přístroj příliš dlouho.	Doporučená rychlost pohybu přístroje je přibližně 2-5 cm/s.
	Kontaktní plochy se nedotýkají pokožky celou plochou.	Zajistěte, aby se kontaktní plochy celou plochou dotýkaly pokožky.
	Úroveň intenzity je příliš vysoká.	Nastavte intenzitu na nižší stupeň.
Není cítit ultrazvukové vibrace.	Ultrazvukové vibrace nejsou detekovatelné – je to normální.	
Přístroj vydává během používání šum.	Tento šum je způsoben ultrazvukovými vibracemi.	

Parametry a technické údaje (CZ):

Jmenovité napětí:	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (síťový adaptér) DC 15 V (přístroj)
Rozměry:	85,8 mm x 85,8 mm x 85 mm (d x š x v)
Hmotnost:	270 g (pouze přístroj)
Ultrazvuk (frekvence):	1 MHz
Fotónová terapie:	625 nm (červené LED světlo) 465 nm (modré LED světlo)
Príkon:	10 W (max)
Čas nabíjení:	Cca 2 hodiny

Parametre a technické údaje (SK):

Menovité napätie:	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (sieťový adaptér) DC 15 V (prístroj)
Rozmery:	85,8 mm x 85,8 mm x 85 mm (d x š x v)
Hmotnosť:	270 g (iba zariadenie)
Ultrazvuk (frekvencia):	1 MHz
Fotónová terapia:	625 nm (červené LED svetlo) 465 nm (modré LED svetlo)
Príkon:	10 W (max)
Čas nabíjania:	Približne 2 hodiny

Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:
www.hyaluron.sk/video

Importér:

Yalong Trade s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: +421 907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*