

LIFT mee



SKIN OPTIMIZER

MULTIFUNKČNÝ KOZMETICKÝ PRÍSTROJ

NÁVOD NA POUŽITIE

LiFT
mee

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosť a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.



Dôležité: Pred použitím si prečítajte návod na použitie! Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 5001015

Menovité napätie: 5 V DC, 1 A (zariadenie)

Menovitý prúd: 500 mAh

Menovitý výkon: 3.5 W max.

Napájanie: lítium – polymérová batéria (vstavaná, nevymeniteľná)

Pripojenie nabíjačky: Micro USB

Spotreba energie: 2.0 W

Doba nabíjania: približne 2 hod.

Výdrž batérie: približne 1,5 hod.

Materiál: plast (ABS)

Rozmery: 165 x 42 x 42 mm

Hmotnosť: 129 g

Hluk index: jemný: 60 kPa $\pm$ 3 kPa, normálny: 62 kPa $\pm$ 3 kPa silný: 64 kPa $\pm$ 3 kPa

FUNKCIE KOZMETICKÉHO PRÍSTROJA

Vákuová technológia čistenia pokožky.

BALENIE OBSAHUJE

1. Prístroj
2. USB kábel na nabíjanie
3. Nástavce 3x
4. Špongia 21x

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Inovatívna vákuová technológia pre optimalizáciu pleti vám poskytne nielen žiarivejšiu pleť odstránením škvŕn, šupiniek a zvyškov make-upu, ale tiež vašu pokožku osvieži a zabezpečí jej rovnomernejší vzhľad a stimuluje krvný obeh. Prístroj optimalizuje prísun kyslíka do vašich kožných buniek a zaisťuje tak revitalizáciu a rozžiarenie pleti. Ďalším pozitívnym účinkom prístroja je zvýšená absorpcia produktov proti starnutiu, ako sú koncentráty alebo séra, ktoré môžu ľahšie preniknúť do hlbších vrstiev pokožky. Pravidelné používanie vám prinesie trvale čistejší vzhľad pokožky a jemnejšiu pokožku na dotyk.

Výhody v skratke:

- čistá pokožka a revitalizovaná pokožka
- inovatívna vákuová technológia
- efektívne odstránenie škvŕn + masážny efekt
- lepšie vstrebávanie anti-aging účinných látok
- intuitívne ovládanie
- žiadne káble

SYMBOLY

	Označenie CE potvrdzuje súlad produktu s rozhodujúcimi smernicami EÚ a s jeho technickými špecifikáciami.
	NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
	VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
	POZOR! Nesprávnym používaním hrozia materiálne škody.

ÚČEL URČENIA

Kozmetický prístroj je určený na čistenie a vyhladenie pokožky tváre v pohodlí domova.

Kozmetický prístroj je určený iba na kozmetické účely.

Kozmetický prístroj sa môže používať len na zdravú pokožku.

Kozmetický prístroj je určený iba na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné použitie.

Kozmetický prístroj používajte presne podľa návodu na použitie na účel na ktorý je tento kozmetický prístroj určený. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže prístroj poškodiť alebo dokonca spôsobiť zranenie. Tento prístroj nie je hračka. Výrobca ani predajca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Návod na použitie vychádza z noriem, ktoré sú platné v Európskej únii.



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Nenamáčajte prístroj, ani jeho príslušenstvo do vody, ani do iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prístroj v exteriéry, alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Napájací ani nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
- Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.

- Prístroj používajte a nabíjajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi.
- Do otvorov prístroja ani USB kábla nepchajte žiadne predmety.
- Prístroj nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kuchynských drezov, umývadiel a vaní.
- Prístroj nepoužívajte vo vani, alebo v sprche!
- Ak prístroj navlhne, alebo sa namočí, ihneď vytiahnite USB kábel, ktorým prístroj nabíjate od elektrického zdroja, ale nikdy sa nedotýkajte vlhkých miest a vlhkými rukami pokiaľ je prístroj zapojený na nabíjanie k elektrickej sieti.
- Nedotýkajte sa prístroja keď spadol do vody.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou handričkou.



NEBEZPEČENSTVO PRE DETI!

- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené dospelé osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospelé osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Nenechajte deti hrať sa s prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
- Prístroj nie je hračka, ale účinný kozmetický prístroj.



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU, ALEBO EXPLÓZIE!

- Nevystavujte prístroj a jeho príslušenstvo pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Prístroj je vybavený lítium-polymérovou batériou. Nesprávne použitie prístroja a batérie môže viesť k úniku plynu alebo kvapaliny z batérie, ktorý môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

- Batériu nie je možné vymeniť. Prosím, nepokúšajte sa vymeniť batériu.
- Nerozoberajte prístroj ani namontovanú batériu.
- Prístroj a jeho batériu nevyhadzujte do otvoreného ohňa.
- Kovové lítium môže pri kontakte spôsobiť požiar s vodou. Zaisťte, aby obsah lítiových batérií neprichádzal do styku s vodou.
- Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.



VAROVANIE – RIZIKO PORANENIA!

- Porucha alebo poškodenie prístroja, alebo batérie môže viesť k úniku kvapaliny z batérie a prístroja, čo môže viesť k vzniku popálenín pri kontakte tekutiny s pokožkou.
- Nedotýkajte sa nefunkčného alebo poškodeného prístroja bez ochranných rukavíc.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou kvapalinou z batérie.
- Ak vaša pokožka príde do kontaktu s vytečenou tekutinou batérie, miesto ihneď umyte vodou.
- Ak sa vytečená batéria dostane do kontaktu s očami, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE – ZDRAVOTNÉ RIZIKO!

- POZOR! Nesprávne použitie prístroja môže viesť k zdravotným rizikám.
- Nepoužívajte prístroj
 - ak máte popraskanú alebo poškodenú pokožku
 - ak máte rakovinu kože, podozrenie na rakovinu kože alebo iné kožné choroby
 - ak máte choroby spojené s nádorom
 - počas chemoterapie alebo rádioterapie
 - počas tehotenstva alebo dojčenia
 - ak máte akútnu infekciu alebo zápal (napríklad akné alebo ružienku)
 - po opaľovaní alebo ak je pokožka spálená
 - ak ste náchylní na keloidy
 - ak máte akútne herpetické infekcie
 - ak máte zápalové ochorenie kože (napríklad psoriázu)

- ak máte zníženú zrážanlivosť krvi
- keď užívate kortizón
- keď užívate lieky citlivé na svetlo
- keď máte v oblasti tetovanie
- na nedávnych chirurgických jazvách
- po nedávnych chirurgických zákrokoch v danej oblasti
- ak je váš imunitný systém oslabený alebo trpíte na auto imunitné ochorenie
- ak máte akútne reumatické ochorenie
 - Nepoužívajte prístroj na očné viečka alebo očné bulvy.
 - Nepoužívajte prístroj priamo na perách.
 - Z hygienických dôvodov nezdieľajte prístroj s ostatnými.
 - Ak nerozumiete návod na použitie, alebo nie ste si istý, či je pre vás kozmetický prístroj vhodný, pred prvým použitím sa poraďte so svojim dermatológom.



VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA PRÍSTROJA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA!

- Varovanie! Nesprávne použitie môže poškodiť prístroj.
- Prístroj vždy položte na ľahko prístupný, rovný a suchý povrch s dostatočnou stabilitou.
- Nikdy neumiestňujte prístroj na horúce povrchy alebo do jeho blízkosti.
- Nikdy nevystavujte prístroj vysokým teplotám (napr. radiátory) alebo počasiu.
- Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou. Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte prístroj do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou. Na čistenie prístroja nepoužívajte vodu ani parný čistič. Nikdy neumiestňujte prístroj do umývačky riadu.
- Prestaňte prístroj používať, ak sú plastové súčasti prasknuté, rozštiepené alebo zdeformované. Uistite sa, že poškodené diely sú vymenené za kompatibilné a originálne náhradné diely.
- Používajte originálne nástavce, ktoré sú súčasťou balenia.
- Používajte prístroj suchými rukami na osušenej pokožke tváre, v opačnom prípade hrozí poškodenie prístroja.

- Uistite sa, že suchá filtračná špongia bola správne vložená do filtračného pohára a že do filtračného pohára nevnikla voda alebo iné tekutiny, pretože by mohli poškodiť prístroj.
- Nikdy nepoužívajte prístroj na nasatie vody z akýchkoľvek povrchov. Prístroj sa určený výlučne na použitie v oblasti tváre.
- Pravidelne prístroj čistite, aby ste odstránili upchatie spôsobené prachom, chuchvalcami, vlasmi alebo podobnými materiálmi, pretože také upchatie môže silne ovplyvniť sací výkon zariadenia alebo celkový výkon.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil počas prepravy a či prístroj obsahuje všetky diely. V opačnom prípade bezodkladne kontaktujte predajcu.



VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA BATÉRIE!

- Varovanie! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne nabitie zabudovanej batérie môže poškodiť prístroj.
- Na nabíjanie prístroja používajte iba dodávaný nabíjací kábel.
- Pred prvým použitím prístroj úplne nabite.
- 1. Vložte konektor nabíjacieho USB kábla (7) Micro USB (8) do portu Micro USB (6) na spodnej strane prístroja.
- 2. Vložte USB konektor nabíjacieho kábla USB do USB portu na počítači alebo notebooku, uistite sa, že počítač alebo laptop je zapnutý. Môžete tiež pripojiť nabíjanie USB káblom do správne nainštalovanej zásuvky pomocou štandardnej nabíjačky (adaptéra) pre domácnosť (nie je súčasťou balenia).
- 3. Počkajte, kým sa prístroj úplne nabije. Indikátor nabíjania (3) sa počas procesu nabíjania rozsvieti na LED displeji. Nabíjajte prístroj 5 hodín. Akonáhle je nabíjanie dokončené. Indikátor nabíjania neprestajne svieti (nebliká) a ikonka na displeji ukazuje plne nabitý stav. Blikajúca ikonka batérie znamená, že prístroje je potrebné nabiť.
 - Keď prístroj dlhodobo nepoužívate, nabite ho každé 3 mesiace, aby ste predišli hlbokému vybitiu batérie.
 - Ak ste prístroj už dlhšie nepoužívali, nabite ho predtým ako ho použijete.

- 4. Odpojte nabíjací kábel USB od zdroja napájania.
- 5. Odpojte nabíjací kábel USB od Micro USB zariadenia a uschovajte ho na bezpečné miesto.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA PRÍSTROJA



POZOR! ZDRAVOTNÉ RIZIKO! Používanie prístroja na podráždenú alebo poškodenú pokožku môže viesť k začervenaniu alebo podráždeniu pokožky.


- Pre prvým použitím prístroja si urobte test znášanlivosti. Použite kozmetický prístroj na pokožke zápästia 24 hodín pred prvým použitím na pokožke tváre. Kontaktujte svojho praktického lekára alebo dermatológa, ak si všimnete začervenanie alebo podráždenie pokožky do 24 hodín.
- Časté používanie môže pokožku podráždiť, čo sa prejavuje začervenaním do 24 hodín. Zredukujte používania. Ak sa po použití prístroja do 24 hodín objaví podráždenie, pocit nepohody na pokožke, alebo akýkoľvek iný symptóm, kontaktujte svojho praktického lekára alebo dermatológa.



POZOR! ZDRAVOTNÉ RIZIKO! Nesprávne použitie môže poškodiť alebo viesť k zdravotným rizikám. Používajte zariadenie opatrne.

- Nepoužívajte prístroj priamo na oči alebo okolo očí. Pokožka je tam tenšia a citlivejšia.
- Aby ste predišli podráždeniu pokožky, nepoužívajte prístroj na jednom mieste dlhšiu dobu alebo príliš často.
- Počas používania prístroja nenoste náhrdelníky, náušnice, bižutériu ani iné šperky, ktoré môžu byť prístrojom neúmyselne nasaté.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez správne namontovaného príslušenstva.
- Odporúčame prístroj používať raz týždenne na suchú pokožku a dvakrát týždenne na mastnú pokožku. Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 5 minút. Nadmerné používanie môže spôsobiť alergie na pokožke.

POPIS ČASTI PRÍSTROJA

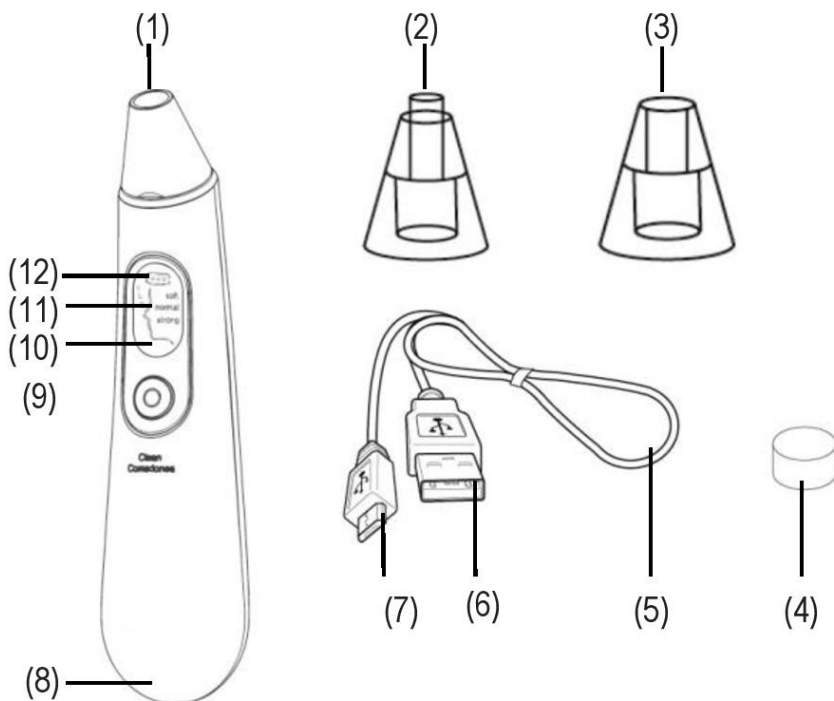

- (1) Nástavec (okrúhly, veľký)
- (2) Nástavec (okrúhly, malý)
- (3) Nástavec (oválny)
- (4) Špongia 21x
- (5) USB nabíjací kábel
- (6) USB konektor
- (7) USB mikro konektor

- (8) USB otvor pre mikro konektor
- (9) ON/OFF tlačidlo pre zapnutie a vypnutie
- (10) LED displej
- (11) Displej pre operačný režim (výber intenzity)
- (12) Displej pre stav batérie


OBSLUHA PRÍSTROJA

Príprava pokožky

1. Pred použitím prístroja si starostlivo očistite pokožku (napríklad pomocou čistiaceho gélu), aby bola čistá a bez zvyškov make-upu.
2. Použite teplý uterák a / alebo si pripravte parný kúpeľ na tvár, aby ste otvorili póry, pretože až potom budete môcť pomocou prístroja dosiahnuť najlepšie možné výsledky.
3. Môžete tiež použiť čistiace tonikum, aby ste rozpustili všetky nečistoty a umožnili ste prístroju hladšie klzanie po pokožke.

Príprava prístroja

1. Vyberte si nástavec.

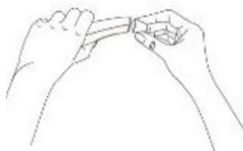

- **Okrúhly nástavec (veľký) (1)**

- Určené na všeobecné čistenie pórov.
- Môže byť použitý kdekoľvek na tvári okrem očí a pier.

- **Okrúhly nástavec (malý) (2)**

- Určené na čistenie pórov v oblastiach, ktoré sú ťažšie prístupné (napríklad nosové dierky) a kde je pokožka citlivá (napríklad v okolí očí).

- S týmto nástavcom sa odporúča úroveň intenzity 1.

- **Oválny nástavec (3)**

- Stimuluje cirkuláciu

- Môže pomôcť zvýšiť pružnosť pokožky.

- S týmto nástavcom sa odporúča úroveň intenzity 1.

2. Pri zakúpení zariadenia je okrúhly nástavec (veľký) (1) už namontovaný. Oddel'te nástavec od prístroja, v prípade potreby ho mierne otočte a namontujte požadovaný nástavec.

3. Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte hlavný vypínač (9) a podržte ho stlačený asi 1 sekundu, kým sa prístroj nezapne. LED displej (10) sa rozsvieti a indikuje úroveň intenzity a úroveň nabitia. Predvolený režim je jemný režim (úroveň intenzity 1).
4. Niekoľkokrát stlačte vypínač, aby ste vybrali požadovanú úroveň intenzity: jemnú, normálnu alebo silnú. Odporúčame najskôr začať s nízkou úrovňou intenzity.
5. Pred prvým použitím môžete vyskúšať sací výkon napr. na dolnej časti ramena.

Ošetrovanie pokožky



1. Jemne posúvajte prístroj po oblasti tváre, ktorú chcete vyčistiť, a to vždy v smere von.

- **Dôležité:** Uistite sa, že prístroj nepoužívate na jednu oblasť pokožky príliš často alebo dlhšiu dobu a že ho neustále udržiavate v pohybe. Oblasť tváre, ktorú chcete ošetriť, by mala byť čo najhladšia. V prípade potreby môžete svoju pokožku jemne napnúť voľnou rukou.

Používanie zariadenia by malo byť príjemným

zážitkom a nemalo by spôsobovať žiadne bolesti. Mierne začervenanie po použití je úplne bežné.

2. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte vypínač (9) a držte ho stlačený asi 1 sekundu, kým sa prístroj nevypne. LED displej (10) zhasne.
3. Po použití prístroja naneste vysoko kvalitný a upokojujúci výrobok starostlivosti o pokožku (napr. upokojujúce tonikum). Po použití prístroja je vaša pokožka optimálne pripravená na účinné ošetrovanie proti starnutiu, najlepšie pomocou koncentrátov alebo sér.
4. **Dôležité:** Po každom použití filtračnú špongiu (4) vymeňte. Ak chcete odstrániť filtračnú špongiu, otočte a vytiahnite nástavec zo zariadenia a vyberte použitú filtračnú špongiu z filtračného pohára.
5. Vyčistite zariadenie podľa pokynov v časti „Čistenie“.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ČISTENIE PRÍSTROJA



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne čistenie môže prístroj poškodiť!

- Nástavce sú vodotesné a môžu sa opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte prístroj do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alkohol, kovové kefky, nylonové štetiny, ostré kovové predmety, nože, škrabky, alebo podobné výrobky.
- Prístroj čistite jedine jemnou a mierne vlhkou handričkou bez vyvíjania tlaku!
- Počas čistenia prístroja musí byť prístroj vypnutý!

POSTUP PRE ČISTENIE PRÍSTROJA



Z hygienických dôvodov musí byť prístroj po každom použití vyčistený. Postupujte nasledovne:

1. Vypnite prístroj.
2. Nástavce (1, 2, 3) po každom použití očistite teplou vodou a prípadne bavlneným tampónom a dezinfekčným prostriedkom alebo čistiacim prostriedkom na báze alkoholu v koncentrácii nižšej ako 70%.
3. Po každom použití filtračnú

špongiu vymeňte.

4. Zariadenie utrite mäkkou vlhkou handričkou.
5. Všetky časti nechajte vysušiť.

SKLADOVANIE

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou v prostredí s teplotou medzi -10°C a 50°C. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je elektrické zariadenie a je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje.	Prístroj je vypnutý.	Prístroj zapnite podržaním tlačidla ON/OFF na 1 sekundu.
Prístroj sa nedá zapnúť.	Prístroj je úplne vybitý.	Prístroj nabite.

INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ



Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.



Kartón a papier patria do zberného kontajnera s nápisom papier. Plasty patria do zberného kontajnera s nápisom plasty.



Baterky a batérie nelikvidujte spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste, alebo odložte ich do nádob k tomu určených napr. recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené na celom území Slovenska. Odovzdaním batérii a bateriek prispějete svojim dielom s ochrane životného prostredia.

Importér:

Yalong Trade s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: 0907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz

