

LIFT mee



IONIC

MULTIFUNKČNÝ KOZMETICKÝ PRÍSTROJ
MULTIFUNKČNÍ KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.



Dôležité: Pred použitím si prečítajte návod na použitie! Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie: 5 V DC, 1 A (zariadenie)

Menovitý prúd: 600 mAh

Menovitý výkon: 2.5 W

Napájanie: lítium – polymérová batéria (vstavaná, nevymeniteľná)

Kapacita batérie: 600 mAh

Pripojenie nabíjačky: Micro USB

Spotreba energie: 1.5 W

Doba nabíjania: približne 2 hod.

Výdrž batérie: približne 2,5 hod.

Materiál: plast (ABS)

Rozmery: 144.3 x 24.5 x 23.5 mm

Hmotnosť: 52 g

FUNKCIE KOZMETICKÉHO PRÍSTROJA

Galvanický prúd (ióny)

Fotóny: červené svetlo, modré svetlo, žlté svetlo

Vibračná frekvencia: 13,000 za minútu

Nastavenie teploty: 20°C (modré), 40°C, (žlté), 42°C (červené)

BALENIE OBSAHUJE

1. Prístroj
2. USB kábel na nabíjanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Teraz si môžete vychutnať profesionálnu starostlivosť o pleť už aj v pohodlí svojho domova. Tento multifunkčný kozmetický prístroj využíva najmodernejšie technológie – **galvanický prúd** s ďalšími kozmetickými funkciami. „**Aktivačné**“ **červené svetlo** preniká do hĺbky 8 až 10 mm a je vhodné pre všetky typy pleti. V ošetrovanej oblasti zvyšuje mikrocirkuláciu krvi, **aktivuje** tvorbu kolagénu, redukuje vrásky, stimuluje bunkovú aktivitu, po jeho použití sa pleť vypne a zjemní. **Červené svetlo** zvyšuje absorpciu aktívnych látok do pokožky, čo umožní účinným látkam (gél, sérum, koncentrát), aby prenikli do hlbších vrstiev pokožky pre získanie krásnej a pevnej pleti. „**Upokojujúce**“ **modré svetlo** preniká do hĺbky 0.5mm a upokojuje pleť. **Modré svetlo** je vhodné pre citlivú pleť, mastnú alebo aknóznú (problematickú) pleť. „**Revitalizujúce**“ **žlté svetlo** má upokojujúci a omladzujúci efekt. **Žlté svetlo** je mimoriadne vhodné na širšiu škálu problémov s pleťou, napr. ružienka, popraskané žilky na tvári, červená, zapálená, alebo podráždená pokožka. V kombinácii s červeným svetlom skvele účinkuje pri eliminácii vrások. Žlté svetlo môže pomôcť zredukovať vačky a opuchy pod očami a pomáha rozžiariť a zosvetliť pokožku. **Mäkké vibrácie a príjemné teplo** zlepšia mikrocirkuláciu pokožky. Ošetrovanie pokožky týmto kozmetickým prístrojom sa dá ľahko integrovať do vašej každodennej starostlivosti o pleť. Používanie tohto kozmetického prístroja po dobu 5 až 10 minút každý deň pomôže zmierniť jemné a drobné vrásky v okolí očí a pier. Kozmetický prístroj zlepši mikrocirkuláciu v ošetrovanej pokožke, výživu a okysličenie kožných buniek, detoxikačné mechanizmy, čím môžete dosiahnuť krajšiu, pevnejšiu, zdravšiu a sviežejšiu pokožku. Používajte kozmetický prístroj 10 minút denne spolu s vašim obľúbeným hyalurónovým prípravkom.

Výhody v skratke:

- Žiarivá a svieža pokožka
- Malý a šikovný prístroj
- Ideálny pomocník pre drobné a jemné vrásky v okolí očí a pier
- Rôzne stupne teploty: 20°C, 40°C alebo 42°C

- 13,000 mikrovibrácií za minútu pre dokonalý masážny zážitok pre vašu pleť
- Rôzny vlnové dĺžky (svetlá) pre rôzne problémy s pleťou
- Inteligentná dotyková technológia
- Prístroj sa automaticky vypne po 5 minútach.

SYMBOLY

	Označenie CE potvrdzuje súlad produktu s rozhodujúcimi smernicami EÚ a s jeho technickými špecifikáciami.
	NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
	VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
	POZOR! Nesprávnym používaním hrozia materiálne škody.

ÚČEL URČENIA

Kozmetický prístroj je určený na vyhladenie a napnutie pokožky v pohodlí domova v týchto oblastiach:

- Okolo očí
- V oblasti tváre (čelo, líca, oblasť čelústí, dekolt, oblasť nad hornou a dolnou perou)

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

 Návod na použitie vychádza z noriem, ktoré sú platné v Európskej únii.



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Nenamáčajte prístroj, ani jeho príslušenstvo do vody, ani do iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prístroj v exteriéry, alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Napájací ani nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
- Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.
- Prístroj používajte a nabíjajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi.
- Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne predmety.
- Prístroj nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kuchynských drezov, umývadiel a vaní.
- Ak prístroj navlhne, alebo sa namočí, ihneď vytiahnite USB kábel, ktorým prístroj nabíjate od elektrického zdroja, ale nikdy sa nedotýkajte vlhkých miest a vlhkými rukami pokiaľ je prístroj zapojený na nabíjanie k elektrickej sieti.
- Nedotýkajte sa prístroja keď spadol do vody.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou handričkou.



NEBEZPEČENSTVO PRE DETI!

- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou

spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospeléj osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.

- Nenechajte deti hrať sa prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
- Prístroj nie je hračka, ale účinný kozmetický prístroj.



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU, ALEBO EXPLÓZIE!

- Nevystavujte prístroj a jeho príslušenstvo pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Prístroj je vybavený lítium-polymérovou batériou. Nesprávne použitie prístroja a batérie môže viesť k úniku plynu alebo kvapaliny z batérie, ktorý môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batériu nie je možné vymeniť. Prosím, nepokúšajte sa vymeniť batériu.
- Nerozoberajte prístroj ani namontovanú batériu.
- Prístroj a jeho batériu nevyhadzujte do otvoreného ohňa.
- Kovové lítium môže pri kontakte spôsobiť požiar s vodou. Zaisťte, aby obsah lítiových batérií neprichádzal do styku s vodou.
- Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.



VAROVANIE – RIZIKO PORANENIA!

- Porucha alebo poškodenie prístroja, alebo batérie môže viesť k úniku kvapaliny z batérie a prístroja, čo môže viesť k vzniku popálenín pri kontakte tekutiny s pokožkou.
- Nedotýkajte sa nefunkčného alebo poškodeného prístroja bez ochranných rukavíc.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou kvapalinou z batérie.
- Ak vaša pokožka príde do kontaktu s vytečenou tekutinou batériou, miesto ihneď umyte vodou.
- Ak sa vytečená batéria dostane do kontaktu s očami, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

- Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!
- Masážny nástavec sa môže zahriať na teplotu 42°C. Ktokoľvek citlivý na teplo môže utrpieť popáleniny kože. Ak ste citlivý na teplo, prístroj nepoužívajte.
- Používajte prístroj podľa návodu na použitie.
- Používajte prístroj opatrne.



VAROVANIE – ZDRAVOTNÉ RIZIKO!

- POZOR! Nesprávne použitie prístroja môže viesť k zdravotným rizikám.
- Nepoužívajte prístroj
 - ak máte popraskanú alebo poškodenú pokožku
 - ak máte rakovinu kože, podozrenie na rakovinu kože alebo iné kožné choroby
 - ak máte choroby spojené s nádorom
 - počas chemoterapie alebo rádioterapie
 - počas tehotenstva alebo dojčenia
 - ak máte akútnu infekciu alebo zápal (napríklad akné alebo ružienku)
 - po opaľovaní alebo ak je pokožka spálená
 - ak ste náchylní na keloidy
 - ak máte akútne herpetické infekcie
 - ak máte zápalové ochorenie kože (napríklad psoriázu)
 - ak máte zníženú zrážanlivosť krvi
 - keď užívate kortizón
 - keď užívate lieky citlivé na svetlo
 - keď máte v oblasti tetovanie
 - na nedávnych chirurgických jazvách
 - po nedávnych chirurgických zákrokoch v danej oblasti
 - ak je váš imunitný systém oslabený alebo trpíte na auto imunitné ochorenie
 - ak máte akútne reumatické ochorenie
 - Nepoužívajte prístroj na očné viečka alebo očné bulvy.
 - Nepoužívajte prístroj priamo na perách.
 - Z hygienických dôvodov nezdierajte prístroj s ostatnými.



VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA PRÍSTROJA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA!

- Varovanie! Nesprávne použitie môže poškodiť prístroj.
- Prístroj vždy položte na ľahko prístupný, rovný a suchý povrch s dostatočnou stabilitou.
- Nikdy neumiestňujte prístroj na horúce povrchy alebo do jeho blízkosti.
- Nikdy nevystavujte prístroj vysokým teplotám (napr. radiátory) alebo počasie.
- Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou. Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte prístroj do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou. Na čistenie prístroja nepoužívajte vodu ani parný čistič. Nikdy neumiestňujte prístroj do umývačky riadu.
- Prestaňte prístroj používať, ak sú plastové súčasti prasknuté, rozštiepené alebo zdeformované. Uistite sa, že poškodené diely sú vymenené za kompatibilné a originálne náhradné diely.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil počas prepravy.



VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA BATÉRIE!

- Varovanie! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne nabitie zabudovanej batérie môže poškodiť prístroj.
- Na nabíjanie prístroja používajte iba dodávaný nabíjací kábel.
- 1. Vložte konektor nabíjacieho USB kábla (7) Micro USB (8) do portu Micro USB (6) na spodnej strane prístroja.
- 2. Vložte USB konektor nabíjacieho kábla USB (9) do USB portu na počítači alebo notebooku, uistite sa, že počítač alebo laptop je zapnutý. Môžete tiež pripojiť nabíjanie USB káblom do správne nainštalovanej zásuvky pomocou štandardnej nabíjačky (adaptéra) pre domácnosť (nie je súčasťou balenia).

- 3. Počkajte, kým sa prístroj úplne nabije. Indikátor nabíjania (3) sa počas procesu nabíjania rozsvieti na červeno. Indikátor zhasne akonáhle je nabíjanie dokončené.
- 4. Odpojte nabíjací kábel USB od zdroja napájania.
- 5. Odpojte nabíjací kábel USB od Micro USB zariadenia a uschovajte ho na bezpečné miesto.
- Ak sa prístroj nepoužíva dlhšiu dobu, batéria sa vybije. Nabite batériu pred ďalším použitím. Keď indikátor svieti na červeno, batéria je slabá a je potrebné ju nabiť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA PRÍSTROJA



POZOR! ZDRAVOTNÉ RIZIKO! Používanie prístroja na podráždenú alebo poškodenú pokožku môže viesť k začervenaniu alebo podráždeniu pokožky.

- Pre prvým použitím prístroja si urobte test znášanlivosti. Použite kozmetický prístroj na pokožke zápästia 24 hodín pred prvým použitím na pokožke tváre. Kontaktujte svojho praktického lekára alebo dermatológa, ak si všimnete začervenanie alebo podráždenie pokožky do 24 hodín.




POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Masážny nástavec sa môže zahriať na teplotu 42°C. Ktokoľvek citlivý na teplo môže utrpieť popáleniny kože!

- Používajte zariadenie opatrne.
- Prístroj má vibračný masážny nadstavec (1), ktorý generuje 13 000 vibrácií za minútu. Masážny nástavec má tiež vyhrievaný článok s tromi rôznymi nastaveniami tepla. Tieto funkcie poskytujú spolu s rôznymi svetelnými režimami nasledujúce spôsoby ošetrovania:
 - 1. Modré svetlo (20°C): Má relaxačný účinok na pokožku.
 - 2. Žlté svetlo (40°C): Môže to pomôcť zjemniť vačky pod očami a rozžiariť pleť.
 - 3. Červené svetlo (42°C): Môže to pomôcť zvýšiť absorpciu účinných látok.

POPIS ČASTI PRÍSTROJA

- (1) Masážna hlavica (6) Micro USB port
- (2) Skrášľujúce svetlo LED (7) USB nabíjací kábel
- (3) Indikátor nabíjania (8) Micro USB konektor
- (4) On/off tlačidlo (9) USB konektor
- (5) Dotyková plocha / Inteligentná dotyková technológia

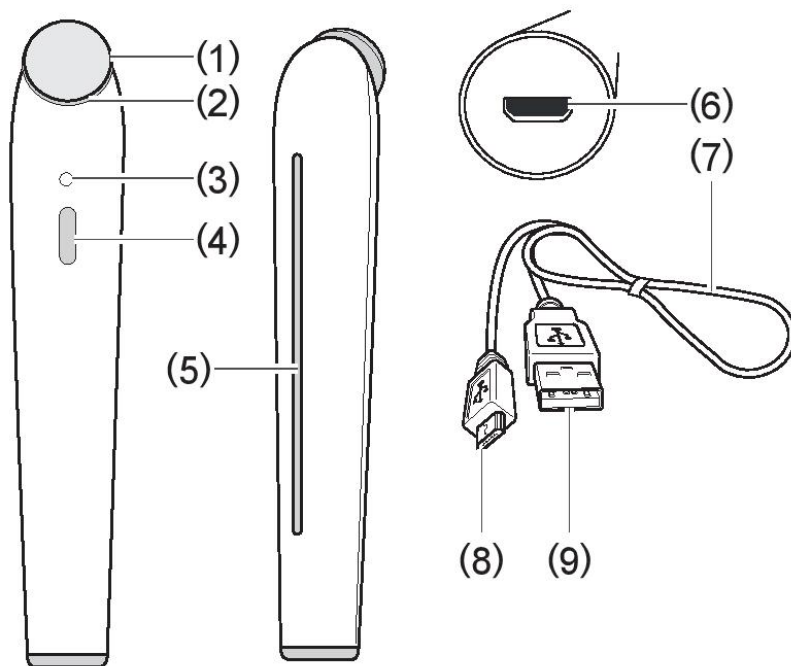

OBSLUHA PRÍSTROJA


1. Pokožku si dôkladne umyte vodou, alebo čistiacim prípravkom nato určeným. Môže to byť čistiaca pena, čistiaci gél, čistiaci krém, alebo micelárne tonikum.
2. Držte prístroj v ruke tak, aby ste s dotýkali inteligentnej dotykovej plochy (5).
3. Podržte tlačidlo ON/OFF 2 sekundy (4) a prístroj sa zapne.

4. Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF na 1 sekundu (4) nastavujete teplotu: 20°C (modré), 40°C, (žlté), 42°C (červené). Trvá približne 15 sekúnd, kým sa masážna hlavica prispôsobí zmene teploty. Prístroj má pamäť a zapamätá si posledné nastavenie. Keď prístroj vypnete a zapnete, tak sa prepne do posledného nastavenia.

OŠETRENIE POKOŽKY V OKOLÍ OČÍ



1. Naneste gél, sérum, koncentrát, alebo iný vhodný prípravok na očné okolie. Odporúčame používať hyalurónový prípravok. Naneste optimálne množstvo – pokožka vstrebe len určité množstvo prípravku a zbytok ostáva na pokožke.

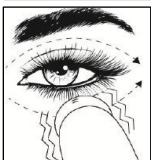

2. Zapnite prístroj.

3. Navoľte si teplotu.




4. Masírujte pokožku krúživými pohybmi, alebo vyvíjajte bodové slabé tlaky na pokožku v trvaní 10 sekúnd, opakujte 2-3x.

5. Po 5 minútach nepoužívania sa prístroj automaticky vypne.
6. Prístroj vypnete podržaním tlačidla ON/OFF (4) na 2 sekundy.

OŠETRENIE POKOŽKY NA TVÁRI

1. Naneste gél, sérum, koncentrát, alebo iný vhodný prípravok na pokožku tváre. Odporúčame používať hyalurónový prípravok. Naneste optimálne množstvo – pokožka vstrebe len určité množstvo prípravku a zbytok ostáva na pokožke.
2. Zapnite prístroj.
3. Zvoľte si teplotu.

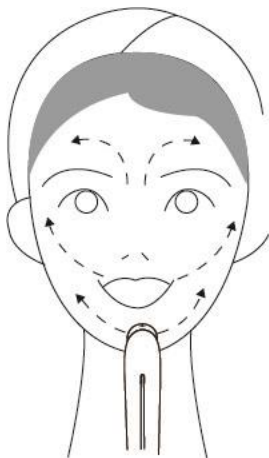

4. Masírujte pokožku krúživými pohybmi, alebo vyvíjajte bodové slabé tlaky na pokožku v trvaní 10 sekúnd, opakujte 2-3x.
5. Prístroj môžete používať 120 minút.
6. Po 5 minútach nepoužívania sa prístroj automaticky vypne.
7. Prístroj vypnete podržaním tlačidla ON/OFF (4) na 2 sekundy.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ČISTENIE PRÍSTROJA



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne čistenie môže prístroj poškodiť!

- Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte prístroj do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alkohol, kovové kefkы, nylonové štetiny, ostré kovové predmety, nože, škrabky, alebo podobné výrobky.
- Prístroj čistite jedine jemnou a mierne vlhkou handričkou bez vyvíjania tlaku!

POSTUP PRE ČISTENIE PRÍSTROJA



Z hygienických dôvodov musí byť prístroj po každom použití vyčistený. Postupujte nasledovne:

1. Vypnite prístroj.
2. Utrite masážnu hlavicu a plastovú časť mäkkou, mierne vlhkou handričkou.
3. Utrite masážnu hlavicu a plastovú časť mäkkou, suchou handričkou.
4. Prístroj uskladnite na bezpečné miesto.

SKLADOVANIE

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je elektrické zariadenie a je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje.	Prístroj je vypnutý.	Prístroj zapnite podržaním tlačidla ON/OFF na 2 sekundy
Prístroj nefunguje.	Nedotýkate sa inteligentného kontaktného pásika.	Prístroj beží, že sa dotýkate inteligentného kontaktného pásika.
Prístroj sa nedá zapnúť.	Prístroj je úplne vybitý.	Prístroj nabite.

INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ



Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.



Kartón a papier patria do zberného kontajnera s nápisom papier. Plasty patria do zberného kontajnera s nápisom plasty.



Baterky a batérie nelikvidujte spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste, alebo odložte ich do nádob k tomu určených napr. recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené na celom území Slovenska. Odovzdaním batérii a bateriek prispejete svojim dielom s ochrane životného prostredia.

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za vaši důvěru, projevenou zakoupením našeho produktu. Přejeme vám příjemné používání tohoto kosmetického přístroje a spoustu radosti a spokojenosti z dosažených výsledků.



Důležité: Před použitím si přečtěte návod k použití! Abyste se z kosmetického přístroje mohli těšit po dlouhou dobu, přečtěte si návod k použití dříve, než začnete přístroj používat. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnosti.

PARAMETRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 5 V DC, 1 A (zařízení)

Jmenovitý proud: 600 mAh

Jmenovitý výkon: 2.5 W

Napájení: lithium – polymerová baterie (vestavná, nevyměnitelná)

Kapacita baterie: 600 mAh

Připojení nabíječky: Micro USB

Spotřeba energie: 1.5 W

Doba nabíjení: přibližně 2 hod.

Výdrž baterie: přibližně 2,5hod.

Materiál: plast (ABS)

Rozměry: 144.3 x 24.5 x 23.5 mm

Hmotnost: 52 g

FUNKCE KOSMETICKÉHO PŘÍSTROJE

Galvanický proud (ionty)

Fotony: červené světlo, modré světlo, žluté světlo

Vibrační frekvence: 13,000 za minutu

Nastavení teploty: 20°C (modré), 40°C, (žluté), 42°C (červené)

BALENÍ OBSAHUJE

1. Přístroj
2. USB kabel k nabíjení

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Nyní si můžete vychutnat profesionální péči o pleť už i v pohodlí svého domova. Tento multifunkční kosmetický přístroj využívá nejmodernější technologie – galvanický proud s dalšími kosmetickými funkcemi. „Aktivační“ červené světlo proniká do hloubky 8 až 10 mm a je vhodné pro všechny typy pleti. V ošetřované oblasti zvyšuje mikrocirkulaci krve, aktivuje tvorbu kolagenu, redukuje vrásky, stimuluje buněčnou aktivitu, po jeho použití se pleť vypne a zjemní. **Červené světlo** zvyšuje absorpci aktivních látek do pokožky, což umožní účinným látkám, aby pronikly do hlubších vrstev pokožky pro získání krásné a pevné pleti. „Uklidňující“ **modré světlo** proniká do hloubky 0.5mm a zklidňuje pleť. Modré světlo je vhodné pro citlivou pleť, mastnou nebo aknézní (problematickou) pleť. „Revitalizující“ **žluté světlo** má uklidňující a omlazující efekt. Žluté světlo je mimořádně vhodné pro širší škálu problémů s pleť - popraskané žilky na obličeji, červená nebo podrážděná pokožka. V kombinaci s červeným světlem skvěle účinkuje při eliminaci vrásek. Žluté světlo může pomoci zredukovat váčky a otoky pod očima a pomáhá rozzářit a zesvětlit pokožku. **Měkké vibrace a příjemné teplo** zlepši mikrocirkulaci pokožky. Ošetření pokožky tímto kosmetickým přístrojem lze snadno integrovat do vaší každodenní péče o pleť. Používání tohoto kosmetického přístroje po dobu 5 až 10 minut každý den pomůže zmírnit jemné a drobné vrásky v okolí očí a rtů. Kosmetický přístroj zlepši mikrocirkulaci v ošetřované pokožky, výživu a okysličení kožních buněk, detoxikační mechanismy, čímž můžete dosáhnout krásnější, pevnější, zdravější a svěžejší pokožku. Používejte kosmetický přístroj 10 minut denně spolu s vaším oblíbeným hyaluronovým přípravkem.

Výhody ve zkratce:

- Zářivá a svěží pokožka
- Malý a chytrý přístroj
- Ideální pomocník pro drobné a jemné vrásky v okolí očí a rtů
- Různé stupně teploty: 20°C, 40°C nebo 42°C
- 13,000 mikrovibrací za minutu pro dokonalý masážní zážitek pro vaši pleť
- Různé vlnové délky (světla) pro různé problémy s pletí
- Inteligentní dotyková technologie
- Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách.

SYMBOLY

	Označení CE potvrzuje soulad produktu s rozhodujícími směrnici EU a jeho technickými specifikacemi.
	NEBEZPEČÍ! K označení bezprostředně hrozícího nebezpečí, které vede k závažným tělesným poraněním nebo k usmrcení.
	VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedbalost při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo závažná poranění.
	POZOR! Nesprávným používáním hrozí materiální škody.

ÚČEL URČENÍ

Kosmetický přístroj je určen k vyhlazení a napnutí pokožky v pohodlí domova v těchto oblastech:

- Kolem očí
- V oblasti obličeje (oblast čela, lícni oblast, oblast čelistí, dekolť, oblast nad horním a dolním rtem)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Návod k použití vychází z norem, které jsou platné v Evropské unii.



NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Nenamáčejte přístroj ani jeho příslušenství do vody ani do jiných tekutin, protože hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj v exteriéru nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Napájecí nabíjecí kabel neved'te po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen nabíjecí / napájecí kabel, nebo přístroj samotný.
- Přístroj nerozebírejte. Rozebrání přístroje a jeho nesprávné použití znamená ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody.
- Přístroj používejte a nabíjejte pouze s originálním příslušenstvím a díly.
- Do otvorů přístroje ani USB kabelu nevsouvajte žádné předměty.
- Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti kuchyňských dřezů, umyvadel a van.

- Pokud přístroj navlhne, nebo se namočí, ihned vytáhněte USB kabel, kterým přístroj nabíjíte od elektrického zdroje, ale nikdy se nedotýkejte vlhkých míst a vlhkýma rukama pokud je přístroj zapojen k nabíjení k elektrické síti.
- Nedotýkejte se přístroje když spadl do vody.
- Před použitím odpojte přístroj od nabíjecího kabelu.
- Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně očistěte suchým hadříkem.



NEBEZPEČÍ PRO DĚTI!

- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určen.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Výše uvedené osoby mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použití.
- Nenechte děti hrát si přístrojem, ani bez dozoru provádět jeho čištění a údržbu.
- Přístroj není hračka, ale účinný kosmetický přístroj.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU, NEBO EXPLOZE!

- Nevystavujte přístroj a jeho příslušenství působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Přístroj je vybaven lithium-polymerovou baterií. Nesprávné použití přístroje a baterie může vést k úniku plynu nebo kapaliny z baterie, který může způsobit požár nebo výbuch.
- Baterii nelze vyměnit. Prosím, nepokoušejte vyměnit baterii.
- Nerozebírejte přístroj ani namontovanou baterii.
- Přístroj a jeho baterii nevyhazujte do otevřeného ohně.
- Kovové lithium může při kontaktu způsobit požár s vodou. Zajistěte, aby obsah lithiových baterií nepřicházel do styku s vodou.
- Je-li přístroj poškozen, nepoužívejte jej.



VAROVÁNÍ – RIZIKO PORANĚNÍ!

- Porucha nebo poškození přístroje nebo baterie může vést k úniku kapaliny z baterie a přístroje, což může vést ke vzniku popálenin při kontaktu tekutiny s pokožkou.
- Nedotýkejte se nefunkčního nebo poškozeného přístroje bez ochranných rukavic.
- Zabraňte jakémukoli kontaktu s vytékající kapalinou z baterie.
- Pokud vaše pokožka přijde do kontaktu s vyteklou tekutinou z baterie, místo ihned omyjte vodou.
- Pokud se vytečená baterie dostane do kontaktu s očima, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

- Pozor! Nebezpečí popálení!
- Masážní nástavec se může zahřát na teplotu 42°C. Kdokoli citlivý na teplo může utrpět popáleniny kůže. Pokud jste citliví na teplo, přístroj nepoužívejte.
- Používejte přístroj podle návodu k použití.
- Používejte přístroj opatrně.



VAROVÁNÍ – ZDRAVOTNÍ RIZIKO!

- POZOR! Nesprávné použití přístroje může vést ke zdravotním rizikům.
- Nepoužívejte přístroj
 - pokud máte popraskanou nebo poškozenou pokožku
 - jestliže máte rakovinu kůže, podezření na rakovinu kůže nebo jiné kožní choroby
 - jestliže trpíte chorobami spojenými s nádorem
 - během chemoterapie nebo radioterapie
 - během těhotenství nebo kojení
 - jestliže máte akutní infekci nebo zánět (například akné nebo zarděnku)
 - po opalování nebo pokud je pokožka spálená
 - pokud jste náchylní na keloidy

- pokud máte akutní herpetické infekce
- jestliže máte zánětlivé onemocnění kůže (například psoriázu)
- jestliže máte sníženou srážlivost krve
- když užíváte kortizon
- když užíváte léky citlivé na světlo
- když máte v oblasti tetování
- na nedávných chirurgických jizvách
- po nedávných chirurgických zákrocích v dané oblasti
- je-li váš imunitní systém oslaben nebo trpíte na auto imunitní onemocnění
- jestliže máte akutní revmatické onemocnění
 - Nepoužívejte přístroj na oční víčka nebo oční bulvy.
 - Nepoužívejte přístroj přímo na rtech.
 - Z hygienických důvodů nesdílejte přístroj s ostatními.



VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ!

- Varování! Nesprávné použití může poškodit přístroj.
- Přístroj vždy položte na snadno přístupný, rovný a suchý povrch s dostatečnou stabilitou.
- Nikdy neumísťujte přístroj na horké povrchy nebo do jeho blízkosti.
- Nikdy nevystavujte přístroj vysokým teplotám (např. radiátory) nebo počasí.
- Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Přístroj není vodotěsný. Neponořujte přístroj do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nepoužívejte vodu ani parní čistič. Nikdy neumísťujte přístroj do myčky nádobí.
- Přestaňte přístroj používat, pokud jsou plastové součásti prasklé, roztřepené nebo zdeformované. Ujistěte se, že poškozené díly jsou vyměněny za kompatibilní a originální náhradní díly.
- Po zakoupení přístroje zkontrolujte přístroj, zda se nepoškodil během přepravy.



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ BATERIE!

- Varování! Nebezpečí poškození! Nesprávné nabití zabudované baterie může poškodit přístroj.
- K nabíjení přístroje používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel.
- 1. Vložte konektor nabíjecího USB kabelu (7) Micro USB (8) do portu Micro USB (6) na spodní straně přístroje.
- 2. Vložte USB konektor nabíjecího kabelu USB (9) do USB portu na počítači nebo notebooku, ujistěte se, že počítač nebo laptop je zapnutý. Můžete také připojit nabíjení USB kabelem do správně nainstalované zásuvky pomocí standardní nabíječky (adaptéru) pro domácnost (není součástí balení).
- 3. Počkejte, až se přístroj zcela nabije. Indikátor nabíjení (3) se během procesu nabíjení rozsvítí červeně. Indikátor zhasne jakmile je nabíjení dokončeno.
- 4. Odpojte nabíjecí kabel USB od zdroje napájení.
- 5. Odpojte nabíjecí kabel USB od Micro USB zařízení a uschovejte jej na bezpečné místo.
- Pokud se přístroj nepoužívá delší dobu, baterie se vybije. Nabijte baterii před dalším použitím. Když indikátor svítí červeně, baterie je slabá a je třeba ji nabít.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE



POZOR! ZDRAVOTNÍ RIZIKO! Používání přístroje na podrážděnou nebo poškozenou pokožku může vést k zarudnutí nebo podráždění pokožky.

- Pro prvním použitím přístroje si udělejte test snášenlivosti. Použijte kosmetický přístroj na pokožce zápěstí 24 hodin před prvním použitím na pokožce obličeje. Kontaktujte svého praktického lékaře nebo dermatologa, pokud si všimnete zarudnutí nebo podráždění pokožky do 24 hodin.




POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! Masážní nástavec se může zahřát na teplotu 42°C. Kdokoli citlivý na teplo může utrpět popáleniny kůže!

- Používejte zařízení opatrně.
- Přístroj má vibrační masážní nástavec (1), který generuje 13 000 vibrací za minutu. Masážní nástavec má také vyhřívaný článek se třemi různými nastaveními tepla. Tyto funkce poskytují spolu s různými světelnými režimy následující způsoby ošetření:
- 1. Modré světlo (20°C): Má relaxační účinek na pokožku.
- 2. Žluté světlo (40°C): Může to pomoci zjemnit vrásky pod očima a rozzářit pleť.
- 3. Červené světlo (42°C): Může to pomoci zvýšit absorpci účinných látek.

POPIS ČÁSTI PŘÍSTROJE

- (1) Masážní hlavice (6) Micro USB port
(2) Zkrášlující světlo LED (7) USB nabíjecí kabel
(3) Indikátor nabíjení (8) Micro USB konektor
(4) On/off tlačítko (9) USB konektor
(5) Dotyková plocha / Inteligentní dotyková technologie

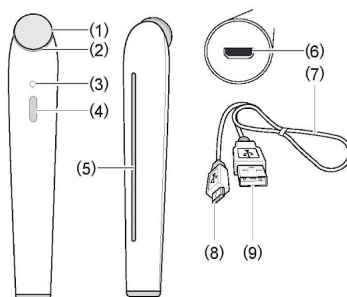


OBSLUHA PŘÍSTROJE

1. Pokožku si důkladně omyjte vodou nebo čistícím přípravkem k tomu určeným. Může to být čistící pěna, čistící gel, čistící krém nebo micelární tonikum.
2. Držte přístroj v ruce tak, abyste se dotýkali inteligentní dotykové plochy (5).
3. Podržte tlačítko ON/OFF 2 sekundy (4) a přístroj se zapne.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF na 1 sekundu (4) nastavujete teplotu: 20°C (modré), 40°C, (žluté), 42°C (červené). Trvá přibližně 15 sekund, než se masážní hlavice přizpůsobí změně teploty. Přístroj má paměť a zapamatuje si poslední nastavení. Když přístroj vypnete a zapnete, tak se přepne do posledního nastavení.

OŠETŘENÍ POKOŽKY V OKOLÍ OČÍ



1. Naneste gel, sérum, koncentrát, nebo jiný vhodný přípravek na oční okolí. Doporučujeme používat hyaluronový přípravek. Naneste optimální množství – pokožka vstřebá jen určité množství přípravku a zbytek zůstává na pokožce.

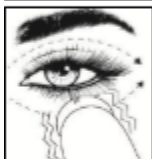

2. Zapněte přístroj.




3. Navolte si teplotu.

4. Masírujte pokožku krouživými pohyby, nebo vyvíjejte bodové slabé tlaky na pokožku v trvání 10 vteřin, opakujte 2-3x.

5. Po 5 minutách nepoužívání se přístroj automaticky vypne.
6. Přístroj vypnete podržením tlačítka ON/OFF (4) na 2 sekundy.

OŠETŘENÍ POKOŽKY NA TVÁŘI

1. Naneste gel, sérum, koncentrát nebo jiný vhodný přípravek na pokožku obličeje. Doporučujeme používat hyaluronový přípravek. Naneste optimální množství – pokožka vstřebá jen určité množství přípravku a zbytek zůstává na pokožce.
2. Zapněte přístroj.
3. Zvolte si teplotu.

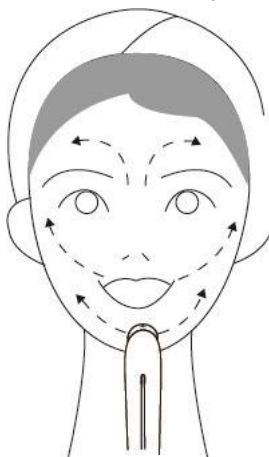

4. Masírujte pokožku krouživými pohyby, nebo vyvíjejte bodové slabé tlaky na pokožku v trvání 10 vteřin, opakujte 2-3x.
5. Přístroj můžete používat 120 minut.
6. Po 5 minutách nepoužívání se přístroj automaticky vypne.
7. Přístroj vypnete podržením tlačítka ON/OFF (4) na 2 sekundy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE



POZOR! Nebezpečí poškození! Nesprávné čištění může přístroj poškodit!

- Přístroj není vodotěsný. Neponořujte přístroj do vody, ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- K čištění přístroje nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol, kovové kartáčky, nylonové štětiny, ostré kovové předměty, nože, škrabky nebo podobné výrobky.

- Příklad čistíte pouze jemným a mírně vlhkým hadříkem bez vyvíjení tlaku!

POSTUP PRO ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE



Z hygienických důvodů musí být přístroj po každém použití vyčištěn. Postupujte následovně:

1. Vypněte přístroj.
2. Otřete masážní hlavici a plastovou část měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
3. Otřete masážní hlavici a plastovou část měkkým, suchým hadříkem.
4. Příklad uskladněte na bezpečné místo.

SKLADOVÁNÍ

Po použití otřete přístroj suchým hadříkem. Skladujte na místě s konstantní vlhkostí a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. Skladujte mimo dosah dětí. Příklad je elektrické zařízení a je určen pro dospělého uživatele, který porozuměl návodu k použití.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje.	Přístroj je vypnutý.	Přístroj zapněte podržením tlačítka ON/OFF na 2 sekundy
Přístroj nefunguje.	Nedotýkáte se inteligentního kontaktního pásku.	Přístroj běží, že se dotýkáte inteligentního kontaktního pásku.
Přístroj nelze zapnout.	Přístroj je zcela vybitý.	Přístroj nabijte.

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů. Na konci své životnosti výrobek nelikvidujte spolu s běžným odpadem, ale předejte jej na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Pomozte chránit životní prostředí recyklací použitých výrobků.



Karton a papír patří do sběrného kontejneru s nápisem papír. Plasty patří do sběrného kontejneru s nápisem plasty.



Baterky a baterie nelikvidujte spolu s běžným odpadem, ale odevzdejte je na sběrném místě, nebo odložte je do nádob k tomu určených např. recykloboxů, které jsou rozmístěny na celém území Slovenska. Předáním baterií a baterek přispějete svým dílem s ochraně životního prostředí.

Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:
www.hyaluron.sk/video

Importér:
Yalong Trade s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com
tel.: +421 907 173 910

www.hyaluron.sk
www.hyaluron-kosmetika.cz

