

Návod na použitie IPL epilátor



Pred prvým použitím si pozorne preštudujte návod na použitie kvôli vašej bezpečnosti.

OBSAH

- 1. Všeobecné informácie**
- 2. Bezpečnostné pokyny**
- 3. Kontraindikácie**
- 4. Pokyny pre ochranu prístroja**
- 5. Bezpečnostné opatrenia pre používanie**
- 6. Časový rozpis a odporúčania k používaniu**
- 7. Čo možno očakávať**
- 8. Popis častí prístroja a displeja**
- 9. Inštrukcie k používaniu**
 - A. Nastavenie prístroja**
 - B. Nastavenie intenzity**
 - C. Príprava pokožky**
 - D. Nastavenie 2 režimov**
 - E. Ošetrovanie pleti po epilácii**
 - F. Vedľajšie účinky**
 - G. Po použití prístroj odložte na bezpečné miesto**
- 10. Odstraňovanie porúch**
- 11. Upozornenie**
- 12. Informácie o životnom prostredí**
- 13. Parametre a technické dáta**

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

IPL epilátor využíva IPL (intenzívne pulzné svetlo), ktoré bezpečne redukuje nežiadúce ochlpenie v pokoji a v pohodlí domova. Prístroj sa používa na depiláciu rôznych oblastí tela (hlavne nohy, ruky a chrbát). Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie.

Prístroj sa ľahko ovláda a je určený na domáce použitie.

Epilácia pomocou intenzívneho pulzného svetla je vhodná pre svetlé typy s tmavým až čiernym ochlpením (**chlípek obsahuje veľa melanínu a epilácia je účinná**). Naopak, má **mizivú účinnosť pri osobách s blond, ryšavými, sivými alebo bielymi chlpkami a pri ženách aj mužoch s tmavou pokožkou (tzn. v chlpkoch je málo melanínu a nedochádza k požadovanej epilácii)**.

Vhodné farby chlpkov



Vhodné farby pokožky



2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prístroj nie je určený na použitie osobami ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti sú znížené, alebo osobami neskúsenými alebo neznaými.
- Uskladňujte prístroj mimo dosahu detí a nenechávajte ho bez dozoru.
- **POZOR:** nepoužívajte v blízkosti vody. Pre vašu bezpečnosť ho nepoužívajte v kúpeľni. Prístroj aj adaptér uchovávajte v suchu. Voda a elektrina sú nebezpečná kombinácia – nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí.
- Prístroj neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Tento prístroj nie je umývateľný. Preto ho nikdy neponárajte do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Na používanie alebo nabíjanie prístroja používajte adaptér dodaný s prístrojom.
- Poškodený adaptér alebo prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisným technikom.
- Adaptér uchovávajte dostatočne ďaleko od zdrojov tepla a ohňa.

- Ak Vám prístroj spadol alebo javí viditeľné známky poškodenia, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.
- V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od zdroja napájania a kontaktujte predajcu.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ako to, ktoré je súčasťou balenia.
- Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od zdroja napájania.
- Aby nedošlo k poškodeniu kábla, nenamotávajújte ho okolo prístroja a dbajte na to, aby nebol skrútený alebo zlomený.
- Pred každým použitím prístroj skontrolujte a nepoužívajte ho, ak je prístroj alebo adaptér poškodený.
- Na označenie oblasti nepoužívajte ceruzku ani pero, mohlo by vám to spôsobiť popáleniny.
- Adaptér aj aplikačné okienko sa počas používania môžu nahriať na vysokú teplotu. Skôr než sa ich dotknete, počkajte kým sa vychladia.
- Z hygienických dôvodov by prístroj mala používať len jedna osoba.

3. KONTRAINDIKÁCIE

Používanie prístroja je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:

- Tehotenstvo alebo kojenie.
- Čierna alebo tmavá pleť.
- Silné vystavenie pokožky slnečným lúčom alebo soláriu v posledných 28 dňoch.
- Tetovanie alebo permanentný make-up v oblasti, ktorú chcete ošetrovať.
- Špecifický stav pokožky v ošetrovanej oblasti: hnedé alebo čierne škvrny, veľké pehy, materské znamienka, bradavice alebo pigmentové škvrny.
- Ochorenie kože alebo rany: ekzém, lupienka, poranenie, otvorené rany alebo prebiehajúce infekcie v ošetrovanej oblasti, tvorba keloidov. Prístroj sa smie používať len na zdravej pokožke!
- Známa citlivosť na svetlo (fotosenzibilita) vyvolaná napr. liekmi.
- Používanie alfa-hydroxy kyselín (AHA), beta-hydroxy kyselín (BHA), prípravkov s obsahom retinolu napr. (izotretinoín), či kyseliny azelaínovej na pokožku (lokálne + užívanie liekov) v posledných 6 mesiacoch.
- Abnormálny stav pokožky spôsobený napr. cukrovkou či inými systémovými alebo metabolickými ochoreniami.
- Diéta na báze steroidov v posledných 3 mesiacoch.
- Liečba herpesov a oparov. V prípade opakovaných herpetických ochorení konzultujte používanie prístroja s lekárom.
- Epilepsia.
- Aktívny implantát, napr. kardiostimulátor, implantát proti inkontinencii, inzulínová pumpa a pod.
- Onemocnenie spojené s citlivosťou na svetlo, ako je porfýria, polymorfná svetelná dermatóza, solárna žihľavka, lupus a pod.
- Nedávna aplikácia krémov zvyšujúcich citlivosť na svetlo alebo esenciálnych olejov.

- Nedávne očkovanie.
- Skoršie nádorové ochorenie pokožky alebo oblasti s výskytom malígnych kožných nádorov.
- Ožarovanie alebo chemoterapia v posledných 3 mesiacoch.
- Všetky ďalšie dermatologické ošetrenia na báze svetla (laser a pod.).
- Všetky ďalšie prípady, kedy by Váš lekár posúdil ošetrenie ako riskantné.
- V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, aké riziká pre Vás použitie prístroja predstavuje, sa poraďte s ošetrovujúcim lekárom alebo dermatológom.

4. POKYNY PRE OCHRANU PRÍSTROJA

- Uistite sa, že nič nebráni prúdeniu vzduchu cez vetracie otvory.
- Prístroj nikdy nevystavujte tvrdým nárazom, netraste ním a zabráňte jeho pádu na zem.
- Ak zariadenie prenášate z veľmi chladného prostredia do teplého a naopak, pred použitím počkajte približne 3 hodiny.
- Prístroj pri používaní nevystavujte teplote pod 5 stupňov Celzia a nad 35 stupňov Celzia.
- Prístroj nevystavujte slnečnému žiareniu, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

5. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Používanie prístroja vyžaduje určité bezpečnostné opatrenia, aby nevznikli nežiaduce vedľajšie účinky:

- Nepoužívajte prístroj na opálenú pleť alebo krátko po vystavení pokožky slnku!
- Nepoužívajte prístroj na tmavú pleť. Pri ošetrení tmavej pleti prístrojom môžu vzniknúť vedľajšie účinky ako sú popáleniny, pľuzgier a zmeny zafarbenia pokožky (zvýšenie alebo zníženie pigmentácie).
- Nevystavujte sa bez najvyššej ochrany (SPF50+) slnečnému žiareniu dlhšie ako 1 hodinu: 4 týždne pred ošetrením prístrojom a 2 týždne po ošetrení prístrojom. Odporúčame prístroj používať v zime, na jar a na jeseň. V prípade vystavenia sa slnečným lúčom musíte použiť dostatočnú ochranu, napr. nepriesvitný odev alebo krém s ochranným faktorom (vyšším ako 50); túto ochranu musíte pravidelne používať 3 týždne pred ošetrením aj po ňom.
- Pozor: Vyhnite sa návšteve solária. Dodržujte rovnaké opatrenia ako pri vystavovaní pokožky slnečným lúčom.
- Nepoužívajte prístroj v prípade, že ste si na pokožku aplikovali samoopaľovací krém (chemický, prírodný). Pred použitím prístroja vyčkajte, pokým samoopaľovací účinok krému úplne zmizne.
- V prípade, že je prístroj rozbitý, poškodený alebo ak potrebuje opravu, kontaktujte oddelenie služieb pre zákazníkov.



- **Nepoužívajte prístroj v oblasti očí a v ich blízkosti, môže to viesť k závažnému poškodeniu zraku.** Prístroj nie je určený na epiláciu pokožky tváre. Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelných impulzov. Držte prístroj ďaleko od očí! **POZOR:** Pri nedodržaní bezpečnostných opatrení hrozí vážne poškodenie zraku!
- Neožarujte rovnaké miesto na pokožke pri jednom ošetrení dvakrát! Svetelné impulzy sa nesmú prekryvať!
- V prípade vzniku popálenín alebo pľuzgierov prístroj okamžite prestaňte používať!
- Pred použitím epilátora zakryte materské znamienka, tetovanie, hnedé a čierne škvrny, pehy, bradavice a kožné výrastky.
- Pred použitím prístroja ošetrovanú časť tela oholte, najlepšie 2-3 dni pred epiláciou.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že máte pokožku čistú. Môžete použiť sprchový gél a pokožku vysušte do sucha.
- Prístroj nepoužívajte na miešok, vagínu, pysky ohanbia, konečník, prsné bradavky a dvorce, na vnútornú časť uší a nosa, v oblasti krku, v oblasti hlavy, nad umelými náhradami, alebo v ich blízkosti napr. silikónové implantáty, podkožné injekčné porty (podávanie inzulínu) alebo piercingy! Tento zoznam nie je úplný, ak si chcete byť istý, či môžete prístroj používať, odporúčame sa poradiť so svojim lekárom alebo dermatológom.
- Prístroj nepoužívajte na žiadne časti tela, kde by ste mohli chcieť mať v budúcnosti ochlpenie.
- Prístroj nepoužívajte na iné účely ako je epilácia.
- Aplikáčné okienko prístroja nikdy nesmerujte tak, aby ste vyslali svetelný impulz do otvoreného priestoru. Aplikáčné okienko smerujte výhradne k pokožke. Pred vyslaním svetelného impulzu musí byť aplikáčné okienko celé v kontakte s pokožkou.
- Pozor, horúci povrch. Nedotýkajte sa šošovky špeciálneho tvárového nadstavca ani aplikáčného okienka prístroja prstami. Dbajte tiež na to, aby ste aplikáčné okienko prístroja udržiavali v čistote. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte drôtenky, drsné čistiace prostriedky, agresívne kvapaliny ako lieh, benzín a acetón,
- Pred použitím prístroja nikdy nepoužívajte na vyčistenie pleti čistiace pilingy.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte prístroj na aplikáciu na pokožku detí ani im používanie prístroja nedovoľte.
- V prípade zistenia abnormálneho chovania sa alebo v prípade poruchy, prestaňte prístroj používať.
- V prípade praskliny alebo škvŕn na svetelnej hlavici alebo v prípade poškodenia aplikáčného okienka okamžite prestaňte prístroj používať. Spojte sa s oddelením služieb pre zákazníkov.
- Nepokúšajte sa prístroj sami otvoriť alebo opraviť. Otvorením prístroja by ste sa vystavili nebezpečným elektrickým súčiastkam a energii pulzného svetla, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia a/alebo nevratné poškodenie očí.

6. ČASOVÝ ROZPIS A ODPORÚČANIA K POUŽÍVANIU

Prístroj je epilátor na domáce použitie, ktorý účinne a dlhodobo odstráni nežiaduce chĺpky a bráni ich opätovnému rastu vďaka technológii IPL (intenzívneho pulzného svetla).

Použitím technológie IPL prístroj bezbolestne odstraňuje chĺpky pomocou svetelných impulzov. Svetelný impulz sa zameria na pigment obsiahnutý v chĺpku (melanín), aby sa dostal až do koreňa a zabránil tak opätovnému rastu chĺpku. Čím viac melanínu teda chĺpok obsahuje (t.j. čím je tmavší), tým viac môže absorbovať svetla a tým lepšie budú aj výsledky. Technológiu IPL používajú profesionáli po celom svete už viac ako 15 rokov; boli vykonané klinické štúdie, ktoré preukázali jej účinnosť a neškodnosť.

Rastový cyklus chĺpka hrá v procese epilácie pomocou IPL prístrojom významnú úlohu. Preto je dôležité zoznámiť sa s celým rastovým cyklom chĺpka, aby ste pomocou prístroja dosiahli dlhodobé výsledky. Rastový cyklus chĺpka sa skladá z troch nasledujúcich fáz: anagénne obdobie (obdobie aktívneho rastu), katagénne obdobie (prechodné obdobie), telogénne obdobie (pokojové obdobie).

Dĺžka celého rastového cyklu je v priemere 18-24 mesiacov. Väčšina chĺpkov je v niektorej z dvoch pokojových fáz (katagénna a telogénna). Na chĺpky v pokojových fázach nemá prístroj žiadny účinok. Prístroj však pôsobí na chĺpky v rastovej fáze (anagénnej). Na to, aby ste zasiahli všetky chĺpky a dosiahli tak dlhodobé výsledky, je preto potrebných viac ošetrení prístrojom.

Naplánujte si epilačné ošetrenie prístrojom vopred! Odporúča sa dodržať nižšie uvedený časový rozpis, pretože vedie k vynikajúcim výsledkom:

- Prvé 4 epilačné ošetrenia prístrojom musia byť vykonané v odstupe 5-7 dní po sebe.
- Ďalšie 4 epilačné ošetrenia prístrojom sa vykonávajú v odstupe 7 dní po sebe.
- Ďalšie 2 epilačné ošetrenia prístrojom sa vykonávajú v odstupe 15 dní po sebe (do dosiahnutia požadovaného výsledku).
- Následne v prípade nového rastu chĺpkov budete prístroj používať príležitostne, pokiaľ nedosiahnete trvalý výsledok; odstup medzi ošetreniami musí byť najmenej 4 týždne.

Pozor:

- Ošetrenie rovnakej oblasti častejšie 2x za týždeň nevedie k lepším výsledkom a môže vyvolať nežiaduce účinky.
- Odporúča sa prístroj používať rozumne, t.j. neopakovať ošetrenie prístrojom donekonečna. Na dosiahnutie veľmi uspokojivých výsledkov postačí komplexné ošetrenie (celkom 7-8 epilačných ošetrení) raz ročne.
- Poznámka: Chĺpky v pokojovom štádiu sa môžu v dôsledku hormonálnych faktorov a fyziologických zmien stať aktívnymi. Je možné vykonávať udržiavacie epilačné ošetrenie prístrojom (medzi ošetreniami musí byť odstup najmenej 4 týždne).

Účinnosť prístroja sa môže líšiť:


- medzi rôznymi osobami,
- podľa ošetrovanej oblasti,
- podľa farby chĺpkov.

- Prístroj nie je účinný na biele, sivé, ryšavé alebo svetlé blond chĺpky. Biele, sivé, ryšavé alebo svetlé blond chĺpky majú málo melanínu a na ošetrovanie IPL svetlom pomocou prístroja dostatočne nereagujú.

7. ČO MOŽNO OČAKÁVAŤ

- Po prvej epilácii prístrojom pôsobia chĺpky dojmom, že naďalej rastú (pokožka ich vytláča). Po dvoch týždňoch zistíte, že tieto chĺpky vypadávajú alebo sa oddeľujú od vlasového vďaka. Odporúčame za tieto chĺpky neťahat' s cieľom ich uvoľnenia. Nechajte chĺpky prirodzene vypadnúť. Môže sa stať že niektoré chĺpky stále rastú. To sú pravdepodobne chĺpky, ktoré počas prvého ošetrovania neboli vo fáze rastu.
- Po 2-3 ošetreniach by sa mal objaviť viditeľný úbytok v raste ochlpenia. Na to, aby ste účinne odstránili všetky chĺpky, je potrebné, aby ste pokračovali v ošetrovaní podľa časového rozpisu.
- Po 4-5 ošetreniach by ste mali vidieť významný úbytok v raste ochlpenia a úbytok hustoty ochlpenia.
- Pre získanie želaných výsledkov pokračujte v ošetrovaní (každých 4-8 týždňov) podľa potreby.

8. POPIS ČASTÍ PRÍSTROJA A DISPLEJA

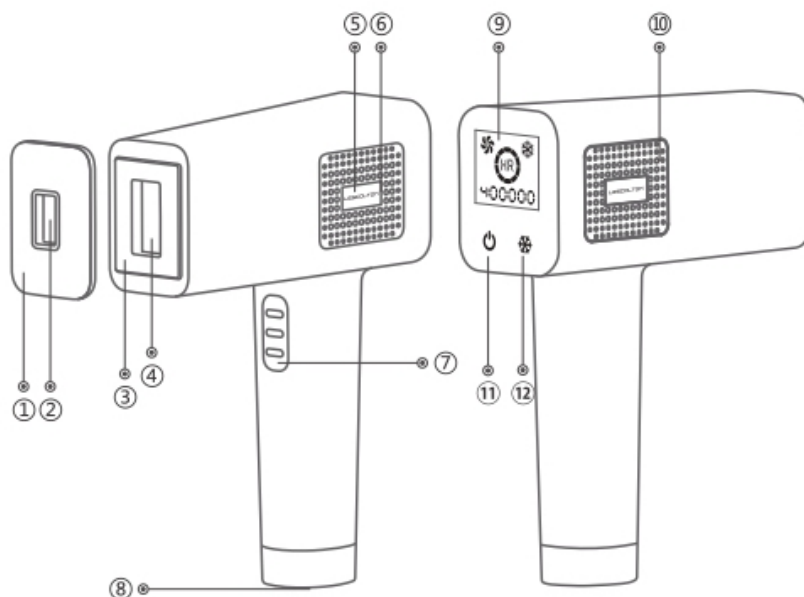

- 1 - kryt lampy
- 2 - výstup svetla z lampy
- 1 a 2 – malé okienko pre ošetrovanie malých plôch (oblasť tváre)**
- 3 - chladiaci kompresný panel
- 4 – zásuvka pre lampu
- 3, 4 – veľké okienko pre ošetrovanie veľkých plôch**
- 5 - kontrolka pripravenosti / indikátor kontaktu
- 6 - prívod vzduchu (ventilátor)

- 7 - tlačidlo impulzu pre emisiu energie / svetla
- 8 - napájacie rozhranie
- 9 - obrazovka displeja
- 10 - výstup vzduchu (ventilátor)
- 11 – ON / OFF pre zapnutie / vypnutie 2sek. / tlačidlo pre nastavenie intenzity
- 12 - Tlačidlo prepínania pracovného režimu (odstraňovanie chlpkov HR / chladivá funkcia / omladenie pokožky SR)

DISPLEJ

	Chladivá funkcia
	Úroveň intenzity svetla. Čím vyššia intenzita, tým vyššia je energetická náročnosť.
	Režim HR znamená Hair removal (odstraňovanie chlpkov) Režim SR znamená Skin rejuvenation (omladenie pleti)
	Počet zostávajúcich impulzov - Počet impulzov žiarovky je 400 000.

PRACOVNÝ REŽIM

	HR – Chladivá funkcia a režim odstraňovania chlpkov sú nastavené súčasne.
	SR – Chladivá funkcia a režim omladenie pleti sú nastavené súčasne.
	SR - Režim omladenia pleti je nastavený. BEZ chladivej funkcie.
	HR - Režim odstraňovania chlpkov je nastavený. BEZ chladivej funkcie.

9. INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU

Upozornenie:

1. Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 25 minút. Po 25 minútach prístroj vypnite a nechajte ho vypnutý na 10 minút pred ďalším použitím!
2. Keď používate prístroj dlhšiu dobu a prístroj je prehriaty, nie je možné vypnúť chladiacu funkciu okamžite, aby ste predišli popáleniu pokožky. Vypnite prístroj a nechajte ho vypnutý 20 minút, aby sa schladil. Následne ho zapnite a môžete vypnúť chladiacu funkciu, keď chcete pokračovať bez nej.
3. Keď vypnete chladiacu funkciu, chladiaci kompresný panel sa nahreje na vysokú teplotu. Neprikladajte chladiaci kompresný panel ku pokožke, hrozí popálenie! Vypnite prístroj a počkajte 20 minút.
4. Neošetrujte rovnakú plochu viac ako 3x počas 1 ošetrovania.

Pred použitím prístroja oholte depilovanú časť pokožky. Začnite najnižším stupňom a postupne dvíhajte výkon, aby to bolo znesiteľné.

A. Nastavenie prístroja

KROK 1:

Oholte pokožku a uistite sa, že je pokožka čistá a suchá.

KROK 2:

Zasuňte konektor do prístroja a adaptér do zásuvky. Podržte tlačidlo ON na 2 sekundy – prístroj sa zapne a chladenie sa spustí.

KROK 3:

Počas používania musíte mať okuliare, aby sa záblesky nedostali do očí. Nasadíte si ich.

KROK 4:

1. ON/OFF tlačidlo prístroj zapne aj vypne. Podržte 2 sekundy.
2. Tlačidlami ON/OFF meníte výkon. Stlačením sa zvýši z 1 na 10 paličiek. Prednastavená je intenzita 1 (1 palička - najnižšia). Nastavte si intenzitu podľa inštrukcií na takú úroveň, ktorá je vám akceptovateľná, aby bolo ošetrovanie príjemné.
3. Ak sa dotknete pokožky, senzor zareaguje a indikátor kontaktu sa rozblíka. Stlačte tlačidlo impulzu a spustí sa emisia energie.
4. Na depiláciu veľkých plôch odstráňte kryt z lampy. Na depiláciu malých plôch vráťte kryt z lampy naspäť, čím sa zmenší ošetrovaná plocha.

KROK 5:

Prístroj má smerovať ku pokožke kolmo v mieste, ktoré chceme ošetrovať. Spustíte emisiu energie a prejdite na ďalšie miesto. Jedno miesto ošetríte 2x, maximálne 3x!

Dôležité upozornenie pre režim SR (skin rejuvenation) omladenie tváre: Nastavenie a obsluha prístroja je úplne rovnaká ako pri depilačnom režime. Pre oblasť tváre postup:

- Použite aplikačné okienko malé!
- Prepnite režim z HR (depilácia) na SR (omladenie).
- Nastavte intenzitu na úroveň 1, nikdy nie vyššiu!
- Nasadte si okuliare.
- Jedno miesto ošetríte maximálne 1x!
- Ošetrovanie tváre pre omladenie opakujte 1x do týždňa počas nasledujúcich 2-3 mesiacov.

B. Nastavenie intenzity

Nastavenie intenzity ponúka 5 úrovní intenzity od najnižšej (úroveň 1) po najvyššiu (úroveň 10). Úroveň intenzity označuje intenzitu svetelného impulzu aplikovaného na pokožku pri použití prístroja. Na nastavenie správnej úrovne intenzity pre Vašu pokožku postupujte takto:

1. Definujte svoj typ pokožky

Na nastavenie potrebnej intenzity pri použití prístroja je dôležité stanoviť svoj typ pokožky napr podľa schémy Fitzpatricka.



Fototyp I Veľmi bledá pleť, mliečna, Neopáli sa, vždy sa spáli.

Fototyp II Svetlá pleť, Opáli sa minimálne, často sa spáli.

Fototyp III Krémovo svetlá pleť. Opaľuje sa stredne, príležitostne sa spáli.

Fototyp IV Mierne hnedá pleť. Opaľuje sa dobre, zriedka sa spáli.

Fototyp V Tmavá pleť. Opaľuje sa veľmi ľahko, veľmi zriedka sa spáli.

Fototyp VI Čierna pleť. Čierna pleť.

2. Vykonať skúšobné ošetrovanie prístrojom

Bez ohľadu na svoj kožný typ vykonajte 48 hodín pred prvým ošetrením skúšku prístroja na ruke (niekoľko svetelných impulzov) s nastavenou úrovňou intenzity 1.

3. Nastavte potrebnú úroveň intenzity pre svoj typ pleti

Ak Vaša pokožka na test reagovala dobre a počas 48 hodín po teste nepociťujete abnormálne reakcie ani nepohodlie, môžete úroveň intenzity na prístroji pri ďalších epilačných ošetreniach postupne zvýšiť podľa schémy:

U osôb s typom I:

Prvé ošetrenie: Nastavte prístroj najviac na úroveň intenzity 3-5.

Ďalšie ošetrenie: Ak ste pri predchádzajúcom ošetrení nepociťovali žiadne zvláštne nepohodlie ani nemali nepríjemné pocity, môžete intenzitu zvýšiť, aby bolo ošetrenie komfortné (pre ďalšie ošetrenie) max. na úroveň 10 u tejto farby pleti.

U osôb s typom II alebo III:

Prvé ošetrenie: Nastavte prístroj najviac na úroveň intenzity 2-4.

Ďalšie ošetrenie: Ak ste pri predchádzajúcom ošetrení nepociťovali žiadne zvláštne nepohodlie ani nemali nepríjemné pocity, môžete intenzitu zvýšiť, aby bolo ošetrenie komfortné (pre ďalšie ošetrenie) max. na úroveň 7 u tejto farby pleti.

U osôb s typom IV alebo V:

Prvé ošetrenie: Nastavte prístroj najviac na úroveň intenzity 1-3.

Ďalšie ošetrenie: Ak ste pri predchádzajúcom ošetrení nepociťovali žiadne zvláštne nepohodlie ani nemali nepríjemné pocity, môžete intenzitu zvýšiť, aby bolo ošetrenie komfortné (pre ďalšie ošetrenie) max. na úroveň 6 u tejto farby pleti.

U osôb s typom VI:

Používanie prístroja nie je povolené! Pri veľmi tmavej alebo opálenej pokožke hrozí riziko výskytu reakcii pokožky ako je hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia, silné sčervenanie, či popáleniny.

C. Príprava pokožky

Pred použitím prístroja je pokožku nutné oholiť (2-3 dni, najmenej však 24 hodín vopred), musí byť čistá a suchá. Pozor: Pred použitím prístroja sa neepilujte (elektrickým epilátorom, pinzetou ani voskom). Epilácia (odstránenie chlpkov s koreňom) by spôsobila neúčinnosť ošetrenia pulzným svetlom (IPL).

Pokrytie ošetrovanej oblasti

Na zaistenie správneho pokrytia ošetrovanej plochy je potrebné na pokožku aplikovať svetelné impulzy v radoch, vždy z jedného konca na druhý a systematicky postupovať jeden rad za druhým. Vyhnete sa tak vedľajším účinkom spôsobeným prekryvaním svetelných impulzov. Pri umiestnení okienka pre ďalší impulz tak, aby sa impulzy neprekrývali alebo naopak neboli veľmi ďaleko od seba, Vám pomôžu odtlačky, ktoré vzniknú tlakom aplikačného okienka prístroja na pokožku.

D. Nastavenie presného režimu a automatického režimu

Konektor na prívodnom kábli adaptéra zapojte do konektora na prístroji (nachádza sa na rukoväti prístroja). Druhý koniec adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky. Zapnite prístroj.

Prístroj ponúka presný režim a AUTO režim!

Presný režim je prednastavený a zaisťuje bezpečné ošetrenie stláčaním veľkého tlačidla po priložení k pokožke. Presný režim je manuálny režim a používa sa na ošetrenie malých plôch.

Postup:

1. Prístroj zapnite tlačidlom ON/OFF. Budete počuť slabý zvuk ventilátora. Je to úplne normálne.
2. Nastavte požadovanú úroveň intenzity pomocou tlačidla ON/OFF
3. Aplikáčne okienko priložte na požadované miesto na pokožke tak, aby sa pokožky dotýkalo celou plochou. Kontrolka sa rozblíka.
4. Stlačte tlačidlo impulzu. Prístroj emituje svetelný impulz.
5. Aplikáčne okienko oddiaľte od ošetrovanej plochy.
6. Premiestnite aplikáčne okienko na ďalšiu plochu, ktorú chcete ošetriť. Po cca. 2 sekundách sa opäť rozsvieti blikajúca kontrolka, prístroj je pripravený na vydanie ďalšieho svetelného impulzu.

Auto režim je automaticky emituje svetelný impulz po priložení aplikáčneho okienka k pokožke.

Postup:

1. Prístroj zapnite tlačidlom ON/OFF. Budete počuť slabý zvuk ventilátora. Je to úplne normálne.
2. Nastavte požadovanú úroveň intenzity pomocou tlačidla ON/OFF.
3. Podržte tlačidlo impulzu pre emitovanie energie na 2 sekundy – prístroj vydá zvuk 2x po sebe a prístroj sa prepne do režimu auto. V tomto režime ošetríte len veľké plochy napr. chĺpky na nohách.
4. Aplikáčne okienko priložte na požadované miesto na pokožke tak, aby sa pokožky dotýkalo celou plochou. Kontrolka sa rozblíka. Prístroj automaticky po kontakte s pokožkou emituje svetelný impulz.
5. Aplikáčne okienko oddiaľte od ošetrovanej plochy.
6. Premiestnite aplikáčne okienko na ďalšiu plochu, ktorú chcete ošetriť. Prístroj automaticky po kontakte s pokožkou emituje ďalší svetelný impulz.

Pre vrátenie sa do presného (manuálneho) režimu podržte tlačidlo impulzu pre emitovanie energie na 2 sekundy – prístroj vydá zvuk 1x a prepne sa do presného režimu.

Vypnite prístroj podržaním tlačidla ON/OFF. Prístroj sa automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.

E. Ošetrovanie pleti po epilácii

Plochy pokožky ošetrované prístrojom počas 2 týždňov po ošetrení nevystavujte bez ochrany slnku. Počas najmenej dvoch týždňov po poslednej epilácii prístrojom chráňte pokožku krémom s ochranným faktorom vyšším ako 50 alebo nepriesvitným odevom. Na plochách ošetrovaných prístrojom nepoužívajte po epilácii ošetrované parumované krémy ani deodoranty.

F. Vedľajšie účinky

Vaša pokožka môže vykazovať mierne znaky začervenania, svrbenia, šteklenia, alebo môže byť teplá na dotyk. Táto reakcia je úplne neškodná a rýchlo sa stratí. Ak je pokožka suchá, použite neparumovaný hydratačný krém, najlepšie bez parabénov. Ide o bežne reakcie pokožky.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

- Mierne nepríjemný pocit na pokožke: Aj keď je prístroj obvykle veľmi dobre znášaný, väčšina užívateľov pociťuje pri použití mierne nepríjemný pocit, často popisovaný ako brnenie v ošetrovanom mieste. Obvykle tento pocit pretrváva len počas aplikácie, najviac niekoľko minút po nej. Akékoľvek nepríjemné pocity presahujúce vyššie uvedené sú abnormálne a znamenajú, že buď by ste mali s ošetrovaním prístrojom prestať, pretože ho neznášate, alebo je nastavená úroveň intenzity svetelného impulzu veľmi vysoká.

- **Začervenanie:** Bezprostredne po ošetrení prístrojom alebo v nasledujúcich 24 hodinách môže Vaša pokožka začervenat'. Začervenanie obvykle do 24 hodín zmizne. Ak začervenanie pretrváva viac ako 2-3 dni, navštívte lekára.
- **Precitlivosť pleti:** Na oštrenej ploche je pokožka citlivejšia, môže sa vysúšať alebo lúpať.
- **Popáleniny alebo rany:** Veľmi vzácne môžu po ošetrení prístrojom vzniknúť na pokožke poranenia alebo popáleniny. Úplné vyliečenie si môže vyžadovať niekoľko týždňov a vo výnimočných prípadoch môže po poranení zostať jazva. V prípade, že táto reakcia neustúpi v priebehu 1 mesiaca, alebo ak sa pokožka infikuje, navštívte lekára.
- **Jazva:** Aj keď sú tieto prípady veľmi vzácne, môžu vzniknúť trvalé jazvy. Obvykle majú jazvy podobu povrchového poškodenia belavého sfarbenia (hypotrofické). Jazva však môže byť aj veľká a červená (hypertrofická) alebo veľká a zasahovať aj mimo poranenú oblasť (keloidná). Na zlepšenie vzhľadu poškodeného miesta môžu byť nutné náročnejšie kozmetické ošetrenia.
- **Zmena pigmentácie:** Prístroj sa zameriava na koreň chĺpka, konkrétne na pigmentované bunky vlasové cibulky. Existuje však riziko dočasnej nadmernej pigmentácie - hyperpigmentácie (hnedá škvrna) alebo zníženej pigmentácie - hypopigmentácie (vybielenie tkz. svetlejšia škvrna) okolitej pokožky. Riziko zmeny pigmentácie je vyššie u osôb tmavej pleti. Obvykle je zmena pigmentácie a vyblednutie pleti dočasné. Prípady trvalého zvýšenia alebo zníženia pigmentácie sú vzácne. Ak sa zmena farby nestratí v priebehu 2 týždňov, odporúčame navštíviť lekára. Postihnuté oblasti neošetrujte, kým sa zmena farby pokožky nestratí a pokožka nenadobudne normálny odtieň.
- **Nadmerné začervenanie a opuch:** V niektorých vzácných prípadoch môže pokožka ošetrená prístrojom veľmi sčervenat' a opuchnúť. Táto reakcia je častejšia na citlivých častiach tela. Začervenanie a opuch by mali zmiznúť o 2-7 dní, počas ktorých budete na postihnuté miesto pravidelne prikladať ľad. Opatrné umytie nepredstavuje problém, vyhnite sa však akémukoľvek vystaveniu slnku.
- **Infekcia:** Kožná infekcia je nesmierne vzácna, po popálení alebo inom poškodení pokožky vyvolanom prístrojom k nej však môže dôjsť. Môže to byť v dôsledku drobnej ranky, popáleniny, či podráždenia pokožky.
- **Modrina:** Veľmi vzácne môže použitie prístroja vyvolať modrofialovú modrinu, ktorá môže pretrvať 5 - 10 dní. Ako modrina zmizne, môže pokožka nadobúdať hrdzavé sfarbenie (nadmerná pigmentácia), ktoré môže byť trvalé. Je normálne, že po epilačnom ošetrení prístrojom budete pociťovať určité nepohodlie. Ak nepríjemný pocit alebo nepohodlie pri alebo po ošetrení prístrojom pretrváva, navštívte lekára.
- **Epidermické zaparenie (ostro ohraničená zhnednutá plocha, ktorá sa často objavuje v prípade tmavších odtieňov pokožky a nesprievádza ju pocit suchej pokožky) – výskyt tejto reakcie je veľmi zriedkavý. V prípade, že táto reakcia neustúpi do 1 týždňa, odporúčame navštíviť lekára. Prístroj v tejto oblasti prestaňte používať.**
- **Folikulitída (opuch v okolí vlasových folikulov spojený s tvorbou pluzgierikov):** výskyt tejto reakcie je veľmi zriedkavý a je dôsledkom preniknutia baktérií cez narušenú pokožku. V prípade výskytu tejto reakcie odporúčame navštíviť lekára, pretože si liečba folikulitídy môže vyžadovať antibiotickú masť.
- **Nadmerná bolesť:** táto reakcia sa môže objaviť počas ošetrenia alebo po ňom, ak ste zariadenie použili na ošetrenie pokožky, ktorá nie je bez ochlpenia, ak ste použili príliš vysoké nastavenie intenzity svetla vzhľadom na farbu vašej pokožky, ak ste na tú istú oblasť aplikovali viac ako jeden impulz, a v prípade, že ste zariadenie použili na ošetrenie oblastí s otvorenými ranami, zápalom, infekciou, tetovaním, popáleninami atď.

G. Po použití prístroj odložte na bezpečné miesto

Prístroj vypnite, odpojte kábel. Nechajte prístroj vychladnúť na 20 minút. Očistite ho jemnou suchou handričkou a odložte na bezpečné a suché miesto s konštantnou teplotou a vlhkosťou a mimo dosahu detí.

Odporúčame prístroj a hlavne aplikačné okienko čistiť ošetrení len suchou handričkou bez vyvíjania tlaku po každom epiláčnom ošetrení.

10. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Možné problémy

- Prístroj sa nezapína Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený k prístroju a je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Pri stlačení spínača prístroj nevyšle impulz: Presvedčte sa, či je aplikačné okienko prístroja celou plochou v kontakte s pokožkou, a či kontrolka bliká. Ak nesvieti, prístroj vypnite na 25 minút, nechajte ho vychladiť a opäť zapnite. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu
- Adaptér sa prehrieva. Je to normálny jav.

11. UPOZORNENIE

Za žiadnych okolností nerozoberajte zariadenie. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobca, dovozca ani predajca nepreberá žiadnu zodpovednosť.

12. INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ



Tento produkt je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, odovzdajte ho na zbernom mieste na recykláciu elektronických a elektrických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov. Výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

13. PARAMETRE A TECHNICKÉ DÁTA

Názov produktu: IPL epilátor pre použitie v pohodlí domova	Intenzita: 10 stupňov intenzity
Malá plocha: 1.85cm ² Veľká plocha: 4.0cm ²	Presný (manuálny) režim Automatický režim
Nominálne napätie: vstupné 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz, výstupné 24V = 2.5A	Model: T012C
Prevádzkové podmienky: Teplota: 5 °C až 40 °C, Relatívna vlhkosť: 20 % až 90 %	Menovitý príkon: 43 W+/-5W
Vysielané vlnové dĺžky 530 až 1200 nm Životnosť: 400 000 zábleskov	Teplota pri skladovaní: konštantná Vlhkosť pri skladovaní: konštantná
Obsah balenia: epilátor, napájací kábel s adaptérom, ochranné okuliare, žiletka, návod na použitie, krabica	

IPL EPILÁTOR pre použitie v pohodlí domova

Dovozca: Yalong Trade s.r.o, M.Bodického 1517/14,05001 Revúca

E-mail: yalongtrade@gmail.com

Tel.: 0907 173 910

www.kingray.sk / www.kingray.sk/cz

