

*Beauty®
Biowave*



MIKROPRÚDOVÁ A GALVANICKÁ ŽEHLIČKA
5V1 NO TIME

NÁVOD NA POUŽITIE

POPIS ČASTÍ PRÍSTROJA

Device : Masážna hlavica

Power / Tlačidlo pre
zapnutie a vypnutie
(dlhé stlačenie)

Mode / Tlačidlo pre
výber programu
(krátke stlačenie)

LED svetlo

LCD displej

Tlačidlo pre nastavenie intenzity

Power/Mode

Tlačidlo pre nastavenie teploty


Úchytka

Nabíjací port

Ventilátor

Kovová dotyková
plocha pre aktivovanie
iónov

Nabíjací kábel

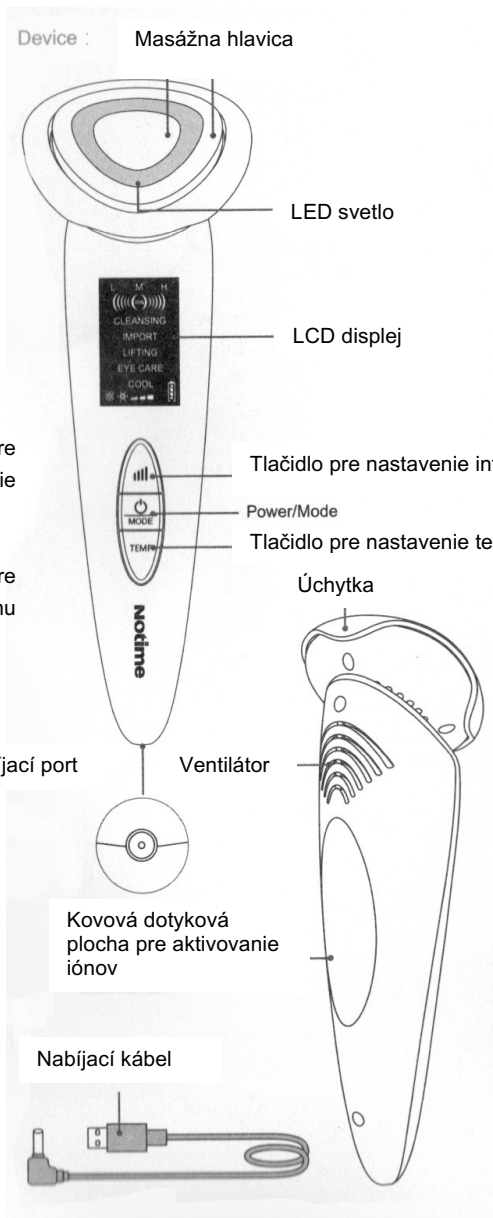

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, odporúčame si prečítať návod na použitie skôr, ako sa začnete prístroj používať, a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

BALENIE OBSAHUJE:

Kozmetický prístroj, stojan, USB kábel pre nabíjanie, návod na použitie.

Bezpečnostné upozornenia:

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou a nepoužívajte ho pod vodou.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Napájací ani nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. Prístroj používajte alebo nabíjajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi. Pred použitím ho odpojte od napájania.
- Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne predmety.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospelých osôb, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.

- Nenechajte deti hrať sa s prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
- Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmami alebo koncentrátmi.
- Ak máte alergiu na kovy, prístroj nepoužívajte.
- Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári.
- Nepoužívajte prístroj počas nabíjania, po páde na zem, ak došlo k jeho poškodeniu.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil počas prepravy.

UPOZORNENIE: Prístroj za žiadnych okolností nerozoberajte a používajte ho výhradne v súlade s dodaným návodom na použitie. Rozobratie prístroja, prípadne jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.

Oblasti tela, ktoré by ste nemali ošetrovať

- Miecha a chrbtica
- Očné bulvy, očné viečka, pery
- Zóny intenzívneho rastu u detí a dospievajúcich
- Oblasť pohlavných žliaz
- Oblasť štítnej žľazy
- Oblasť tváre, operované pred menej ako mesiacom
- Okolie očí, úst a oblastí, kde bol vykonaný kozmetický (napr. skrášľujúci) zákrok

Kontraindikácie

- Tehotenstvo, dojčenie, menštruácia
- Kardiostimulátor, implantovaný orgán
- Migrény, chronické bolesti hlavy, závraty
- Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
- Horúčkovité stavy a zápaly, akútna infekcia a zápal (napr. akné, ružienka, psoriáza)
- Bakteriálne infekcie kože, akútne hermetické infekcie
- Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
- Oblasť tela so závažnými poruchami krvného obehu
- Nedostatočný krvný obeh

- Ischemická choroba srdca
- Srdcová arytmia, ochorenia krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia
- Cievne choroby končatín (trombóza, flebitída)
- Poruchy koagulácie (zrážania krvi)
- Poškodená a popraskaná pokožka, alergia na elektromagnetické vlnenie, tetovanie
- Pokožka spálená zo slnka pred menej ako mesiacom
- Akútne reumatické ochorenia
- Oslabený imunitný systém, auto imunitné ochorenie


POZNÁMKA: Ak máte pochybnosti, či môžete prístroj používať, kontaktujte vášho predajcu, vašu kozmetičku, alebo odborného lekára.

Funkcie kozmetického prístroja

- Galvanoterapia – kladný galvanický prúd (pozitívne ióny)
- Galvanoterapia – záporný galvanický prúd (záporné ióny)
- EMS – elektrická mikroprúdová stimulácia
- Červené svetlo – fotónová terapia
- Modré svetlo – fotónová terapia
- Chladenie
- Masáž – mikrovibračná funkcia
- Hrejivá funkcia

Nabíjanie kozmetického prístroja


- Pred použitím musí byť prístroj úplne nabitý. Štandardné nabíjanie prístroja trvá 3 hodiny.
- Nabíjací kábel pripojte do nabíjacieho portu a druhý koniec do portu počítača.
- Počas nabíjania bude na displeji blikať kontrolka nabíjania.
- Keď je batéria naplno nabitá, na displeji bude svietiť kontrolka plného stavu batérie.

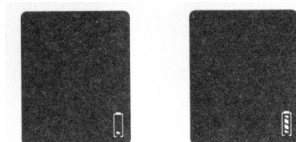

Funkcie kozmetického prístroja

Tento kozmetický prístroj je určený na zlepšenie kvality vašej pleti. Pomáha eliminovať vrásky, spevňuje pokožku, dokonale vyčistí vašu pleť do hĺbky, zlepši jej prekrvenie, textúru pokožky, napomáha pri absorpcii aktívnych látok. Už po niekoľkých ošetreniach bude vaša pokožka vyzerat' oveľa jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne definovanými kontúrami.

Hlavica na vrchnej strane prístroja má zabudovanú technológiu mikroprúdovej stimulácie a technológiu emitácie iónov.

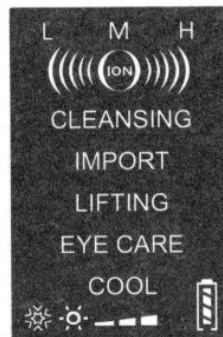

Vďaka kombinácii až 3 funkcií sa z prístroja stane ideálny nástroj na čistenie pleti.

- Program **CLEANING** pre hĺbkové čistenie pleti – Hrejivá funkcia + kladné ióny + mikrovibrácie

Keď aktivujete program **IMPORT** spravíte z tejto hlavice dokonalého pomocníka pre implementovanie aktívnych látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyaluronová) aj do najhlbších vrstiev pokožky.

- Program **IMPORT** pre výživu pleti – Hrejivá funkcia + záporné ióny + červené svetlo + mikrovibrácie

Program s mikroprúdovou technológiou poskytne skvelý facelifting pleti vašu pokožku.

- Program **LIFTING** pre spevnenie pleti – Hrejivá funkcia + EMS mikroprúdová stimulácia

Starostlivosť o vašu delikátnu a citlivú oblasť vám poskytne program **EYE CARE** s ktorým si môžete byť istý, že ošetrovanie je bezpečné a účinné.

- Program **EYE CARE** pre ošetrovanie pokožky v okolí očí – Hrejivá funkcia + mikrovibrácie + červené svetlo

Kombináciou modrého svetla a chladenia dosiahnete stiahnutie pórov, ukludnenie podráždenej pokožky a skvelého pomocníka v boji s akné.

- Program **COOL** chladenie – chladivá funkcia + modré svetlo

Používanie kozmetického prístroja

ZAPNUTIE PRÍSTROJA A PREPÍNANIE REŽIMOV

UPOZORNENIE: Pred použitím odpojte prístroj od nabíjania.

1. Stlačte tlačidlo ZAP / VYP na 3 sekundy (dlhé stlačenie) pre zapnutie prístroja.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla ZAP / VYP na 1 sekundu (krátke stlačenie) zvolíte želaný program.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla pre nastavenie intenzity nastavíte nízku (L), strednú (M) a vysokú (H) intenzitu daného programu.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty nastavíte nízku teplotu (1 palička), strednú teplotu (2 paličky) alebo vysokú teplotu (3 paličky) hrejivej funkcie.

VYPNUTIE PRÍSTROJA

Prístroj sa v každom režime automaticky vypne po ubehnutí času, ktorý je špecifický pre konkrétny program.

Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo ZAP / VYP na 2 sekundy a prístroj sa vypne.


DÔLEŽITÉ:

- Pre efektívnu a účinnú emitáciu iónov režime čistenia a výživy sa musíte dotýkať kovovej dotykovej plochy. Takto sa uzavrie okruh a ošetrovanie môže fungovať.
- Pokiaľ sa počas používania prístroja alebo po jeho použití objaví začervenanie pokožky, prestaňte prístroj používať a na pokožku aplikujte studené obklady.
- Pre aplikáciu si umyte ruky mydlom, aby boli dôkladne odmastené. Počas aplikácie udržiavajte ruky mierne navlhčené.


PROGRAM 1 CLEANING – čistenie pleti

V tomto režime emituje prístroj kladné ióny, vďaka čomu sa z povrchového tkaniva pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je tak účinne čistená aj do hĺbky. Súčasne prístroj generuje aj mikrovibrácie a zahrieva pokožku, čím sa zvýši prekrvenie oblasti, rozkmitá tkanivo a čistenie pleti je tak oveľa dôkladnejšie.

1. Pre samotným čistením odstráňte make-up a vyčistite pleť od nečistôt.
2. Na hlavicu prístroja umiestnite tampónik a zafixujte ho úchytkou. Navlhčite tampónik vašim obľúbeným čistiacim tonikom. Môžete použiť aj čistiacu penu, alebo čistiaci gél.

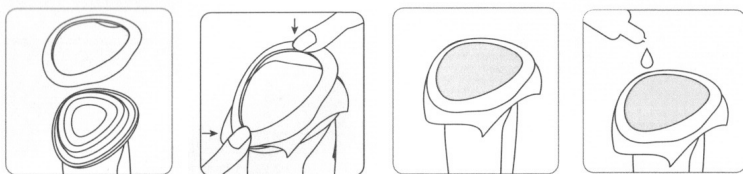

3. Prepnete prístroj do režimu CLEANING.
4. Umiestnite hlavicu kolmo na pokožku a jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicom po celej tvári. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica ľahko kľže.
5. Čistenie vykonávajte po dobu 4 minút 2-3x týždenne, u citlivej pleti po dobu 1-2 minúty 1-2x týždenne.
6. Prístroj sa po uplynutí času automaticky prepne do pohotovostného režimu.
7. Odstráňte tampónik a hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.
8. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

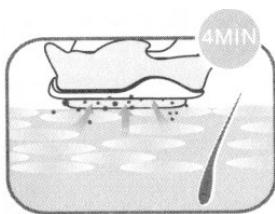


PROGRAM 2 IMPORT – výživa pleti

V tomto režime emituje prístroj záporné ióny v kombinácii s červeným svetlom, hrejivou a mikrovibračnou funkciou. Táto kombinácia umožňuje vynikajúcu absorpciu aktívnych látok z kozmetických prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do hlbších vrstiev pokožky.

1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby (pocit suchej pleti) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu Beauty Biowave. Keďže aplikovaný kozmetický prípravok musí byť vodivý, nepoužívajte pleťový krém ani fluid.
2. Prepnete prístroj do režimu IMPORT.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania tlaku prechádzajte hlavicom po celej tvári a sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica ľahko klíže.
4. Ošetrovanie vykonávajte po dobu 1-4 minút 2-3x týždenne, u citlivej pleti po dobu 1-2 minúty 1-2x týždenne.
5. Prístroj sa po uplynutí času automaticky prepne do pohotovostného režimu.
6. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou.

POZNÁMKA: Príliš veľké množstvo gélu alebo séra by mohlo spôsobiť šupinky na pokožke. Preto nie je vhodné použiť na pokožke na 1 aplikáciu viac ako 1-2 stlačenia aplikátora hyalurónového gélu, alebo séra. Ošetrovanie je odporúčané robiť vo vlhkom prostredí napr. v kúpeľni po sprchovaní, nakoľko kyselina hyalurónová viaže vlhkosť. Nie vždy to je však možné, preto to je skôr len odporúčanie.

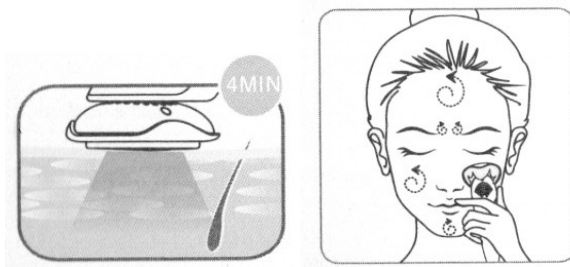


PROGRAM 3 LIFTING – omladenie pleti

V tomto režime prístroj využíva technológiu EMS pre spevnenie pleti a zvýšenie produkcie kolagénu. EMS je terapia mikropúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže imitovať pocit reálnej masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi efektívna na vyčistenie kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie krvného obehu v oblasti aplikácie.

Táto mikropúdová terapia stimuluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu s nízkymi frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to ja pasívny pohyb.

Technológia EMS aktivuje bunky na povrchu aj vo vnútorných vrstvách pokožky, výrazne stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky a zanecháva pokožku hebkú a sviežu.,


1. Na pokožku tváre naneste cca 2 mm vrstvu vodivého gélu (napr. Beauty Biowave). Nepoužívajte tampónik. Gél pokožku hydratuje, umožní žehličke hladký pohyb a vďaka jeho výbornej vodivosti dosiahnete pri aplikácii mikropúdov (EMS) skvelý efekt.
2. Prepnite prístroj do režimu LIFTING.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicom po celej tvári po dobu 3 minúty a sústreďte sa hlavne na oblasti výskytu vrások a ochabnutej pleti. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne hydratovaná a že sa po nej hlavica hladko kľže.
4. Ošetrovanie vykonávajte po dobu 1-4 minúty každý deň, u citlivej pleti po dobu 1-2 minúty.
5. Prístroj sa po uplynutí času automaticky prepne do pohotovostného režimu.
6. Hlavicu dôkladne vyutierajte čistiacou handričkou a vodivý gél z pokožky odstráňte kozmetickým tampónikom.

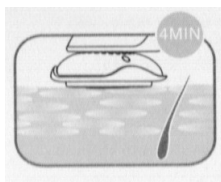

PROGRAM 4 EYE CARE – starostlivosť o očné okolie

V tomto režime prístroj využíva mikrovibračnú technológiu v kombinácii s hrejivou funkciou a červeným svetlom pre spevnenie pleti a zvýšenie produkcie kolagénu v okolí očí. Výsledkom je zníženie opuchov, jasnejší a sviežejší vzhľad pokožky.

1. Na pokožku tváre naneste očný gél s kyselinou hyalurónovou. Nepoužívajte tampónik. Gél pokožku hydratuje, umožní žehličke hladký pohyb a vďaka jeho výbornej vodivosti dosiahnete pri aplikácii skvelý efekt.
2. Prepnite prístroj do režimu EYE CARE.
3. Pre ošetrovanie pokožky v okolí očí použite buď jemné krúživé pohyby alebo tlakovú bodovú masáž. Uistite sa, že vaša pokožka je dostatočne hydratovaná a že sa po nej hlavica hladko kĺže.
4. Ošetrovanie vykonávajte po dobu 1-4 minúty (1-2 minúty pokožka v okolí ľavého oka, 1-2 minúty pokožka v okolí pravého oka) každý deň, u citlivej pleti po dobu 1-2 minúty (1 minúta pokožka v okolí ľavého oka, 1 minúta pokožka v okolí pravého oka)

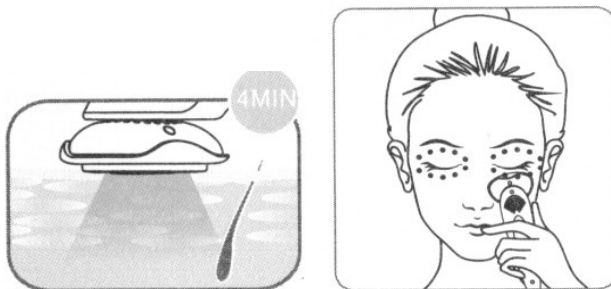


PROGRAM 5 COOL – pre upokojenie pleti

V tomto režime modré LED svetlo pokožku upokojuje, má výrazné dezinfekčné účinky, uzatvára póry, skvele zaberá pri problémoch s akné a zmiernuje podráždenie pokožky. Modré svetlo je schopné likvidovať veľa druhov baktérií a pri problematickej mastnej pleti znižuje množstvo mazu v pokožke.

1. V tomto režime máte možnosť výberu: buď použijete nejaký upokojujúci prípravok, alebo nič.

2. Prepnete prístroj do režimu COOL.
3. Ak používate prípravok: jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania tlaku prechádzajte hlavicou po celej tvári po dobu 3 minúty.
4. Ak nepoužívate prípravok: bodovo prikladajte hlavicu ku pokožke pre jej upokojenie po dobu maximálne 5 sekúnd.
5. Ošetroenie vykonávajte po dobu 1-3 minúty 2-3x týždenne, u citlivej pleti po dobu 1-2 minúty.
6. Na záver ošetroenia naneste na pleť kvalitný pleťový krém.

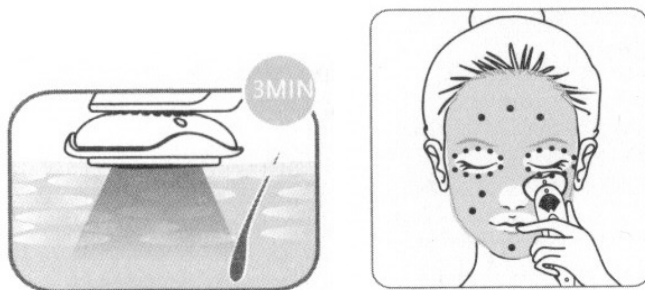

Odporúčané prípravky

Čistiace prípravky:

- Wellmaxx Skineffect – čistiaca pena, alebo tonikum
- Wellmaxx Hyaluron5 Facewash – čistiace tonikum alebo čistiaci gél
- Devee Clear Skin - - čistiace tonikum alebo čistiaci gél

Hyalurónové preparáty:

- Devee Hyaluron gél superkoncentrát (obsahuje 3 druhy kyselín hyalurónových)
- Devee Hyaluron sérum platinové (obsahuje 4 druhy kyselín hyalurónových)
- Wellmaxx Hyaluron5 gél (obsahuje 5 druhov kyselín hyalurónových)
- Wellmaxx Skineffect super hyaluron – ampulky používané aj v kozmetických salónoch
- Beauty Biowave vodivý gél (špeciálny vodivý gél pre žehličky)

Ako často prístroj používať

Odporúčame pravidelné ošetrovanie pleti 2x až 3x do týždňa pre dosiahnutie želaných efektov.

Parametre a technické údaje

Menovité napätie: 5 V

Čas nabíjania: približne 3 hodiny

Intenzita: 3 úrovne

Rozmery / hmotnosť: 58 x 53 x 165 mm / 165g

Tento kozmetický prístroj je elektrické zariadenie, ktoré má vstavanú lítiovú batériu. Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Čistenie

Po použití prístroja utrite prístroj navlhčenou handričkou. Následne prístroj dôkladne osušte suchou handričkou. Nikdy neutierajte magnetický kruh alkoholom, ani čistiacimi prostriedkami. Neponárajte prístroj do vody, ani ho neumiestňujte pod prúd vody.

Skladovanie

Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne porozumel návodu na použitie.

Často kladené otázky a riešenie problémov

Problém:	Možná příčina:	Riešenie problému:
Prístroj sa nezapol.	1. Príliš nízka zostávajúca kapacita batérie. 2. Neznáma porucha.	1. Vyskúšajte zapnúť prístroj po 3 hodinách nabíjania. 2. Ak sa prístroj nezapne, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
Prístroj nefunguje ani po plnom nabití.	1. Kábel z adaptéra nie je správne zasunutý do prístroja, alebo adaptér nie je správne zapojený v elektrickej sieti. 2. Prístroj sa dostatočne nenabil. 3. Batéria je na konci svojej životnosti.	1. Skontrolujte, či sa prístroj správne nabíja. 2. Ak sa prístroj nezapne, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
V režime EMS nepociťujem žiadne účinky.	1. Nedotýkajte sa dotykovej plochy navlhčenými rukami. 2. Príliš nízka zostávajúca kapacita batérie. 3. Poškodenie prístroja.	1. Navlhčite si ruky, dotknite sa kontaktnej plochy a hlavicu priložte na pokožku. 2. Nabíjajte prístroj 3 hodiny a znova vyskúšajte. 3. Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
Teplota prístroja je príliš vysoká.	1. Prístroj používate príliš dlho. 2. Do prístroja mohla vzniknúť voda. 3. Poškodenie prístroja.	1. Vypnite prístroj a opätovne ho vyskúšajte o 30 minút. 2. Nevystavujte prístroj kontaktu s vodou. 3. Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
Prístroj nevibruje.	1. Nedotýkajte sa dotykovej plochy navlhčenými rukami.	2. Navlhčite si ruky, dotknite sa kontaktnej plochy a hlavicu priložte na pokožku.

Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:

www.hyaluron.sk/video

Importér:

Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: **yalongtrade@gmail.com**

tel: **+421 907 173 910**

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*